

BRUKSANVISNING

Sängbord

Produktkod: TableTIM





1. Utförande

Sängbordet har en C-formad metallram. Det har en justerbar bordplatta som föremål kan placeras på och hjul med broms som gör att det kan förflyttas och flyttas över sängen.

Komponenter:

- a. Ram
- b. Bas med hjul (2 set)
- c. Ram på bordplattan
- d. Bordplattans stift
- e. Montagehylsa
- f. Montagehylsa med skruv
- g. Bussning
- h. Skruv med bricka (2 set)
- i. Bordplatta

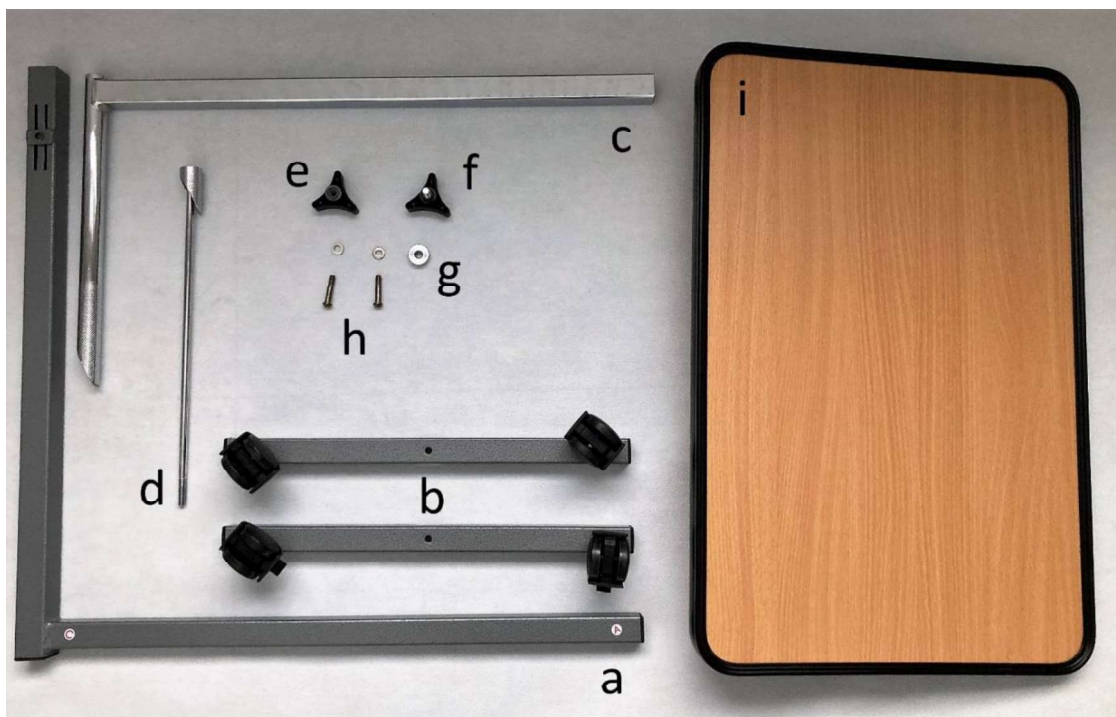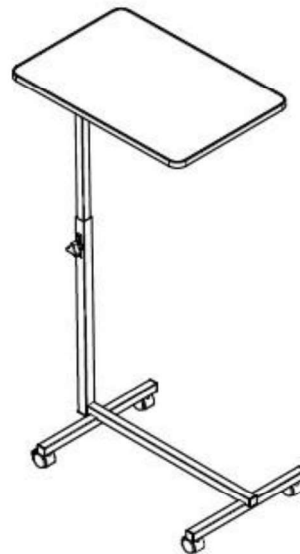

2. Användningsområde

Ett sängbord utformat för att användas direkt ovanför en patients säng så att patienten kan äta, läsa eller skriva i sängen. Produkten är avsedd att användas både under vård i sjukvården och i hemmet.

3. Montage

- skruva fast båda baserna med hjul (b) till ramen (a) - kom ihåg att korrekt matcha bokstäverna - bokstaven "A" från ramen till bokstaven "A" på basen med hjul, på samma sätt för bokstäverna "B " / "CD",
- efter montering av basen, placera den på 4 hjul och lås hjulbromsarna för vidare montering,
- sätt in bänkramen (c) i det fyrkantiga hålet i ramen (a),
- sätt in bordplattans stift (d) i det vinklade hålet i bänkskivans ram (c) på ett sådant sätt att båda snittytorna överlappar varandra,
- för in hylsan (g) i det runda hålet på bordsramen (c) på den utskjutande tråden på ett sådant sätt att den tidigare införda bordplattans stift (d) inte flyttas,
- skruva fast monteringsfjärilen (e) på den utskjutande gängen på bordplattans stift (d) - dra inte åt fjärilen för mycket - dra åt den tillräckligt så att den inte faller ut,
- placera bordplattan (i) på den förberedda bänkskivans ram. För att göra det enklare att montera bänkskivan, håll den med en hand i röret som finns längst ner på bänkskivan. Efter att ha installerat toppen, dra åt monteringsmuttern (e),
- installera montagehylsan med skruven (f) i ramhålet (a) och dra åt den,

Justering av bordets lutningsgrad

- för att justera vinkeln på bordplattan, lossa montagehylsan (e) som sitter på sidan av bordplattan.
- efter att ha ställt in rätt vinkel, dra åt monteringsmuttern (e)

Höjdjustering

- för att justera höjden på bordsskivan, lossa montagehylsan med skruven (f) på basramen (a).
- efter att ha ställt in rätt höjd, dra åt montagehylsan med skruven (f)

Broms

- hjulbromsarna ska vara låsta när bordet används

4. Teknisk specifikation

Mått (L x B)	60,5 cm x 40,2 cm
Bordplattans mått	60 x 40 cm
Justering av bordets lutningsgrad	0° - 90°
Höjdjustering	72 – 112 cm
Vågen	6,7 kg
Max belastning	10 kg
Hjuldiameter	1,50"

5. Kommentarer och rekommendationer

Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av supporten, underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna eller för annan användning än för dess avsedda syfte.

6. Underhåll

Produkten ska rengöras med en fuktig trasa och sedan torkas noggrant. Använd inte starka polermedel eftersom det kan skada skyddsbeläggningarna. Föroreningar bör regelbundet avlägsnas från produktens rörliga delar (gångjärn, klämskruvar, lås).

7. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Produkten omfattas av garantin som beskrivs i det medföljande garantikortet. För garantianspråk måste du spara kvittot eller fakturan som bevis på köp.

9. Markeringar

	Referensnummer		Tillverkare
	Serienummer		Tillverkningsdatum
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs		Läs igenom instruktionerna
	Tillverkaren har utvärderat produkten i enlighet med grundläggande krav för medicintekniska produkter.		

Hela sortimentet är tillgängligt hos våra distributörer. Läs mer på www.timago.com

Tack för att du har valt Timago!