

-
PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE & WHITE ABC MASTERKIT

-
Professional three step whitening system

AT-HOME

INSTRUCTIONS





CAVEX

CAVEX BITE&WHITE





ABC MASTERKIT

Instructions for use

A Activate with Cavex Bite&White Stainless

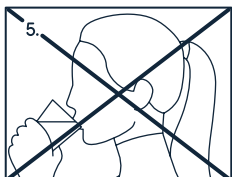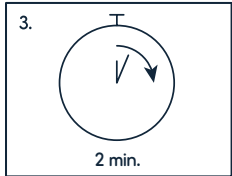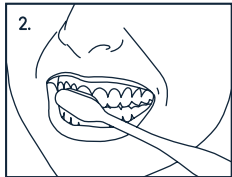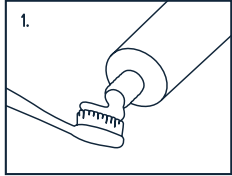





B Brighten with Cavex Bite&White Whitening Gel

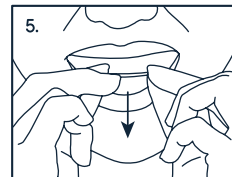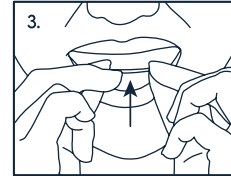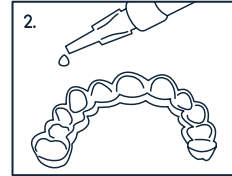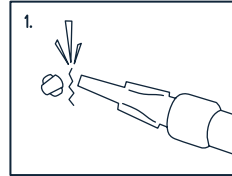

Instruction video



C Condition with Cavex Bite&White ExSense

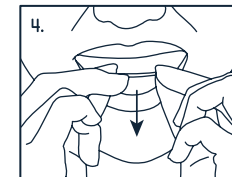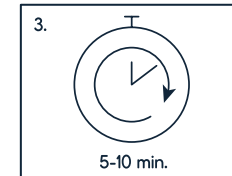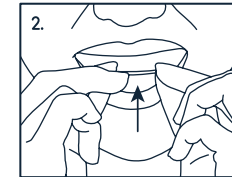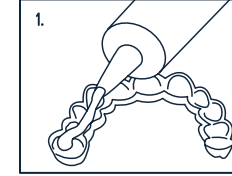

CAVEX BITE&WHITE

ABC MASTERKIT

-
Instructions for use



- NL Tray met spuiten in koelkast bewaren.
- DE Schale mit Spritzen im Kühlschrank aufbewahren.
- FR Conserver la gouttière avec les seringues au réfrigérateur.
- EN Tray with syringes should be stored in a refrigerator.
- IT Conservare il vassoio con le siringhe nel frigorifero.
- ES Guardar las cubetas con las jeringas en el frigorífico.
- HR Tacu sa špricama čuvajte u hladnjaku.
- DK Opbevar tray med sprøjter i køleskab.
- HU A fogsínt a fecskendővel együtt hűtőszekrényben kell tárolni.



- PL Tackę ze strzykawkami przechowywać w lodówce.
- PT Guardar a travessa com seringas no frigorífico.
- SV Förvara brickan med sprutor i kylen.
- TR Şiringalı kalıbı buzdolabında saklayın.
- GR Φυλάξτε δισκάριο με σύριγγες στο ψυγείο.
- RU Лоток со шприцами хранить в холодильнике.
- AR احفظ الصينية و المحاقن الطبية في البراد.

NL	GEbruiksINSTRUCTIES	A - ACTIVEREN - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Breng Cavex Bite&White StainLess aan op de tandenborstel.	2 Poets de tanden grondig.	3 Poets de tanden minstens 2 tot 3 minuten.	4/5 Spuw overtollig materiaal uit. Niet met water spoelen.	B - BLEKEN - CAVEX BITE&WHITE	1 Breek de punt van de spuit af.	2 Laat voor elke tand 1 druppel Bite&White gel in de bleektray vallen.	3 Breng de bleektray in de mond aan.
DE	GEBRUCHSANWEISUNG	A - AKTIVIEREN - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Tragen Sie Cavex Bite&White StainLess auf ihrer Zahnbürste auf.	2 Putzen Sie die Zähne gründlich.	3 Putzen Sie die Zähne mindestens 2 bis 3 Minuten.	4/5 Spucken Sie überschüssiges Material aus. Nicht mit Wasser spülen.	B - BLEICHEN - CAVEX BITE&WHITE	1 Brechen Sie das obere Ende der Spritze ab.	2 Geben Sie für jeden Zahn 1 Tropfen Bite&White Bleichgel in die Schiene.	3 Nehmen Sie die Bleichschiene in den Mund.
FR	MODE D'EMPLOI	A - ACTIVATION - CAVEX ZITE&WHITE STAINLESS	1 Appliquez Cavex Bite&White StainLess sur la brosse à dents.	2 Brossez-vous les dents soigneusement.	3 Brossez-vous les dents pendant au moins 2 à 3 minutes.	4/5 Crachez l'excédent de produit. Ne vous rincez pas la bouche à l'eau.	B - BLANCHIMENT - CAVEX BITE&WHITE	1 Cassez la pointe de la seringue.	2 Versez dans la gouttière 1 goutte de gel Bite&White par dent.	3 Insérez la gouttière dans la bouche.
EN	INSTRUCTIONS	A - ACTIVATION - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Dispense Cavex Bite&White StainLess onto toothbrush	2 Brush the teeth thoroughly	3 Clean teeth at least 2-3 minutes	4/5 Spit out any excess material. Do not rinse with water	B - BRIGHTEN - CAVEX BITE&WHITE	1 Break the tip off the syringe	2 Dispense 1 drop of Bite&White whitening gel into the tray for each tooth	3 Insert the whitening tray into the mouth.
IT	ISTRUZIONI	A - ATTIVAZIONE - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Mettere Cavex Bite&White StainLess sullo spazzolino da denti.	2 Pulire accuratamente i denti.	3 Pulire i denti per almeno 2 - 3 minuti.	4/5 Sputare il materiale in eccesso. Non sciacquare con acqua.	B - SBIANCAMENTO - CAVEX BITE&WHITE	1 Rompere la punta della siringa.	2 Per ogni dente fare cadere 1 goccia di gel Bite&White nella mascherina apposta.	3 Mettere in bocca la mascherina.
ES	INSTRUCCIONES	A - ACTIVACIÓN - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Ponga Cavex Bite&White StainLess en el cepillo.	2 Cepille los dientes a fondo.	3 Cepille los dientes al menos durante 2-3 minutos.	4/5 Escupa todo el material excesivo. No enjuague con agua	B - BLANQUEAMIENTO - CAVEX BITE&WHITE	1 Rompa la punta de la jeringa.	2 Administre para cada diente 1 gota de gel de blanqueamiento Bite&White en la cubeta.	3 Coloque la cubeta de blanqueamiento en la boca.
HR	INSTRUKCIJE	A - ACTIVACIÓN - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Nanesite Cavex Bite&White StainLess na četkicu za zube.	2 Temeljito operite zube.	3 Perite zube najmanje 2-3 minute.	4/5 Ispjunite višak materijala. Ne ispirajte usta vodom.	B - BLANQUEAMIENTO - CAVEX BITE&WHITE	1 Otkinute vrh šprice.	2 Za svaki zub nakapajte 1 kap Bite&White gela za izbjeljivanje u udlagu.	3 Unesite udlagu za izbjeljivanje u usta.
DK	BRUGSINSTRUKTIONER	A - AKTIVERING - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Anbring Cavex Bite&White StainLess på tandbørsten.	2 Børst tænderne grundigt.	3 Børst tænderne mindst 2 til 3 minutter.	4/5 Spyt overflødige rester ud. Skyl ikke med vand!	B - BLEGNING - CAVEX BITE&WHITE	1 Afbræk spidsen på sprajten.	2 Lad for hver tand 1 dråbe Bite&White gel falde i blegningske.	3 Anbring skeen i munden.
HU	HASZNÁLATI	A - AKTIVÁLÁS - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Nyomjon ki a Cavex Bite&White StainLess krémöt a fogkefére	2 Alaposan dörzsölje át a fogakat	3 Tiszítsa a fogakat legalább 2-3 percen át	4/5 A fölösleges anyagot köpje ki. Ne öblítsen vízzel	B - FEHÉRÍTÉS - CAVEX BITE&WHITE	1 Törje le a fecskendő végét	2 Cseppentsen a sinbe minden foghoz 1 csepp Bite&White fehéritő gélt	3 Helyezze be a fehéritő sínt a szájába.
PL	INSTRUKCJA	A - AKTYWACJA - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Nałożyć Cavex Bite&White StainLess na szczoteczkę do zębów.	2 Dokładnie umyć zęby.	3 Myć co najmniej przez 2-3 minuty.	4/5 Wypłuć resztki materiału. Nie płukać zębów wodą.	B - WYBIELANIE - CAVEX BITE&WHITE	1 Odłamać końcówkę strzykawki.	2 Do każdego zęba nałożyć na taśkę 1 kroplę żelu do wybielania Bite&White.	3 Włożyć taśkę do ust.
PT	INSTRUÇÕES	A - ATIVAÇÃO - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Coloque Cavex Bite&White StainLess na escova de dentes	2 Escove os dentes cuidadosamente	3 Escove os dentes durante pelo menos 2 a 3 minutos	4/5 Cuspa o produto em excesso. Não enxaguar com água	B - BRANQUEAMENTO - CAVEX BITE&WHITE	1 Parta o bico da seringa	2 Coloque 1 gota de gel de branqueamento Bite&White na moldeira, para cada dente	3 Insira a moldeira de branqueamento na boca.
SV	BRUKSANVISNING	A - AKTIVERING - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Tryck ut Cavex Bite&White StainLess på tandborsten	2 Borsta tänderna noga	3 Borsta tänderna i minst 2-3 minuter	4/5 Spotta ut allt överflödigt material. Skölj inte med vatten	B - BLEKNING - CAVEX BITE&WHITE	1 Bryt av spetsen på sprutan	2 Droppa 1 droppe Bite&White gel per tand på blekningsbrickan	3 För in blekningsbrickan i munnen.
TR	HASTALAR	A - ETKİLEŞME (AKTİVE ETME)- CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Cavex Bite&White StainLess'i diş fırçasına koyunuz. (sürünüz)	2 Dişleri iyice fırçalayınız.	3 Dişleri en az 2-3 dakika temizleyiniz.	4/5 Fazladan(Fazlalık) maddeleri tükürerek atınız. Su ile durulamayınız.	B - AĞARTMA - CAVEX BITE&WHITE	1 Şiringanın uçunu kırınız	2 Her diş için kalıba 1 damla Bite&White beyazlatma jeli aktınız.	3 Beyazlatma kalıbını(plağın) ağızınıza koyunuz.
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ	A - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Βάλτε Cavex Bite&White StainLess στην οδοντόβουρσα	2 Βουρσίστετε πολύ καλά τα δόντια	3 Καθαρίστε τα δόντια επί 2-3 λεπτά τουλάχιστον	4/5 Φτύστε όσο υλικό ενδεχομένως περισσέει. Μη ξεπλύνετε με νερό	B - ΛΕΥΚΑΝΣΗ - CAVEX BITE&WHITE	1 Σπάστε την άκρη της σύριγγας	2 Βάλτε στο διακόριο για κάθε δόντι 1 σταγόνα λευκαντικού τζελ Bite&White	3 Εισαγάγετε το λευκαντικό διακόριο στο στόμα
RU	ИНСТРУКЦИЯ	A - АКТИВАЦИЯ - CAVEX BITE&WHITE STAINLESS	1 Нанесите пасту Breng Cavex Bite&White StainLess на зубную щетку.	2 Тщательно почистите зубы.	3 Чистка зубов должна занять не менее 2 - 3 минут.	4/5 Выплюньте оставшийся во рту продукт. Не прополаскивать водой!	B - ОТБЕЛИВАНИЕ - CAVEX BITE&WHITE	1 Отломите наконечник шприца.	2 Нанесите по 1 капле геля Bite&White на выемки для зубов в капе для отбеливания.	3 Наденьте капу на зубы.
AR	تعليمات	أ. التفعيل - StainLessCavexBite&White	1 ضع كافيكس بايت أند وايت ستينليس على فرشاة الأسنان.	2 اغسل الأسنان بعناية.	3 اغسل الأسنان لمدة تتراوح بين ٢ إلى ٣ دقائق على الأقل.	4/5 ابطق الكمية الزائدة من المادة من الفم. لا تشطف الفم بالماء!	B. إزالة اللون - StainLessCavexBite&White	1 اكسر الجزء العلوي من الحقنة.	2 انزل من الحقنة قطرة واحدة لكل سن من جلايب أند وايتلى صبنة البيض.	3 ضع صبنة البيض في الفم.

C - CONDITIONEREN - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Houd de bleektray 30 tot 60 minuten in de mond.	5/6/7 Mond grondig uitspoelen met water.	8 Spoel de bleektray af met koud water.	1 Breng Cavex Bite&White ExSense in de bleektray aan. 2 Breng de bleektray in de mond aan. 3 Houd de bleektray 5 tot 10 minuten in de mond. 4/5 Spuw overtollig materiaal na 5 minuten uit. Niet met water spoelen!
C - CONDITIONING - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Behalten Sie die Schiene 30 bis 60 Minuten im Mund.	5/6/7 Spülen Sie den Mund gründlich mit Wasser aus.	8 Spülen Sie die Bleichschiene mit kaltem Wasser aus.	1 Füllen Sie Cavex Bite&White ExSense in ihre Schiene. 2 Nehmen Sie die Bleichschiene in den Mund. 3 Behalten Sie die Schiene 5 bis 10 Minuten im Mund. 4/5 Spucken Sie nach 5 bis 10 Minuten das überschüssige Material aus. Nicht mit Wasser spülen!
C - CONDITIONNEUR - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Gardez la gouttière dans la bouche pendant 30à60minutes.	5/6/7 Rincez-vous abondamment la bouche à l'eau.	8 Rincez la gouttière à l'eau froide.	1 Appliquez Cavex Bite&White ExSense dans la gouttière. 2 Insérez la gouttière dans la bouche. 3 Gardez la gouttière dans la bouche pendant 5à10minutes. 4/5 Crachez l'excédent de produit au bout de 5minutes. Ne vous rincez pas la bouche à l'eau!
C - CONDITION - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Keep the tray in the mouth for between 30 and 60 minutes	5/6/7 Rinse mouth thoroughly with water	8 Rinse whitening tray with cold water	1 Dispense Cavex Bite&White ExSense 2 Insert the whitening tray into the mouth 3 Keep the tray in the mouth for 5 to 10 minutes 4/5 After 5 to 10 minutes, spit out any excess material. Do not rinse with water!
C - CONDIZIONAMENTO - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Tenere la mascherina in bocca per 30 - 60 minuti.	5/6/7 Sciacquare accuratamente la bocca con acqua.	8 Sciacquare la mascherina con acqua fredda.	1 Mettere Cavex Bite&White ExSense nella mascherina. 2 Mettere in bocca la mascherina. 3 Tenere la mascherina in bocca per 5 - 10 minuti. 4/5 Dopo 5 minuti sputare il materiale in eccesso. Non sciacquare con acqua.
C - ACONDICIONAMIENTO - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Deje la cubeta en la boca durante 30 a 60 minutos.	5/6/7 Enjuague la boca abundantemente con agua.	8 Enjuague la cubeta de blanqueamiento con agua fría.	1 Ponga Cavex Bite&White ExSense en la cubeta. 2 Coloque la cubeta de blanqueamiento en la boca. 3 Deje la cubeta en la boca durante 5 a 10 minutos. 4/5 Después de 5 a 10 minutos, escupa todo el material excesivo. No enjuague con agua!
C - ACONDICIONAMIENTO - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Držite udlagu 30-60 minuta u ustima.	5/6/7 Temeljito isperite usta vodom.	8 Udlagu isperite hladnom vodom.	1 Nanosite Cavex Bite&White ExSense na udlagu. 2 Unesite udlagu za izbjeljivanje u usta. 3 Držite udlagu 5-10 minuta u ustima. 4/5 Nakon 5 do 10 minuta ispljunite višak materijala. Ne ispirite usta vodom!
C - KONDITIONERING - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Behold skeen 30 til 60 minutter i munden.	5/6/7 Skyld munden grundigt med vand.	8 Skyld tray af med koldt vand.	1 Anbring Cavex Bite&White ExSense på blegningske. 2 Anbring skeen i munden. 3 Behold skeen 5 til 10 minutter i munden. 4/5 Spyt overflødige rester ud efter 5 minutter. Skyld ikke med vand!
C - KONDICIONÁLÁS - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Tartsa a fálcát a szájában 30-60 percen át	5/6/7 Alaposan öblitse ki a száját vízzel	8 Öblitse ki a fehéritő sínt hideg vízzel	1 Nyomjon ki a Cavex Bite&White ExSense krémből a sínbe 2 Helyezze be a fehéritő sínt a szájába 3 Tartsa a fálcát a szájában 5-10 percen át 4/5 5-10 perc elteltével köpje ki a fölösleges anyagot. Ne öblítsen vízzel!
C - PIEŁĘGNACJA - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Trzymać taczkę w ustach przez 30 do 60 minut.	5/6/7 Dokładnie przepłukać zęby wodą.	8 Zmyć taczkę zimną wodą.	1 Należy Cavex Bite&White ExSense na taczkę. 2 Włożyć taczkę do ust. 3 Trzymać taczkę w ustach przez 5 do 10 minut. 4/5 Po 5-10 minutach wypłuć resztki środka. Nie płukać zębów wodą!
C - CONDICIONAMENTO - CAVEX BITE&WHITE			
4 Mantenha a moldeira na boca durante 30 a 60 minutos	5/6/7 Enxague a boca cuidadosamente com água	8 Enxague a moldeira de branqueamento com água fria	1 Coloque Cavex Bite&White ExSense na moldeira 2 Insira a moldeira de branqueamento na boca 3 Mantenha a moldeira na boca durante 5 a 10 minutos 4/5 Após 5 a 10 minutos, cuspa o produto em excesso. Não enxaguar com água!
C - UNDERHÅLL - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Håll brickan i munnen i mellan 30 och 60 minuter	5/6/7 Skölj munnen noga med vatten	8 Skölj av blekningsbrickan med kallt vatten	1 Lägg Cavex Bite&White ExSense på brickan 2 För in blekningsbrickan i munnen 3 Håll brickan i munnen i 5-10 minuter 4/5 Spotta ut allt överflödigt material efter 5-10 minuter. Skölj inte med vatten!
C - KONDISYONLAMA (UYGULAMA) - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Kalıb (Plaç) 30 ila 60 dakika arasında ağzınızda tutunuz.	5/6/7 Ağzınıza suyla iyice durulayınız.	8 Beyazlatma kalibini (plağın) soğuk suyla durulayınız.	1 Cavex Bite&White ExSense'i kalıba (plağa) dağıtınız. 2 Beyazlatma kalıba (plağın) ağzınıza koyunuz. (yerleřtiriniz) 3 Kalıb (plağ) ağzınızda 5 ila 10 dakika tutunuz. 4/5 5 ila 10 dakikadan sonra fazladan maddeyi tükürerek atınız. Su ile durulamayınız!
C - ΧΡΗΣΗ ΚΟΝΤΙΣΙΟΝΕΡ - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Κρατήστε το δισκίο στο στόμα επί 30 έως 60 λεπτά	5/6/7 Ξεπλύνετε πολύ καλά το στόμα με νερό	8 Ξεπλύνετε το λευκαντικό δισκίο με κρύο νερό	1 Βάλτε Cavex Bite&White ExSense στο δισκίο 2 Εισαγάγετε το λευκαντικό δισκίο στο στόμα 3 Κρατήστε το δισκίο στο στόμα επί 5 έως 10 λεπτά 4/5 Ύστερα από 5 έως 10 λεπτά, φτύστε όσα υλικά ενδεχομένως περισσέυει. Μη ξεπλύνετε με νερό!
C - ЗАВЕРШЕНИЕ - CAVEX BITE&WHITE EXSENSE			
4 Оставьте капю во рту на 30 - 60 минут.	5/6/7 Тщательно прополоскайте рот.	8 Промыть капю холодной водой.	1 Нанесите средство Cavex Bite&White ExSense на капю для отбеливания. 2 Оденьте капю на зубы. 3 Оставьте капю во рту на 5 - 10 минут. 4/5 По истечении 5 минут выплюньте оставшийся во рту продукт. Не прополаскивать водой!

ب. التبييض - CavexBite&White كافيكس بايت أند وايت

4 ارتك صنية التبييض في الفم لمدة تتراوح بين ٠٢ إلى ٠١ دقيقة.

5/6/7 اشطف الفم بالماء جيدا.

8 اغسل صنية التبييض بالماء البارد.

11 اخرج محتوى كافيكس بايت أند وايت اكسس على صنية التبييض.

٢١ ضع صنية التبييض في الفم.

٢١ ارتك صنية التبييض في الفم لمدة تتراوح بين ٥ إلى ٠١ دقائق

٤١ اضع الكمية الزائدة من المادة من الفم. لا تشطف الفم بالماء!

ج. التظيف - CavexBite&WhiteExSense كافيكس بايت أند وايتاكسس

**CAVEX BITE&WHITE ABC-MASTERKIT:
Thuisbleekstelsysteem in 3 stappen**

**STAP A = ACTIVEREN:
CAVEX BITE&WHITE STAINLESS**

OMSCHRIJVING

Tandbleekactivator & pasta voor vlekken verwijdering. Verwijderd oppervlakkige vlekken en plak van tanden. Versterkt bleekbehandelingen dankzij verhoging van de pH-waarde in de mond.
- Mild abrasief voor glazuur / dentine.
- Hoge reinigende en polijstende waarde.
- Verhoogt de pH-waarde in de mond als voorbehandeling voor bleken.
- Niet bedoeld voor frequent gebruik.

VERPAKKING

Tube 35 ml – 50 gr

BESTANDDELEN

Water, sorbitol, gehydrateerde silica, glycerine, erythritol, lithium magnesium natriumsilicaat, poloxamer 124, natriumhexametafosfaat, cellulosegom, xanthangom, fenoxylethanol, Cl 42090, mentha arvensis-extract, l-limoneen, natriumsaccharine.

WAARSCHUWINGEN

Buiten bereik van kinderen houden.
Beperkte houdbaarheid na opening.



BEWAARADVIES

Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 25 °C (77 °F). Bewaren op een donkere, droge plaats (vorstvrij). Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Gebruik het materiaal niet na de vervaldatum.

STAP B = BLEKEN: CAVEX BITE&WHITE

OMSCHRIJVING

Waterstofperoxide dient als bleekmiddel in Cavex Bite&White. Het wordt toegevoegd als carbamideperoxide om een voldoende stabiel product te verkrijgen. De carbamideperoxide lost snel op in zuurstofradicalen en water. Tijdens het bleekproces vallen de vrije radicalen de dubbele koolstofverbindingen aan; deze vormen meestal de bron van tandverkleuring.

VERPAKKING

3 Cavex Bite&White 3 ml-sputen

ACTIEVE BESTANDDELEN

- 16 % Carbamideperoxide – gelijk aan 6 % waterstofperoxide
- 0,1 % Natriumfluoride-desensitizer

BESTANDDELEN VAN CAVEX BITE&WHITE

Glycerine, water, ureumperoxide, polyacrylzuur, kaliumhydroxide, kaliumnitraat, natriumfluoride, EDTA, mentha arvensis-extract.

WAARSCHUWINGEN

- Bevat waterstofperoxide.
- Bevat natriumfluoride.
- Contact met de ogen vermijden.
Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken bij overgevoelige tanden.
- Eet, drink of rook niet terwijl u de tray draagt.
- Gevaarlijk bij inslikken.
< 6 % Waterstofperoxide. Niet gebruiken bij personen jonger dan 18 jaar. Alleen te verkopen aan beoefenaars der tandheelkunde. Voor elke gebruikscyclus, het eerste gebruik uitsluitend door beoefenaars der tandheelkunde of onder hun rechtstreeks toezicht als een gelijkwaardig veiligheidsniveau gewaarborgd is. Vervolgens alleen ter beschikking van de consument te stellen voor de rest van de gebruikscyclus.



INDICATIES VOOR GEBRUIK

Cavex Bite&White is een gel om tanden wit te kleuren, waarbij de kleur van natuurlijke tanden wordt gebleekt. Cavex Bite&White mag alleen in opdracht van een tandheelkundige worden verstrekt. Een consult bij een bevoegde tandarts vóór elke bleekbehandeling wordt aanbevolen om mond of gezondheidsproblemen uit te sluiten.

CONTRA-INDICATIES

Er wordt aanbevolen om in onderstaande gevallen een arts te raadplegen:
- bij zwangere vrouwen, en vrouwen die borstvoeding geven;
- bij personen die worden behandeld voor een ernstige ziekte;
- bij kinderen jonger dan 18 jaar.

KLINISCHE PROCEDURE

- Leg de uitgangskleur vast, evalueer de huidige gezondheid van het gebit en zorg er voor dat de verwachtingen van de patiënt over het eindresultaat realistisch zijn.
- Provisorische of tijdelijke gebitsrestauraties kunnen tijdens het bleekproces verkleuren, terwijl compositie- of polycarbonaat materiaal niet wordt beïnvloed.
- Aan patiënten met compositierestauraties dient dan ook te worden meegedeeld dat bestaande composieten wellicht moeten worden vervangen, aangezien alleen natuurlijke tanden witter worden.
- Wacht bij patiënten die een esthetische of adhesieve restauratie nodig hebben, 2 weken na de laatste bleekbehandeling; de kleur kan zich dan stabiliseren. Alle restauraties dienen intact te zijn, of goed geseald met de juiste tijdelijke materialen.
- Het gebruik van een tandpasta voor gevoelige tanden, 2 weken voor de behandeling tot 2 weken daarna, dient te worden aanbevolen.
- U dient de patiënt altijd te waarschuwen voor gevoeligheid van de tanden of geïrriteerd tandvlees tijdens de behandeling. Het tandvlees dat met het middel in aanraking

komt, kan rood of wit worden, maar krijgt na enkele dagen zijn normale kleur weer terug.
- Adviseer de patiënt - om irritatie van zacht weefsel te voorkomen - om de bleektray niet te overladen, om overtollige gel weg te vegen aan de grens van het tandvlees en om de mond na de behandeling grondig te spoelen.
- Wijs de patiënt er op dat het dopje na elke behandeling weer op de spuit moet worden geplaatst.
- De patiënt mag minstens 30 minuten na elke behandeling niet eten, drinken of roken.
- Instrueer de patiënt om de behandeling te stoppen en onmiddellijk contact met u op te nemen als er zich een probleem voordoet.
- De uiteindelijke kleur komt circa 2 weken na het begin van de behandeling tot stand. Na de behandeling dient een vervolgspraak te worden gemaakt.

INSTRUCTIES VOOR EERSTE HULP

- Bij inslikken van een grote hoeveelheid gel (meer dan 25% van de gel in de spuit; meteen water drinken, niet geforceerd overgeven en een arts raadplegen.
- Indien er gel in de ogen komt; oogleden optrekken, het oog minstens 15 minuten achter elkaar met water spoelen en een arts raadplegen.
- Bij contact met kleding, huid of haar: aangetaste kleding verwijderen en huid of haar spoelen met veel water.

MOGELIJKE SCHADELIJKE EFFECTEN

Schadelijke effecten die kunnen samenhangen met het gebruik van Cavex Bite&White zijn onder andere, maar niet uitsluitend:

Gevoelige tanden

Sommige patiënten kunnen tijdens de behandeling extra gevoeligheid van de tanden voor kou ervaren; anderen kunnen een specifieke gevoeligheid van tanden, tandvlees, tong, lippen of keel ondervinden. In het algemeen dienen de symptomen enkele dagen na beëindiging van de behandeling te verdwijnen. De behandeling kan worden voortgezet met kortere, minder frequente applicaties totdat het gewenste blekeffect is bereikt. Als het ongemak blijft, dient de behandeling te worden beëindigd.

Irritatie van het tandvlees

Bleektrays die zich uitstrekken tot het tandvlees, kunnen een matige tot ernstige irritatie van zacht weefsel veroorzaken. Indien de bleektrays goed passen, controleer dan of de patiënt de correcte hoeveelheid op de juiste manier verwerkt. Wellicht dient de patiënt de hoeveelheid gel in de bleektrays te verminderen.

BEWAARADVIES

- Gekoeld bewaren (<8°C)
- Bewaren op een donkere, droge plaats.
- Vermijd blootstelling aan direct zonlicht.

- Gebruik het product niet na overschrijding van de houdbaarheidsdatum.



AFVOER

Voer het product af conform de lokale afvalvoorschriften.

**STAP C = CONDITIONEREN:
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE**

OMSCHRIJVING

Cavex Bite&White ExSense is een gel op waterbasis met een muntsmaak en bevat Hydroxyapatiet en Kalisulfaat. Cavex Bite&White ExSense vermindert de gevoeligheid en maakt tanden witter dankzij re-mineralisatie van Hydroxyapatiet.

VERPAKKING

Tube 42 ml – 50 gr (voldoende voor circa 20 behandelingen)

**HOOFDBESTANDDELEN VAN
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:**

Hydroxyapatiet 2%

SAMENSTELLING

Water, sorbitol, glycerine, erythritol, lithium magnesiumnatriumsilicaat, hydroxyapatiet, Kaliumnitraat, fenoxylethanol, xanthaangom, Tetrasodium pyrofosfaat, wijnsteenzuur, mentha spicata-olie, natriumsaccharine.

INDICATIES VOOR GEBRUIK

- Na het bleken van tanden op kantoor en/of thuis
- Na een professionele reinigingsbeurt van het gebit
- Voorkomen en beheersen van gevoeligheid

CONTRA-INDICATIES

Gebruik Cavex Bite&White ExSense niet bij een allergie voor munt of een van de bestanddelen.

PROCEDURE VOOR GEBRUIK

1. Tandens voorbereiden en reinigen door borstelen en flossen.
2. Toepassing:

Zonder bleektray: Was de handen grondig met water en zeep. Breng een kleine hoeveelheid Cavex Bite&White ExSense op een schone vinger aan. Verdeel de gel rustig over alle vlakken van de bovenen ondertanden. Laat de gel 5 à 10 minuten inwerken. Spuw eventuele overtollige gel uit en spoel de mond niet met water.

Met bleektray: Breng een strookje Cavex Bite&White ExSense aan op de gehele bleektray. Breng de bleektray in en draai deze rustig naar links en rechts, zodat de gel goed over de tanden wordt verdeeld. Bij dan langzaam op de

bleektray en laat de gel 5 à 10 minuten inwerken. Verwijder de bleektray, spuw eventuele overtollige gel uit en spoel de mond niet met water. Spoel de bleektray af met koud water.

3. Draai de dop na gebruik altijd meteen op de tube.
4. Voor optimale resultaten: minstens 30 minuten na de behandeling niet eten of drinken.
5. Gebruik het product 10 dagen lang elke dag, of volg de instructies van uw tandheelkundig adviseur.

WAARSCHUWINGEN & EHBO-INSTRUCTIES

Bij contact met de ogen: grondig spoelen met veel water en medische hulp inroepen. Gebruik het product niet na overschrijding van de houdbaarheidsdatum.

BEWAARADVIES

Bewaren op een koude, droge (vorstvrije) plaats, beschermd tegen direct zonlicht.



Geproduceerd door Cavex Holland BV

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédé's en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

**CAVEX BITE&WHITE ABC MASTER KIT:
3-Schritt-Bleichsystem für den Hausgebrauch**

**SCHRITT A = AKTIVIEREN:
CAVEX BITE&WHITE STAINLESS**

BESCHREIBUNG

Zahnaufhellungs-Aktivator & Paste zum Entfernen von Flecken. Entfernt oberflächliche Flecken und Zahnbelag von den Zähnen. Verstärkt Bleichbehandlungen durch Optimierung des pH-Wertes im Mund.
- Leicht abrasiv für Zahnschmelz und Dentin
- Hohe Reinigungs- und Polierleistung
- Erhöht den pH-Wert im Mund als Vorbehandlung für das Bleichen
- Nicht zum häufigen Gebrauch vorgesehen.

VERPACKUNG

Tube 35 ml – 50 g

INHALTSSTOFFE

Wasser, Sorbitol, Kieselsäure, Glycerin, Erythritol, Lithium-Magnesium-Natriumsilicat, Poloxamer 124, Natriumhexametaphosphat, Cellulosegummi, Xanthangummi, Phenoxethanol, CI 42090, Mentha arvensis-Extrakt, L-Limonen, Natriumsaccharin.

WARNHINWEISE:

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach Anbruch begrenzt haltbar.



LAGERHINWEISE

Die Lagertemperatur darf 25 °C nicht überschreiten. An einem dunklen, trockenen Ort (frostgeschützt) lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

STUFE B = BLEICHEN: CAVEX BITE&WHITE

BESCHREIBUNG

Wasserstoffperoxid wird als Bleichmittel in Cavex Bite&White verwendet. Es wird als Carbamid Peroxid hinzugefügt, um ein ausreichend stabiles Produkt zu erhalten. Das Carbamid Peroxid löst sich schnell in Sauerstoffradikalen und Wasser auf. Während des Bleichprozesses greifen die freien Radikale die doppelten Kohlenstoffverbindungen an. Diese sind in den meisten Fällen die Ursache der Zahnverfärbung.

VERPACKUNG

3 Cavex Bite&White 3-ml-Spritzen

WIRKSTOFFE

- 16 % Carbamidperoxid – entsprechend 6 % Wasserstoffperoxid
- 0,1 % Natriumfluorid-Desensibilisierungsmittel

ZUSAMMENSETZUNG

Glycerin, Wasser, Harnstoffperoxid, Polyacrylsäure, Kaliumhydroxid, Kaliumnitrat, Natriumfluorid, EDTA, Mentha-arvensis-Extrakt.

WARNHINWEISE:

- Enthält Wasserstoffperoxid.
- Enthält Natriumfluorid.
- Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Sofort Augen spülen, falls das Erzeugnis mit den Augen in Berührung gekommen ist.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht anwenden bei bereits empfindlichen Zähnen.
- Während Sie die Schale tragen, dürfen Sie auf keinen Fall essen, trinken oder rauchen.
- Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Wasserstoffperoxid < 6 %; Nicht bei Personen unter 18 Jahren anwenden. Darf nur an Zahnärzte abgegeben werden. In jedem Anwendungszyklus muss die erste Anwendung stets einem Zahnarzt vorbehalten sein oder unter dessen direkter Aufsicht erfolgen, falls ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach muss das Mittel dem Verbraucher für den verbleibenden Anwendungszyklus bereitgestellt werden.

ANGABEN ZUR VERWENDUNG

Cavex Bite&White ist ein Gel zur Aufhellung der Zähne, wobei die Farbe natürlicher Zähne aufgehellt wird. Cavex Bite&White darf ausschließlich auf Rezept eines Zahnarztes ausgegeben werden. Vor jeder Bleichbehandlung wird eine Beratung durch einen qualifizierten Zahnarzt empfohlen, um Mund- oder Gesundheitsprobleme auszuschließen.

GEGENANZEIGEN

- In folgenden Fällen wird empfohlen, einen Arzt aufzusuchen:
- bei schwangeren und stillenden Frauen
 - bei Personen, die für eine ernsthafte Krankheit behandelt werden
 - bei Kindern unter 18 Jahren

KLINISCHE ANWENDUNG

- Halten Sie zuerst den Anfangsfarbton fest, prüfen Sie die derzeitige Zahngesundheit und sorgen Sie dafür, dass der Patient realistische Erwartungen an das Endergebnis hat
- Provisorische oder vorübergehende Reparaturen können sich während der Behandlung verfärben, während Komposit- oder Polycarbonat-Materialien unbeeinträchtigt bleiben. Darum müssen Patienten mit Komposit-Restaurationen darauf hingewiesen werden, dass bestehende Komposit-Materialien möglicherweise erst ersetzt werden müssen, da der Aufhellungseffekt nur bei natürlichen Zähnen wirkt.
- Bei Patienten, die ästhetische oder adhäsive Restaurationen benötigen, ist nach der letzten Aufhellungsbehandlung 2 Wochen abzuwarten, bis sich der Farbton stabilisiert hat. Alle Restaurationen müssen intakt oder adäquat mit geeigneten provisorischen Materialien versiegelt sein.
- Empfehlen Sie den Patienten, in der Zeit von 2 Wochen vor der Behandlung bis 2 Wochen nach



der Behandlung eine besondere Zahnpasta für empfindliche Zähne zu verwenden.

- Sie müssen die Patienten immer darauf hinweisen, dass während der Behandlung Zahnempfindlichkeit oder Zahnfleischreizungen auftreten können. Mit dem Produkt in Berührung gekommene Zahnfleischbereiche können rot oder weiß werden, erhalten aber nach einigen Tagen wieder ihre normale Färbung.
- Zur Vermeidung von Gewebereizungen müssen Sie die Patienten darauf hinweisen, eine Überfüllung der Schalen zu vermeiden, überschüssiges Gel von der Zahnfleischgrenze abzutupfen und den Mund nach der Behandlung gründlich auszuspülen.
- Weisen Sie die Patienten darauf hin, dass unbedingt nach jeder Behandlung den Spritzenverschluss wiederaufgesetzt werden muss.
- Nach jeder Behandlung dürfen die Patienten mindestens 30 Minuten lang nicht essen, trinken oder rauchen.
- Weisen Sie die Patienten darauf hin, dass sie bei Auftreten von Problemen die Behandlung abbrechen und Kontakt mit Ihnen aufnehmen müssen.
- Der letztendliche Farbton wird ungefähr 2 Wochen nach Anfang der Behandlung erreicht. Es muss ein Kontrolltermin nach der Behandlung vereinbart werden.

ANWEISUNGEN ZUR ERSTEN HILFE

- Beim Verschlucken einer großen Menge (über 25 % des Gels in der Spritze), sofort Wasser trinken, kein Erbrechen herbeiführen und einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Gel in die Augen gelangt, Augenlider nach oben ziehen, das Auge mindestens 15 Minuten ununterbrochen mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bei Kontakt mit Kleidung, Haut oder Haar, kontaminierte Kleidung entfernen und Haut und Haar unter fließendem Wasser abspülen.

POTENZIELLE NEBENWIRKUNGEN

Nebenwirkungen, die mit dem Gebrauch von Cavex Bite&White zusammenhängen, sind unter anderem, aber nicht ausschließlich:

Empfindlichkeit

Manche Patienten empfinden während der Behandlung eine erhöhte Kälteempfindlichkeit der Zähne; bei anderen kommt es zu einer nicht-spezifischen Empfindlichkeit der Zähne, des Zahnfleisches, der Zunge, der Lippen oder des Rachens. Im Allgemeinen müssen die Symptome einige Tage nach Beendigung der Behandlung verschwinden. Die Behandlung kann mit kürzeren, weniger frequenten Anwendungen fortgesetzt werden, bis die gewünschte Bleichwirkung erreicht wurde. Wenn die Beschwerden andauern, muss die Behandlung beendet werden.

Reizung des Zahnfleisches

Schiene, die bis über das Zahnfleisch reichen, können eine mäßige bis ernsthafte Reizung

des weichen Gewebes verursachen. Wenn die Schienen gut passen, überprüfen Sie bitte, ob der Patient die richtige Menge auf die richtige Weise anbringt. Eventuell muss die Menge des Gels in den Schienen verringert werden.

LAGERHINWEISE

- Gekühlt lagern (<8 °C).
- An einem dunklen, trockenen Ort lagern.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.



ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt den lokalen Abfallvorschriften entsprechend.

**STUFE C = CONDITION:
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE**

BESCHREIBUNG

Cavex Bite&White ExSense ist ein Gel auf Wasserbasis mit Minze-Aroma und enthält Hydroxyapatit und Kaliumnitrat. Cavex Bite&White ExSense verringert die Empfindlichkeit und verbessert das Bleichergebnis der Zähne durch die Remineralisierung von Hydroxyapatit.

VERPACKUNG

Tube 42 ml – 50 g (ausreichend für ca. 20 Behandlungen)

**HAUPTBESTANDTEILE VON
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:**

Hydroxyapatit 2 %

ZUSAMMENSETZUNG

Wasser, Sorbitol, Glycerin, Erythritol, Lithium-Magnesium-Natrium-Silicat, Hydroxyapatit, Kaliumnitrat, Phenoxethanol, Xanthangummi, Tetranatriumpyrophosphat, Weinsäure, Mentha-spicata-Öl, Natriumsaccharin.

ANGABEN ZUR VERWENDUNG

- Nach dem Bleichen der Zähne im Büro und/oder zu Hause
- Nach einer professionellen Zahnreinigung
- Vermeidung und Verringerung der Empfindlichkeit

GEGENANZEIGEN

Verwenden Sie Cavex Bite&White ExSense nicht bei einer Allergie gegen Minz-Aroma oder einen der anderen Bestandteile.

ANWENDUNGSVERFAHREN

1. Zähne vorbereiten und reinigen durch Putzen und Verwendung von Zahnpaste.
2. Anwendung:

Ohne Schiene: Waschen Sie die Hände sorgfältig mit Wasser und Seife. Bringen Sie eine geringe Menge Cavex Bite&White ExSense auf einem

sauberen Finger auf. Verteilen Sie das Gel vorsichtig über alle Flächen der oberen und unteren Zähne. Lassen Sie das Gel 10 Minuten einwirken. Spucken Sie eventuell überschüssiges Gel aus, aber spülen Sie den Mund nicht mit Wasser aus.

Mit Schiene: Tragen Sie einen schmalen Streifen Cavex Bite&White ExSense auf ihre Schiene auf. Bringen Sie ihre Schiene ein und drehen Sie diese vorsichtig nach links und rechts, so dass das Gel gut über die Zähne verteilt wird. Beißen Sie anschließend vorsichtig auf die Schiene und lassen Sie das Gel 10 Minuten einwirken. Entfernen Sie die Schiene und spucken Sie eventuell überschüssiges Gel aus, aber spülen Sie den Mund nicht mit Wasser aus. Spülen Sie die Schiene mit kaltem Wasser ab.

3. Schrauben Sie den Verschluss nach dem Gebrauch immer sofort wieder auf die Tube.
4. Für optimale Ergebnisse mindestens 30 Minuten nach der Behandlung nicht essen oder trinken.
5. Verwenden Sie das Produkt 10 Tage lang täglich oder befolgen Sie die Anweisungen Ihres Zahnarztes.

WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN ZUR ERSTEN HILFE

Bei Kontakt mit den Augen, gründlich spülen mit reichlich Wasser und einen Arzt aufsuchen. Das Produkt nach Verstreichen des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

AUFBEWAHRUNGSEMPFEHLUNG

An einem kühlen, trockenen (frostfreien) Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Hergestellt von Cavex Holland BV

unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware beschränkt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

MASTER KIT ABC CAVEX BITE&WHITE: Système de blanchiment à domicile en 3 étapes

ÉTAPE A = ACTIVATION: CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

DESCRIPTION

Activateur de blanchiment dentaire et pâte d'élimination des taches. Élimine les taches superficielles et la plaque dentaire. Renforce les traitements de blanchiment grâce à l'augmentation du pH de la bouche.

- Abrasif doux pour l'émail / la dentine.
- Haute valeur nettoyante et polissante.
- Augmente le pH de la bouche en guise de pré-traitement avant le blanchiment.
- N'est pas conçu pour un usage fréquent.

CONDITIONNEMENT

Tube de 35ml – 50g

INGRÉDIENTS

Eau, sorbitol, silice hydratée, glycérine, Érythritol, lithium magnesium sodium silicate, poloxamer 124, hexamétophosphate de sodium, gomme de cellulose, gomme xanthane, phénoxyéthanol, Cl 42090, extrait de mentha arvensis, l-limonène, saccharine de sodium.

AVERTISSEMENTS

Tenir hors de la portée des enfants. Durée de conservation limitée après ouverture.



CONSEIL DE CONSERVATION

Ne pas conserver à des températures supérieures à 25 °C (77 °F). Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité (hors gel). Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser le produit après la date d'expiration.

ÉTAPE B = BLANCHIMENT: CAVEX BITE&WHITE

DESCRIPTION

Le peroxyde d'hydrogène est l'agent de blanchiment de Cavex Bite&White. Il est ajouté sous forme de peroxyde de carbamide afin d'obtenir un produit suffisamment stable. Le peroxyde de carbamide se dissout rapidement dans les radicaux d'oxygène et l'eau. Pendant le processus de blanchiment, les radicaux libres attaquent les doubles liaisons de carbone, qui sont généralement à l'origine de la décoloration des dents.

CONDITIONNEMENT

3 seringues contenant 3 ml de Cavex Bite&White

INGRÉDIENTS ACTIFS

- Peroxyde de carbamide à 16 % – équivalent de peroxyde d'hydrogène à 6 %
- Désensibilisant fluorure de sodium à 0,1 %

COMPOSITION

Glycérine, eau, peroxyde de carbamide, acide polyacrylique, hydroxyde de potassium, nitrate de potassium, fluorure de sodium, EDTA, extrait de mentha arvensis.

AVERTISSEMENTS

- Contient du peroxyde d'hydrogène.
- Contient du fluorure de sodium.
- Éviter le contact avec les yeux. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Éviter l'exposition des dents avérées sensibles.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant le port de la gouttière.
- Dangereux en cas d'absorption.

Peroxyde d'hydrogène < 6 % : Ne pas utiliser chez les enfants/ adolescents âgés de moins de 18 ans. Doit être vendu uniquement à des praticiens de l'art dentaire. Pour chaque cycle d'utilisation, la première utilisation doit être effectuée uniquement par des praticiens de l'art dentaire ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d'utilisation.

INDICATIONS D'UTILISATION

Cavex Bite&White est un gel de blanchiment dentaire permettant d'éclaircir la couleur des dents naturelles. Cavex Bite&White ne peut être distribué que sur ordonnance d'un professionnel dentaire. Il est recommandé de consulter un dentiste qualifié avant chaque traitement de blanchiment afin d'exclure tout problème buccal ou de santé.

CONTRE-INDICATIONS

Dans les cas suivants, il est recommandé de consulter un médecin:

- les femmes enceintes et femmes qui allaitent;
- les personnes qui suivent un traitement contre une maladie grave;
- les enfants de moins de 18ans.

PROCÉDURE CLINIQUE

- Notez la teinte de départ, revoyez la santé bucco-dentaire actuelle et assurez-vous que le patient a des attentes réalistes quant au résultat final.
- Les restaurations provisoires ou temporaires peuvent se décolorer pendant le processus de blanchiment alors que les matériaux en composite ou polycarbonate resteront intacts. Il convient donc d'avertir les patients avec restaurations composite que les composites existants pourraient nécessiter un remplacement étant donné que seules les dents naturelles seront blanchies.
- Pour les patients nécessitant des restaurations esthétiques ou adhésives, attendez 2 semaines après le dernier blanchiment pour que la couleur puisse se stabiliser. Toutes les restaurations doivent être intactes ou bien scellées avec des

matériaux temporaires adéquats.

- L'utilisation d'un dentifrice soulageant la sensibilité devrait être conseillée pour la période commençant 2 semaines avant et se terminant 2 semaines après la procédure.
- Les patients devraient toujours être avertis du risque de sensibilité dentaire et irritation gingivale pendant le traitement. Les zones gingivales en contact peuvent rougir ou blanchir, mais retrouveront leur couleur normale au bout de quelques jours.
- En prévention de l'irritation des tissus mous, conseillez au patient d'éviter de surcharger les gouttières, de retirer à la brosse tout excédent de gel sur le rebord gingival et de soigneusement rincer la bouche après le traitement.
- Assurez-vous que le patient remet le capuchon de la seringue après chaque traitement.
- Le patient évitera de manger, boire et fumer pendant au moins 30 minutes après chaque traitement.
- Donnez au patient pour consigne d'arrêter le traitement et de vous contacter immédiatement si un problème survient.
- La teinte finale sera atteinte environ 2 semaines après le début du traitement. Un rendez-vous de suivi devrait être convenu après le traitement.

INDICATIONS DE PREMIERS SECOURS

- Lorsqu'une grande quantité de gel (plus de 25% du gel contenu dans la seringue) a été avalée: boire immédiatement de l'eau, ne pas provoquer de vomissements et consulter un médecin.
- En cas de contact du gel avec les yeux: rincer l'œil à l'eau durant au moins 15 minutes sans interruption en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
- En cas de contact avec un vêtement, la peau ou les cheveux: enlever le vêtement souillé et rincer abondamment la peau ou les cheveux à l'eau.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

L'utilisation de Cavex Bite&White peut s'accompagner d'effets indésirables qui peuvent être les suivants (cette liste n'étant pas exhaustive):

Sensibilité des dents

Durant le traitement, certains patients peuvent ressentir une sensibilité accrue des dents au froid; d'autres peuvent ressentir une sensibilité non spécifique des dents, des gencives, de la langue, des lèvres ou de la gorge. D'une façon générale, les symptômes doivent disparaître quelques jours après la fin du traitement. Le traitement peut être continué par des applications plus courtes, moins fréquentes, jusqu'à ce que l'effet de blanchiment désiré soit atteint. Si les inconvénients persistent, le traitement doit être cessé.

Irritation des gencives

Les gouttières qui s'étendent jusqu'aux gencives peuvent provoquer une irritation modérée à sévère des tissus mous.

Si les gouttières s'adaptent bien, vérifiez si le patient applique correctement la quantité requise de gel. Peut-être doit-il réduire la quantité de gel appliquée dans les gouttières.

CONSEIL DE CONSERVATION

- Conserver au réfrigérateur (<8 °C).
- Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil
- Ne pas utiliser le produit après la date d'expiration.



ÉLIMINATION

Éliminer le produit conformément aux règles locales en matière de déchets.

ÉTAPE C = CONDITIONNEUR: CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

DESCRIPTION

Cavex Bite&White ExSense est un gel à base d'eau au goût de menthe et contenant de l'hydroxyapatite et du salpêtre. Cavex Bite&White ExSense réduit la sensibilité et rend les dents plus blanches par reminéralisation de l'hydroxyapatite.

CONDITIONNEMENT

Tube de 42ml – 50grammes (suffit pour environ 20traitements)

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS DE CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:

Hydroxyapatite 2%

COMPOSITION

Eau, sorbitol, glycérine, érythritol, lithium magnesium sodium silicate, hydroxyapatite, nitrate de potassium, phénoxyéthanol, gomme xanthane, tétrasodium pyrophosphate, acide tartrique, huile de mentha spicata, saccharine de sodium.

INDICATIONS D'UTILISATION

- Après le blanchiment des dents au bureau et/ou à la maison
- Après un nettoyage professionnel de la dentition
- Prévention et contrôle de la sensibilité

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser Cavex Bite&White ExSense en cas d'allergie à la menthe ou à un des ingrédients.

PROCÉDURE D'UTILISATION

1. Préparer et nettoyer les dents en les brossant et avec du fil dentaire.
2. Application:

Sans gouttière: Lavez-vous les mains soigneusement avec de l'eau et du savon. Appliquez une petite quantité de Cavex Bite&White ExSense sur un doigt propre. Répartissez le gel doucement sur toutes les surfaces des dents du haut et du bas. Laissez agir le gel pendant 5 à 10minutes. Crachez tout excédent

de gel et ne vous rincez pas la bouche à l'eau.

Avec gouttière: Appliquez une fine ligne de Cavex Bite/White ExSense tout le long de la gouttière. Insérez la gouttière dans la bouche et tournez-la doucement de gauche à droite pour bien répartir le gel sur les dents. Mordez ensuite lentement sur la gouttière et laissez agir le gel pendant 5 à 10minutes. Retirez la gouttière, crachez tout excédent de gel et ne vous rincez pas la bouche à l'eau. Rincez la gouttière à l'eau froide.

3. Après utilisation, remettez directement le bouchon en place sur le tube.
4. Pour des résultats optimaux: s'abstenir de manger et boire pendant au moins 30minutes après le traitement.
5. Utilisez le produit tous les jours pendant 10jours, ou suivez les instructions de votre conseiller dentaire.

AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS

En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment à l'eau et obtenir une assistance médicale. Ne pas utiliser le produit au-delà de la date limite d'utilisation.

CONSEILS DE CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec (à l'abri du gel) et à l'abri des rayons directs du soleil.



Fabriqué par Cavex Holland BV

Les conseils que nous vous donnons verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique et de nos essais n'engagent pas notre responsabilité - même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle - et ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier par des essais pratiques si nos produits conviennent aux procédés et applications que vous envisagez. L'utilisation, la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis échappent à notre contrôle et relèvent, dès lors, exclusivement de votre responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en oeuvre par vos soins. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.

**CAVEX BITE&WHITE ABC MASTER KIT:
3-step Home Whitening System****STEP A = ACTIVATION:
CAVEX BITE&WHITE STAINLESS****DESCRIPTION**

Teeth Whitening Activator & Stain Removal Paste. Removes surface stains and plaque from teeth.

Enhances whitening treatments by optimizing the pH in the mouth.

- Mildly abrasive to enamel / dentin
- High cleaning and polishing values.
- Increases mouth pH as pre-treatment for teeth whitening.
- Not intended for regular use.

PACKAGING

Tube 35 ml – 50 g

CAVEX BITE&WHITE STAINLESS INGREDIENTS

Water, sorbitol, hydrated silica, glycerin, Erythritol, lithium magnesium sodium silicate, poloxamer 124, sodium hexametaphosphate, cellulose gum, xantan gum, phenoxyethanol, Cl 42090, mentha arvensis extract, l-limonene, sodium saccharin.

WARNINGS

Keep out of reach of children.
Limited shelf life after opening.

**STORAGE ADVICE**

Do not store at temperatures higher than 25 °C (77 °F). Store in a dark, dry place (frost free). Avoid exposure to direct sunlight. Do not use the material after the expiry date.

STEP B = BRIGHTEN: CAVEX BITE&WHITE**DESCRIPTION**

Hydrogen peroxide is the bleaching agent in Cavex Bite&White. It is added as carbamide peroxide in order to obtain a sufficiently stable product. The carbamide peroxide breaks down rapidly into oxygen radicals and water. During the whitening process the free radicals attack the double carbon bonds that are the source of most colours (stains) in the tooth.

PACKAGING

3 Cavex Bite&White 3 ml syringes

CAVEX BITE&WHITE ACTIVE INGREDIENTS

- 16 % Carbamide Peroxide – equivalent to 6 % hydrogen peroxide
- 0.1 % Sodium fluoride desensitizer

COMPOSITION

Glycerin, water, urea peroxide, polyacrylic acid, potassium hydroxide, potassium nitrate, sodium fluoride, EDTA, mentha arvensis extract.

WARNINGS

- Contains hydrogen peroxide.
 - Contains sodium fluoride.
 - Avoid contact with eyes. Rinse immediately if product comes into contact with them.
 - Keep out of reach of children.
 - Avoid exposure of known sensitive teeth.
 - Do not eat, drink or smoke while wearing the tray.
 - Harmful when swallowed.
- Hydrogen peroxide < 6%; is not to be used for persons under 18 years of age, to be only sold to dental practitioners. For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use.

**INDICATIONS FOR USE**

Cavex Bite&White is a tooth whitening gel for use in lightening the colour of natural teeth. Cavex Bite&White should only be dispensed by or on the order of a dental professional. Before any whitening procedure, a consultation with a qualified dentist is recommended to ensure no underlying oral or health issues.

CONTRA-INDICATIONS

It is recommended to consult a doctor, in case of:

- Pregnant and lactating women
- Those currently treated for a serious illness
- Children under the age of 18 years

CLINICAL PROCEDURE

- Record starting shade, review current dental health and make sure patient has realistic expectations about final results.
- Provisional or temporary restorations may discolour during the whitening process while composite or polycarbonate materials will remain unaffected. Therefore, patients with composite restorations must be advised that existing composites may require replacement, since only natural teeth will whiten.
- For patients requiring aesthetic or adhesive restorations, wait 2 weeks after the last whitening treatment to allow for colour stabilization. All restorations should be intact or well-sealed with adequate temporary materials.
- The use of a sensitivity relief toothpaste starting 2 weeks prior to the treatment procedure until 2 weeks after the treatment should be advised.
- Patients should always be warned of tooth sensitivity or gingival irritation during the treatment. The gingival areas that come in contact could turn red or white but will return to its normal colour after several days.
- To avoid soft tissue irritation, advise the patient to avoid overfilling trays, to wipe away any excess gel from the gum line and to rinse the mouth thoroughly after the treatment.
- After each treatment, make sure patient replaces the syringe cap.
- The patient should not eat, drink or smoke

tobacco for at least 30 minutes after each treatment.

- Instruct the patient to stop the treatment and contact you immediately if any problem develops.
- The final shade will be achieved about 2 weeks after the start of the treatment. A follow-up appointment should be arranged after the treatment.

FIRST AID INSTRUCTIONS

- If a large quantity (over 25% of the gel in the syringe) is swallowed, immediately drink water, do not induce vomiting and contact a doctor.
- If gel gets into eyes, hold eyelids apart and flush the eye continuously with running water for at least 15 minutes and contact a doctor.
- If clothing, skin or hair contact occurs, remove contaminated clothing and flush skin or hair with running water.

POTENTIAL ADVERSE EFFECTS

Adverse effects that may be associated with the use of Cavex Bite&White include, but are not limited to:

Sensitivity

Some patients may experience increased tooth sensitivity to cold during the treatment, while others may have non-specific sensitivity in their teeth, gums, tongue, lips or throat. In general symptoms should disappear within several days after the treatment is stopped. The treatment can be proceeded with shorter, less frequent applications until the desired whitening effect has been achieved. If the discomfort remains, discontinue the treatment.

Gingival Irritation

Trays that extend onto the gingiva may cause mild to severe soft tissue irritation. If the trays fit properly, check if the patient applies the proper quantity in the proper way. The patient may need to reduce the amount of gel in their trays.

STORAGE ADVICE

- Store refrigerated (<8°C)
- Store in a dark, dry place
- Avoid exposure to direct sunlight
- Do not use the material after the expiry date

**DISPOSAL**

Dispose of device in accordance with local waste regulations.

**STEP C = CONDITION:
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE****DESCRIPTION**

Cavex Bite&White ExSense is a water-based gel with mint aroma that contains hydroxyapatite and potassium nitrate. Cavex Bite&White ExSense

controls sensitivity and enhances whiteness of the teeth by hydroxyapatite remineralisation.

PACKAGING

Tube 42 ml – 50 g (sufficient for approximately 20 treatments)

CAVEX BITE&WHITE EXSENSE KEY INGREDIENTS:

Hydroxyapatite 2%

COMPOSITION

Water, sorbitol, glycerin, erythritol, lithium magnesium sodium silicate, hydroxyapatite, Potassium nitrate, phenoxyethanol, xanthan gum, tetrasodium pyrophosphate, tartaric acid, mentha spicata oil, sodium saccharin.

INDICATIONS FOR USE

- After in-office and/or at-home tooth whitening
- After professional tooth cleaning
- Prevention and control of sensitivity

CONTRA-INDICATIONS

Do not use Cavex Bite&White ExSense in cases of allergies to mint aroma or any of the ingredients.

HANDLING PROCEDURE

1. Prepare and clean the teeth using tooth brush and floss.
2. Application:

Without Tray: Wash hands thoroughly with soap and water. Dispense a small amount of Cavex Bite&White ExSense onto a clean finger. Gently apply gel on all surfaces of the upper and lower teeth. Allow gel to remain on tooth for 10 minutes. Spit out any excess gel and do not rinse mouth with water.

With Tray: Dispense a small ribbon of Cavex Bite&White ExSense across the entire tray. Insert tray and gently rotate tray left and right to assure gel is distributed across teeth. Gently bite down on the tray and leave gel in place for 10 minutes. Remove tray, spit out any excess gel and do not rinse mouth with water. Rinse tray with cold water.

3. Always close the tube with the cap immediately after use.
4. For best results, do not drink or eat for at least 30 minutes after the application.
5. Use product every day for 10 days or as instructed by your dental professional.

WARNINGS & FIRST AID INSTRUCTIONS

In case of contact with the eyes, flush thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Do not use the material after the expiry date.

STORAGE ADVICE

Store in a cool place, dry place (frost-free) and protected from direct sunlight.



CAVEX BITE&WHITE ABC-MASTERKIT: Sistema di sbiancamento dentale domiciliare in 3 fasi

FASE A = ATTIVAZIONE: CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

DESCRIZIONE

Attivatore per lo sbiancante e pasta per la rimozione delle macchie. Rimuove le macchie superficiali e la placca dai denti. Potenzia i trattamenti di sbiancamento, ottimizzando il pH della bocca.

- Leggermente abrasivo per lo smalto/la dentina.
- Grande pulizia e lucidatura.
- Aumenta il pH nella bocca come pretrattamento per lo sbiancamento.
- Non adatto per un uso frequente.

CONFEZIONE

Tubetto da 35ml - 50g

INGREDIENTI

Acqua, sorbitolo, silice idrata, glicerina, Eritritolo, silicato di litio e magnesio, polossamero 124, esametatofosfato di sodio, gomma di cellulosa, gomma di xantano, fenossietanolo, CI 42090, estratto di mentha arvensis, l-limonene, saccarina di sodio.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durata di conservazione limitata dopo l'apertura.



CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE

Non conservare a temperature superiori ai 25 °C (77 °F). Conservare in un luogo buio e asciutto (al riparo dal gelo). Evitare l'esposizione alla luce solare diretta. Non utilizzare il materiale dopo la data di scadenza.

FASE B = SBIANCAMENTO: CAVEX BITE&WHITE

DESCRIZIONE

L'acqua ossigenata contenuta in Cavex Bite&White agisce come agente sbiancante. Viene aggiunta come perossido di carbamide, per ottenere un prodotto sufficientemente stabile. Il perossido di carbamide si scioglie rapidamente nei radicali dell'ossigeno e nell'acqua. Durante il processo di sbiancamento, i radicali liberi attaccano i legami doppi di carbonio, che, solitamente, sono la causa delle macchie dei denti.

CONFEZIONE

3 siringhe di Cavex Bite&White da 3 ml

PRINCIPI ATTIVI

- Perossido di carbamide al 16% - equivalente a perossido di idrogeno al 6%.

- Desensibilizzante al fluoruro di sodio allo 0,1%

COMPOSIZIONE

Glicerina, acqua, perossido di urea, acido poliacrilico, idrossido di potassio, nitrato di potassio, fluoruro di sodio, EDTA, estratto di mentha arvensis.

AVVERTENZE

- Contiene perossido di idrogeno.
- Contiene fluoruro di sodio.
- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare l'uso su denti sensibili.
- Non mangiare, bere o fumare mentre si indossa il portaimpronta.
- Nocivo se ingerito.

Perossido di idrogeno < 6%; Da non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni. Vendita destinata esclusivamente ai dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è riservata ai dentisti o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. In seguito il prodotto deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo.

INDICAZIONI PER L'USO

Cavex Bite&White è un gel per sbiancare il colore dei denti naturali. Cavex Bite&White dovrebbe essere fornito unicamente su richiesta di un dentista. Per escludere eventuali problemi di salute generale o del cavo orale, si consiglia di richiedere un consulto presso un dentista qualificato prima della sbiancamento.

CONTROINDICAZIONI

Si consiglia di rivolgersi a un medico nei seguenti casi:

- donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento;
- persone sottoposte a terapia medica per una malattia grave;
- minori di 18 anni.

PROCEDURA CLINICA

- Registrare la tonalità iniziale, verificare l'attuale stato di salute dei denti e assicurarsi che il paziente nutra aspettative realistiche sui risultati finali.
- I restauri provvisori o temporanei potrebbero scolorire durante il processo di sbiancamento, mentre i materiali in composito o policarbonato non ne risentono. Pertanto, i pazienti con restauri in composito devono essere informati che potrebbe essere necessario sostituire i compositi esistenti, poiché solo i denti naturali si possono sbiancare.
- Per i pazienti che necessitano di restauri estetici o adesivi, attendere 2 settimane dall'ultimo trattamento sbiancante per consentire la stabilizzazione del colore. Tutti i restauri devono essere intatti o ben sigillati con materiali provvisori adeguati.
- Si consiglia di utilizzare un dentifricio per denti



sensibili da 2 settimane prima del trattamento fino a 2 settimane dopo di esso.

- Avvertire sempre i pazienti della sensibilità dentale o dell'irritazione gengivale durante il trattamento. Le zone gengivali a contatto potrebbero diventare rosse o bianche, ma torneranno al loro colore normale dopo alcuni giorni.
- Per evitare irritazioni dei tessuti molli, consigliare al paziente di non riempire troppo i portaimpronta, di rimuovere l'eventuale gel in eccesso dal bordo gengivale e di sciacquare accuratamente la bocca dopo il trattamento.
- Dopo ogni trattamento, assicurarsi che il paziente rimetta il cappuccio alla siringa.
- Il paziente non deve mangiare, bere o fumare per almeno 30 minuti dopo ogni trattamento.
- Informare il paziente che deve interrompere il trattamento e contattarvi immediatamente in caso di problemi.
- La tonalità finale si otterrà circa 2 settimane dopo l'inizio del trattamento. Dopo il trattamento è opportuno fissare un appuntamento di controllo.

ISTRUZIONI DI PRONTO SOCCORSO

- In caso di ingestione di una grande quantità di gel (più del 25% del gel della siringa): bere immediatamente acqua, non indurre vomito e consultare un medico.
- Se il gel viene a contatto con gli occhi: aprire le palpebre, sciacquare l'occhio per almeno 15 minuti consecutivi e consultare un medico.
- In caso di contatto con abiti, cute o capelli, togliere gli abiti contaminati e sciacquare la pelle e i capelli con molta acqua.

POSSIBILI REAZIONI AVVERSE

Qui di seguito illustriamo alcune delle reazioni avverse che possono dipendere dall'uso di Cavex Bite&White.

Sensibilità

Durante il trattamento alcuni pazienti possono manifestare una maggiore sensibilità dei denti al freddo, altri possono manifestare una sensibilità non specifica dei denti, delle gengive, della lingua, delle labbra o della gola. In generale, i sintomi dovrebbero scomparire entro pochi giorni dopo la fine del trattamento. Il trattamento può continuare con applicazioni più brevi e meno frequenti fino a ottenere l'effetto desiderato. Se il fastidio persiste, interrompere il trattamento.

Irritazione delle gengive

Le mascherine che arrivano fino alla gengiva possono provocare da lieve a severa irritazione del tessuto molle. Se le mascherine si adattano con precisione, controllare se il paziente applica il gel nella giusta quantità e in modo corretto. Forse il paziente dovrebbe ridurre la quantità di gel nella mascherina.

CONSERVAZIONE

- Conservare in un luogo fresco (<8 °C), buio e asciutto.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza.

CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE

- Conservare in frigorifero (< 8°C).
- Conservare in luogo buio e asciutto.
- Evitare l'esposizione alla luce solare diretta
- Non utilizzare il materiale dopo la data di scadenza.



SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto conformemente alle regolamentazioni locali sui rifiuti.

FASE C = CONDIZIONAMENTO: CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

DESCRIZIONE

Cavex Bite&White ExSense è un gel a base d'acqua con sapore di menta, che contiene idrossiapatite e nitrato di potassio. Cavex Bite&White ExSense riduce la sensibilità e rende i denti più bianchi grazie alla ri-mineralizzazione di idrossiapatite.

CONFEZIONE

Tubetto da 42 ml - 50 grammi (sufficiente per circa 20 trattamenti)

COMPONENTI PRINCIPALI DI CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:

Idrossiapatite 2%

COMPOSIZIONE:

Acqua, sorbitolo, glicerina, eritritolo, silicato di sodio e magnesio di litio, idrossiapatite, nitrato di potassio, fenossietanolo, gomma di xantano, pirofosfato tetrasodico, acido tartarico, olio di menta spicata, saccarina di sodio.

INDICAZIONI PER L'USO

- Dopo lo sbiancamento dei denti nell'ambulatorio dentistico e/o a domicilio.
- Dopo la pulizia professionale dei denti
- Prevenire e ridurre la sensibilità

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare Cavex Bite&White ExSense in caso di allergie alla menta o a uno dei componenti.

PROCEDURA PER L'USO

1. Preparare e pulire i denti con spazzolino e filo interdentale.
2. Applicazione:

Senza mascherina: Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Applicare una piccola quantità di Cavex Bite&White ExSense su un dito pulito. Stendere il gel delicatamente su tutte le superfici dei denti superiori e inferiori. Lasciare

agire il gel per 10 minuti. Sputare l'eventuale gel in eccesso e non sciacquare la bocca con acqua.

Con mascherina: Applicare una piccola striscia di Cavex Bite&White ExSense lungo tutta la mascherina. Posizionare la mascherina e ruotarla lentamente verso sinistra e destra in modo che il gel sia ben distribuito sopra i denti. Mordere delicatamente la mascherina e lasciare agire il gel per 10 minuti.

Togliere la mascherina, sputare l'eventuale gel in eccesso e non sciacquare la bocca con acqua. Sciacquare la mascherina con acqua fredda.

3. Chiudere sempre il tubo con il tappo immediatamente dopo l'uso.
4. Per i migliori risultati, non mangiare né bere per almeno 30 minuti dopo il trattamento.
5. Utilizzare il prodotto ogni giorno per 10 giorni, o come indicato dal vostro dentista.

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI PRIMO SOCCORSO

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto (non congelare), al riparo dalla luce diretta del sole.



Prodotto da Cavex Holland BV

La nostra consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto o in maniera dimostrativa è rilasciata in buona fede e senza alcuna garanzia anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi. Questa non esime il cliente da eseguire controlli dei prodotti forniti allo scopo di stimarne l'idoneità ai procedimenti ed ai fini previsti. L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso tuttavia che si esiga una responsabilità, questa sarà limitata, per tutti i danni, al valore dei prodotti da noi forniti ed impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo la qualità dei nostri prodotti in conformità alle nostre condizioni generali di vendita e di consegna.

CAVEX BITE&WHITE ABC MASTER KIT:
Sistema de blanqueamiento en casa en 3 pasos

PASO A = ACTIVACIÓN:
CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

DESCRIPCIÓN

Activador de blanqueamiento dental y pasta para la eliminación de manchas.
Elimina manchas superficiales y placa de los dientes. Mejora los tratamientos de blanqueamiento optimizando el pH en la boca.
- Ligeramente abrasivo para el esmalte / dentina.
- Altos índices de limpieza y pulido.
- Aumenta el valor de pH como pretratamiento para el blanqueamiento dental.
- No es apto para uso frecuente.

PRESENTACIÓN

Tubo de 35 ml - 50 g

INGREDIENTES

Agua, sorbitol, sílice hidratada, glicerina, Eritritol, silicato sódico magnésico de litio, poloxámero 124, hexametáfosfato sódico, goma de celulosa, goma xantana, fenoxietanol, CI 42090, extracto de Mentha arvensis, l-limoneno, sacarina sódica.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
Caducidad limitada una vez abierto.



CONSEJOS DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperaturas superiores a 25 °C (77 °F). Conservar en un lugar oscuro y seco (sin heladas). Evitar la exposición directa al sol. No utilizar el material una vez transcurrida la fecha de caducidad.

PASO B = BLANQUEAMIENTO:
CAVEX BITE&WHITE

DESCRIPCIÓN

Después de hidrógeno es el agente blanqueador en Cavex Bite&White. Es añadido como un peróxido de carbamida para asegurar suficiente estabilidad del producto. El peróxido de carbamida se disuelve rápidamente en radicales de oxígeno y agua. Durante el proceso de blanqueamiento, los radicales libres atacan los compuestos de carbono de enlace doble que generalmente forman el origen de la decoloración dental (manchas).

PRESENTACIÓN

3 jeringas de 3 mL Cavex Bite&White

INGREDIENTES ACTIVOS

- 16 % de peróxido de carbamida - equivalente a 6 % de peróxido de oxígeno
- 0,1 % fluoruro de sodio desensibilizante

COMPOSICIÓN

Glicerina, agua, peróxido de urea, ácido poliacrílico, hidróxido de potasio, nitrato potásico,

fluoruro sódico, EDTA, extracto de Mentha arvensis.

ADVERTENCIAS

- Contiene peróxido de hidrógeno.
- Contiene fluoruro sódico.
- Evitar el contacto con los ojos. Enjuagar inmediatamente si el producto entra en contacto con ellos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar la exposición de dientes sensible conocidos.
- No comer, beber ni fumar mientras se lleve la cubeta puesta.
- Nocivo por ingestión.
Peróxido de hidrógeno < 6%: No utilizar en menores de 18 años. Venta exclusiva a odontólogos. En cada ciclo de utilización, el primer uso estará restringido a odontólogos o tendrá lugar bajo supervisión directa, siempre que se garantice un grado de seguridad equivalente. Posteriormente se suministrará al consumidor para completar el ciclo de utilización.



INDICACIONES DE USO

Cavex Bite&White es un gel de blanqueamiento dental que aclara el color de dientes naturales. Cavex Bite&White solo puede ser dispensado por un profesional dental. Para evitar problemas de la boca o de la salud, se recomienda una consulta inicial con un dentista cualificado antes de realizar cualquier procedimiento de blanqueamiento.

CONTRAINDICACIONES

Se recomienda consultar a un médico en caso de:
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia
- Personas que están recibiendo tratamiento para una enfermedad grave
- Niños menores de 18 años

PROCEDIMIENTO CLÍNICO

- Registre el color inicial, revise la salud dental actual y asegúrese de que el paciente tiene expectativas realistas sobre los resultados finales.
- Las restauraciones provisionales o temporales pueden decolorarse durante el proceso de blanqueamiento, mientras que los materiales de composite o policarbonato no se verán afectados. Por lo tanto, debe advertir a los pacientes con restauraciones de composite que puede ser necesario sustituir los composites existentes, ya que solo se blanquearán los dientes naturales.
- Para los pacientes que necesitan restauraciones estéticas o adhesivas, espere 2 semanas después del último tratamiento de blanqueamiento para permitir la estabilización del color. Todas las restauraciones deben estar intactas o correctamente selladas con los materiales provisionales adecuados.
- Debe aconsejar el uso de una pasta dentífrica que alivie la sensibilidad desde 2 semanas antes del

tratamiento hasta 2 semanas después del mismo.

- Los pacientes siempre deben ser informados sobre la posibilidad de sensibilidad dental o irritación gingival durante el tratamiento. Las zonas gingivales que entran en contacto pueden volverse rojas o blancas, pero al cabo de unos días recuperarán su color normal.
- Para evitar la irritación de los tejidos blandos, aconseje al paciente de no llenar excesivamente las cubetas, limpiar cualquier exceso de gel de la línea de las encías y enjuagar bien la boca después del tratamiento.
- Indique al paciente que después de cada tratamiento debe volver a colocar el tapón en la jeringa.
- El paciente no debe comer, beber ni fumar tabaco durante al menos 30 minutos después de cada tratamiento.
- Indique al paciente que interrumpa el tratamiento y se ponga inmediatamente en contacto con usted si surge algún problema.
- El tono final se alcanzará unas 2 semanas después del inicio del tratamiento. Después del tratamiento debe concertarse una consulta de seguimiento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Si ingiere una gran cantidad del producto (más del 25% del gel en la jeringa), debe beber inmediatamente agua, no induzca el vómito y consulte a un médico.
- Si el gel entra en contacto con los ojos, abra los párpados, enjuague el ojo continuamente con agua corriente durante al menos 15 minutos y consulte a un médico.
- Si el producto entra en contacto con la ropa, la piel y el pelo, quítese la ropa contaminada y enjuague la piel y el pelo con agua corriente.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Los efectos secundarios que pueden producirse durante el uso de Cavex Bite&White incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:

Sensibilidad

Algunos pacientes pueden experimentar mayor sensibilidad o frialdad en los dientes, mientras que otros pueden experimentar una sensibilidad no específica en los dientes, encías, lengua, labios o garganta. En general, los síntomas suelen desaparecer unos días después del fin del tratamiento. El tratamiento puede continuarse con aplicaciones más cortas y menos frecuentes hasta que se logre el efecto de blanqueamiento deseado. Si el malestar persiste, suspenda el tratamiento.

Irritación gingival

Las cubetas que se extienden hasta las encías pueden causar una irritación moderada a grave del tejido blando. Si las cubetas se ajustan correctamente, compruebe si el paciente aplica la cantidad adecuada en la forma adecuada. Puede ser que el paciente tenga que reducir la cantidad de gel en las cubetas.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar refrigerado (<8 °C) en un lugar oscuro y seco.
- No utilizar el material una vez transcurrida su fecha de caducidad.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN

- Conservar refrigerado (<8 °C).
- Conservar en un lugar oscuro y seco.
- Evitar la exposición directa al sol.
- No utilizar el material una vez transcurrida la fecha de caducidad.



ELIMINACIÓN

Elimine el producto de conformidad con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

PASO C = ACONDICIONAMIENTO:
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

DESCRIPCIÓN

Cavex Bite&White ExSense es un gel a base de agua con aroma de menta que contiene hidroxipatita y nitrato de potasio. Cavex Bite&White ExSense controla la sensibilidad y mejora la blancura de los dientes por remineralización de hidroxipatita.

PRESENTACIÓN

Tubo de 42 ml - 50 gramos (suficiente para aproximadamente 20 tratamientos)

INGREDIENTES CLAVE DE CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:
Hidroxipatita 2%

COMPOSICIÓN

Agua, sorbitol, glicerina, eritritol, silicato sódico magnésico de litio, hidroxipatita, nitrato potásico, fenoxietanol, goma xantana, pirofosfato tetrasódico, ácido tartárico, aceite de Mentha spicata, sacarina sódica.

INDICACIONES DE USO

- Después del blanqueamiento dental en el consultorio y/o en casa
- Después de una limpieza dental profesional
- Prevención y control de la sensibilidad

CONTRAINDICACIONES

No use Cavex Bite&White ExSense en caso de alergia a aroma de menta o a cualquiera de los excipientes.

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Prepare y limpie los dientes con cepillo e hilo dental.
2. Aplicación:

Sin cubeta: Lávese las manos a fondo con agua y jabón. Ponga un poco de Cavex Bite&White ExSense en un dedo limpio. Aplique el gel

suavemente sobre todas las superficies en los dientes superiores e inferiores. Deje que el gel permanezca en los dientes durante 10 minutos. Escupa todo el gel excesivo y no enjuague la boca con agua.

Con cubeta: Administre un banda estrecha de Cavex Bite&White ExSense sobre toda la cubeta. Coloque la cubeta en la boca y gírela suavemente hacia la izquierda y derecha para asegurar que el gel se distribuya sobre los dientes. Muerda suavemente en la cubeta y deje el gel en la boca durante 10 minutos. Saque la cubeta, escupa todo el gel excesivo y no enjuague la boca con agua. Enjuague la cubeta con agua fría.

3. Inmediatamente después del uso, debe colocarse el tapón y cerrar el tubo.
4. Para el mejor resultado, el paciente no debe comer ni beber al menos 30 minutos después de la aplicación.
5. Use el producto diariamente durante 10 días o tal como le haya indicado el profesional dental.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente con agua y acúdate a un médico. No utilizar el material una vez transcurrida su fecha de caducidad.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco (libre de heladas) y protegido de la luz directa del sol.



Fabricado por Cavex Holland BV

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como iniciación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualquier daño y perjuicio, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

**CAVEX BITE&WHITE ABC MASTER KIT:
Sustav za izbjeljivanje kod kuće u 3 koraka**

**KORAK A = AKTIVIRANJE:
CAVEX BITE&WHITE STAINLESS**

OPIS

Aktivator za izbjeljivanje zuba i pasta za uklanjanje mrlja. Uklanja površinske mrlje i plak sa zuba. Pajačava postupak izbjeljivanja optimiziranjem pH vrijednosti u ustima.
- Blago abrazivno za caklinu/dentin
- Visoke vrijednosti čišćenja i poliranja
- Povećava pH vrijednost u ustima kao predtretman za izbjeljivanje
- Nije namijenjeno za redovitu uporabu

AMBALAŽA

Tuba 35 ml – 50 gr.

SASTOJCI

Voda, sorbitol, hidratizirani silicij, glicerol, Eritritol, litij-magnezij-natrij silikat, poloksamer 124, natrij heksametafosfat, celulozna guma, ksantan guma, fenoksietanol, Cl 42090, ekstrakt poljske metvice (mentha arvensis), l-limonen, natrij saharin.

UPOZORENJA

Čuvati izvan dohvata djece.
Ograničen rok trajanja nakon otvaranja.



SAVJET O SKLADIŠTENJU

Nemojte skladištiti na temperaturama višim od 25 °C (77 °F). Čuvati na tamnom i suhom mjestu (bez mraza). Izbjegavajte izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ne koristiti materijal nakon isteka roka valjanosti.

KORAK B = POSVIJETLI: CAVEX BITE&WHITE

OPIS

U Cavex Bite&White vodikov peroksid služi kao izbjeljivač. Dodan je u obliku karbamid peroksida da bi se zadobio dovoljno stabilan proizvod. Karbamid peroksid se brzo razgrađuje na radikale kisika i vodu. Tijekom postupka izbjeljivanja slobodni radikali napadaju spojeve ugljika sa dvostrukim vezama; oni su većinom izvor diskoloracije zubi.

AMBALAŽA

3 Cavex Bite&White 3 ml šprica

AKTIVNI SASTOJCI

- 16 % karbamid peroksida – ekvivalent 6 % vodikovog peroksida
- 0,1 % natrijev fluorid desenzibilizator

SASTAV

Glicerol, voda, urea peroksid, poliakrilna kiselina, kalijev hidroksid, kalijev nitrat, natrijev fluorid, EDTA, ekstrakt poljske metvice (mentha arvensis).

UPOZORENJA

- Sadržava vodikov peroksid.
- Sadržava natrijev fluorid.
- Izbjegavati dodir s očima. U slučaju dodira s očima, odmah isprati.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Nemojte koristiti kod preosjetljivih zubi.
- Nemojte jesti, piti ili pušiti dok nosite kalup.
- Štetno ako se proguta.
Vodikov peroksid < 6%. Ne koristiti na osobama mlađim od 18 godina. U prodaji samo za stomatologe. Za svaki ciklus uporabe, prva uporaba dopuštena samo stomatolozima ili pod njihovim izravnim nadzorom, ako je osigurana jednaka razina sigurnosti. Nakon toga omogućava se potrošaču da dovrši ciklus uporabe.



INDIKACIJE ZA UPORABU

Cavex Bite&White je gel za izbjeljivanje zuba koji se koristi za posvjetljivanje boje prirodnih zuba. Cavex Bite&White se smije samo isporučiti od ili po preporuci stomatologa. Prije bilo kojeg postupka izbjeljivanja preporučuje se konzultacija sa kvalificiranim stomatologom da bi se isključili oralni ili zdravstveni problemi.

KONTRAINDIKACIJE

Preporučljivo je posavjetovati se sa liječnikom kod:
- Trudnica ili dojilja
- Osoba koje se trenutno liječe od teške bolesti
- Djece mlađe od 18 godina

KLINIČKI POSTUPAK

- Zabilježite početnu nijansu boje, procijenite trenutno zdravlje zubi i provjerite ima li pacijent realna očekivanja o konačnim rezultatima.
- Provizorne ili privremene proteze ili mostovi mogu promijeniti boju tijekom procesa izbjeljivanja, dok kompozitni ili polikarbonatni materijali ostaju nepromijenjeni. Stoga se pacijenti s kompozitnim protezama ili mostovima moraju obavijestiti da postojeći kompoziti mogu zahtijevati zamjenu, jer će samo prirodni zubi izbijeliti.
- Za pacijente kojima su potrebne estetske ili adhezivne proteze, pričekaite 2 tjedna nakon posljednjeg tretmana izbjeljivanja kako bi se omogućila stabilizacija boje. Sve proteze trebaju biti netaknute ili dobro zaštićene odgovarajućim privremenim materijalima.
- Treba savjetovati korištenje zubne paste za ublažavanje osjetljivosti počevši od 2 tjedna prije tretmana do 2 tjedna nakon tretmana.
- Pacijente uvijek treba upozoriti na osjetljivost zubi ili iritaciju desni tijekom tretmana. Područja desni koja dolaze u kontakt mogu postati crvena ili bijela, ali će vratiti svoju normalnu boju nakon nekoliko dana.
- Kako biste izbjegli iritaciju mekog tkiva, savjetujte pacijentu da izbjegava prepunjene kalupe, da obriše sav višak gela s ruba desni i da temeljito isperu usta nakon tretmana.
- Nakon svakog tretmana, pobrinite se da pacijent vrati kapicu na štrcaljku.
- Pacijent ne smije jesti, piti ili pušiti najmanje 30

minuta nakon svakog tretmana.

- Uputite pacijenta da prekine tretman i odmah vas kontaktira ako se pojavi bilo kakav problem.
- Konačna nijansa bit će postignuta oko 2 tjedna nakon početka tretmana. Nakon tretmana potrebno je dogovoriti kontrolni pregled.

UPUTE ZA PRVU POMOĆ

- Ako se proguta velika količina gela (više od 25% gela u šprici) odmah pijte vodu, ne izazivajte povraćanje i obratite se liječniku.
- U slučaju da gel uđe u oči, držite kapke otvorene i neprekidno ispirajte oko tekućom vodom barem 15 minuta i obratite se liječniku.
- U slučaju dodira sa odjećom, kožom ili kosom, skinite kontaminiranu odjeću i ispirajte kožu ili kosu tekućom vodom.

MOGUĆI ŠTETNI UČINCI

Štetni učinci koji mogu biti povezani sa upotrebom Cavex Bite&White uključuju, ali nisu ograničeni na:

Osjetljivost zuba

Neki pacijenti mogu tijekom tretmana doživjeti povećanu osjetljivost zuba na hladnoću, dok drugi mogu imati nespecifičnu osjetljivost u zubima, desnama, jeziku, usnama ili grlu. Uglavnom bi simptomi trebali nestati u roku od nekoliko dana nakon prekida tretmana. Tretman se može nastaviti s kraćim, manje čestim primjenama dok željeni učinak izbjeljivanja nije postignut. Ako nelagodna i dalje ostaje, prekinite tretman.

Iritacija desni

Udlage koje se protežu do desni mogu izazvati blagu do tešku iritaciju mekog tkiva. Ako udlage dobro pristaju, provjerite dali pacijent primjenjuje pravilnu količinu gela na pravilan način. Možda pacijent mora smanjiti količinu gela u svojim udlagama.

SAVJET O SKLADIŠTENJU

- Čuvati u hladnjaku (<8°C),
- Čuvati na tamnom i suhom mjestu.
- Izbjegavajte izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Materijal ne koristiti nakon isteka roka valjanosti.



ODLAGANJE

Odložite materijal u skladu sa lokalnim zakonom o upravljanju otpadom.

**KORAK C = KONDICIONIRANJE:
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE**

OPIS

Cavex Bite&White ExSense je gel na vodenoj bazi sa aromom mente i sadrži hidroksiapatit i kalijev nitrat. Cavex Bite&White ExSense smanjuje osjetljivost i pojačava bjelinu zuba zahvaljujući remineralizaciji hidroksiapatitom.

AMBALAŽA

Tuba 42 ml – 50 grama (dovoljno za cca 20 tretmana)

CAVEX BITE&WHITE EXSENSE GLAVNI SASTOJCI
Hidroksiapatit 2%

SASTAV

Voda, sorbitol, glicerol, eritritol, litij-magnezij-natrij silikat, hidroksiapatit, kalijev nitrat, fenoksietanol, ksantan guma, tetranatrijev pirofosfat, vinska kiselina, ulje metvice (mentha spicata), natrijev saharin.

INDIKACIJE ZA UPORABU

- Nakon izbjeljivanja zubi u stomatološkoj ordinaciji i/ili kod kuće
- Nakon profesionalnog čišćenja zubi
- Sprječavanje i kontrola osjetljivosti

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristite Cavex Bite&White ExSense kod alergije na mentu ili bilo koji od ostalih sastojaka.

PROCEDURA UPORABE

1. Četkicom za zube i zubnim koncem pripremiti i očistiti zube.
2. Primjena:

Bez udlage: Temeljito operite ruke vodom i sapunom. Nanesite malu količinu Cavex Bite&White ExSense-a na čist prst. Lagano nanesite gel na sve površine gornjih i donjih zuba. Pustite da gel djeluje 10 minuta na zubima. Ispjunite eventualni višak gela i isperite usta vodom.

Sa udlagom: Nanesite Cavex Bite&White ExSense po cijeloj udlagi. Unesite udlagu i lagano ju okrećite lijevo-desno da se gel dobro raspodijeli po zubima. Zatim lagano zagrizite udlagu i pustite da gel djeluje 10 minuta. Izvadite udlagu, ispljunite eventualni višak gela i isperite usta vodom. Udlage isperite hladnom vodom.

3. Uvijek zatvorite tubu čepom odmah nakon uporabe.
4. Za najbolji rezultat: nemojte jesti ili piti najmanje 30 minuta nakon primjene.
5. Koristite proizvod svakodnevno tokom 10 dana ili slijedite upute vašeg stomatologa.

UPOZORENJA I UPUTE ZA PRVU POMOĆ

U slučaju dodira sa očima: temeljito ispirati sa puno vode i potražiti liječničku pomoć. Ne koristite proizvod nakon isteka roka trajanja.

SAVJET ZA ČUVANJE

Čuvajte na hladnom, suhom mjestu zaštićenom od mraza i direktnog sunca.



Proizvođač: Cavex Holland BV

Naš tehnički savjet usmeni, pismeni ili putem pokusa dajemo u dobroj vjeri, ali bez jamstva; a to se odnosi i na slučajeve koji uključuju vlasnička prava neke treće strane. To vas ne oslobađa obveze testiranja proizvoda koje vam isporučujemo obzirom na njihovu prikladnost za područje primjene i uporabu. Primjena, uporaba i obrada proizvoda su izvan naše kontrole pa ste stoga isključivo vi odgovorni za njih. Ako se uspokos ove odgovornosti utvrdi neka šteta ona će se ograničiti na vrijednost isporučene i korištene robe. Mi ćemo naravno osigurati stalnu kvalitetu naših proizvoda u opsegu naših Općih uvjeta prodaje i isporuke robe.

CAVEX BITE&WHITE ABC-MASTERKIT: hjemmblegesystem i 3 trin**TRIN A = AKTIVERING: CAVEX BITE&WHITE STAINLESS****BESKRIVELSE**

Teeth Whitening Activator & Stain Removal Paste. Fjerner pletter og plak på tænderne. Forstærker blegningsbehandlingerne ved forhøjelse af pH-værdien i munden.

- Mildt slibende for glans / dentin.
- Høje rensende – og polerende værdier.
- Forhøjer pH-værdien i munden som forbehandling inden blegning af tænderne.
- Ikke beregnet til hyppigt brug.

EMBALLAGE

Tube 35ml – 50g

INGREDIENSER

Vand, sorbitol, hydreret silica, glycerin, Erythritol, litium-magnesium-natrium-silikat, poloxamer 124, natrium-hexametafosfat, cellulosegummi, xantangummi, phenoxyetanol, CI 42090, mentha arvensis-ekstrakt, l-limonen, natriumsaccharin.

ADVARSLER

Opbevares utilgængeligt for børn. Begrænset holdbarhed efter åbning.

**OPBEVARINGSRÅD**

Må ikke opbevares ved temperaturer på over 25 °C (77 °F). Opbevares på et mørkt, tørt sted (frostfrit). Undgå udsættelse for direkte sollys. Materialet må ikke bruges efter udløbsdatoen.

TRIN B = BLEGNING: CAVEX BITE&WHITE**BESKRIVELSE**

Hydrogenperoxid fungerer som blegemiddel i Cavex Bite&White. Det bliver tilsat som karbamid peroxid for at opnå et tilstrækkeligt stabilt produkt. Karbamid peroxid opløses hurtigt til iltradikaler og vand. Under blegningsprocessen angriber de frie radikaler de dobbelte kulstofforbindelser, som normalt er kilden til misfarvning af tænderne.

EMBALLAGE

3 Cavex Bite&White 3 ml sprøjter

AKTIVE STOFFER

- 16 % carbamidperoxid – svarende til 6 % brintoverilte
- 0,1 % natriumfluorid-desensibilisator

SAMMENSÆTNING

Glycerin, vand, ureaepoxid, polyakrylsyre, kaliumhydroxid, kaliumnitrat, natriumfluorid, EDTA, mentha arvensis-ekstrakt.

ADVARSLER

- Indeholder hydrogenperoxid
- Indeholder natriumfluorid.
- Undgå kontakt med øjnene Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå eksponering af tænder, der vides at være følsomme.
- Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens bakken bæres.
- Farlig ved indtagelse.

Hydrogenperoxid < 6%; Må ikke anvendes til personer under 18 år. Må kun sælges til tandlæger. For hver brugscyklus må produkterne den første gang kun anvendes af tandlæger eller under en tandlæges direkte opsyn, hvis der garanteres et tilsvarende sikkerhedsniveau. Bagefter stilles produktet til rådighed for brugeren i resten af brugscyklen.

INDIKATION FOR ANVENDELSE

Cavex Bite&White er en gel til tandblegning, hvorved den naturlige tandfarve bleges. Cavex Bite&White må kun udleveres efter anvisning fra tandlæge. En konsultation hos en anerkendt tandlæge forud for hver blegningsbehandling anbefales for at udelukke mund- eller sundhedsproblemer.

KONTRAINDIKATIONER

Det anbefales at konsultere en læge i følgende tilfælde:

- gravide kvinder, og kvinder som ammer.
- personen, som behandles for en alvorlig sygdom.
- børn under 18 år.

KLINISK PROCEDURE

- Register startnuancen, kontrollér den aktuelle tandsundhed, og sørg for, at patienten har realistiske forventninger til de endelige resultater.
- Foreløbige eller midlertidige reparationer kan blive misfarvet under blegeprocessen, hvorimod komposit- og polycarbonatmaterialer ikke påvirkes. Patienter med reparationer af kompositmaterialer skal derfor oplyses om, at eksisterende kompositmaterialer muligvis skal udskiftes, da kun naturlige tænder bliver lysere.
- Hvis patienter skal have udført æstetiske eller pålmede reparationer, skal der ventes 2 uger efter seneste blegebehandling for at sikre, at farven har stabiliseret sig. Alle reparationer skal være intakte eller effektivt forseglet med hjælp af egnede midlertidige materialer.
- Det bør anbefales at bruge følsomhedslindrende tandpasta fra 2 uger før behandlingsprocedurens påbegyndelse til 2 uger efter behandlingen.
- Patienter skal altid advares om risiko for tandfølsomhed og tandkødsirritation under behandlingen. Tandkødsområder, der kommer i kontakt med produktet, kan blive røde eller hvide, men får deres oprindelige farve igen



efter nogle dage.

- Undgå irritation af blødt væv ved at anbefale patienten at undgå overfyldning af bakkerne, at tørre overskydende gel bort fra tandkødsanten og at skylle munden omhyggeligt efter behandlingen.
- Sørg for, at patienten er opmærksom på, at hæften skal sættes på sprøjten igen efter hver behandling.
- Patienten må ikke spise, drikke eller ryge tobak i mindst 30 minutter efter hver behandling.
- Instruer patienten om at afbryde behandlingen og kontakte dig omgående, hvis der viser sig problemer.
- Den endelige nuance opnås ca. 2 uger efter påbegyndelsen af behandlingen. Der bør aftales en tid til opfølgning efter behandlingen.

INSTRUKTION FOR FØRSTE HJÆLP

- Hvis der sluges en større mængde gel (mere end 25% af sprøjtes gel): drik omgående vand, forcer ikke opkastning og rådfør med læge.
- Hvis der kommer gel i øjnene: træk øjenlågene op, skyld øjet mindst 15 minutter uafbrudt med vand og rådfør med læge. Ved kontakt med tøj, hud eller hår: fjern det beskadede tøj og afskyl hud eller hår under rindende vand.

MULIGE SKADELIGE VIRKNINGER

Skadelige virkninger, som kan henføres til brug af Cavex Bite&White er blandt andet, men ikke udelukkende:

Følsomhed

Nogle patienter kan under behandlingen erfare, at tænderne bliver ekstra følsomme for kulde; andre oplever uspecifik følsomhed i tænder, tandkød, tunge, læber eller hals. Normalt skal symptomerne forsvinde få dage efter behandlingen. Behandlingen kan fortsættes med kortere, mindre frekvente applikationer til den ønskede blegningseffekt er opnået. Hvis ubehaget ikke ophører, bør behandlingen afsluttes.

Irritation af tandkød

Blegnings-ske, som når hen over tandkødet, kan forårsage mindre til alvorlig irritation af væv. Hvis en ske passer godt, kontrollér da om patienten har anvendt den korrekte mængde på den rigtige måde. Måske skal patienten reducere mængden af gel i deres ske.

OPBEVARINGSRÅD

- Opbevares på køl (<8 °C).
- Opbevares på et mørkt, tørt sted.
- Undgå udsættelse for direkte sollys.
- Materialet må ikke bruges efter udløbsdatoen.

**FJERNELSE**

Fjern produktet ifølge de lokale regler for affald.

TRIN C = KONDITIONERING: CAVEX BITE&WHITE EXSENSE**BESKRIVELSE**

Cavex Bite&White ExSense er en vandbaseret gel med myntearoma og indeholderen hydroxyapatit og kaliumnitrat. Cavex Bite&White ExSense formindsker følsomhed og forstærker tændernes hvide farve med re-mineralisering af hydroxyapatit.

EMBALLAGE

Tube 42 ml – 50 gram (tilstrækkeligt til ca. 20 behandlinger)

HOVEDBESTANDDELE I**CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:**

Hydroxyapatit 2%

SAMMENSÆTNING

Vand, sorbitol, glycerin, erythritol, litium-magnesium-natrium-silikat, hydroxyapatit, kaliumnitrat, phenoxyetanol, xantangummi, tetranatriumpyrofosfat, vinsyre, mentha spicata-olie, natriumsaccharin.

INDIKATIONER INDEN ANVENDELSE

- Efter blegning af tænder på tandklinik og/eller hjemme.
- Efter en professionel tandrensning.
- Modvirker og formindsker følsomhed.

KONTRA INDIKATIONER

Brug ikke Cavex Bite&White ExSense ved allergi over for mynte eller én af de øvrige bestanddele.

FREM GANGSMÅDEN VED BRUG

1. Forberedelse af tænderne og rens ved at pudse og flosse.
2. Anvendelse:

Uden blegeske: Vask hænderne grundigt med sæbe og vand. Anbring lidt Cavex Bite&White ExSense på en ren finger. Fordel gelen let hen over alle over- og undertænders overflader. Lad gelen indvirke i 10 minutter. Spyt eventuelt overflødig gel ud og skyl ikke munden med vand.

Med blegeske: Anbring en stribe Cavex Bite&White ExSense på hele blegeske. Indsæt ske og drej denne forsigtigt til venstre og højre, således at gelen fordeles godt henover tænderne. Bid derefter langsomt på skeen og lad gelen indvirke 10 minutter. Fjern skeen, spyt eventuelt overflødig gel ud og skyl ikke munden med vand. Afvask skeen med koldt vand.

3. Drej hæften straks efter brug fast på tuben.
4. For et optimalt resultat: spis og drik ikke inden for 30 minutter efter behandlingen.
5. Brug produktet hver dag i 10 dage, eller efter anvisning af din tandlæge.

ADVARSEL OG FØRSTE HJÆLPS INSTRUKTIONER

Ved kontakt med øjnene: Skyl grundigt med meget vand og søg lægehjælp. Brug ikke produktet efter holdbarhedsdatoens udløb.

OPBEVARING

Opbevares på køligt, tørt (frostfrit) sted, beskyttet mod direkte sollys.

**Fremstillet af Cavex Holland BV**

Vores tekniske rådgivning hvad enten den er givet mundtligt, skriftligt eller ved afprøvning af produktet gives i god tro, men er uden garanti. Dette gælder også i tilfælde der involverer tredjeparts ejendomsret. Det fritager ikke brugeren for forpligtelsen til at kontrollere at det produkt vi har leveret er egnet til de fremgangsmåder og anvendelsesområder som det er påtænkt anvendt til. Da vi ikke har nogen kontrol over anvendelse, fremgangsmåde og behandling af dette produkt, sker brugeren helt på brugerens ansvar. Skulle der, på trods af disse ansvarsbetingelser, opstå et retskrav vil dette være begrænset til værdien af produkter leveret af os og anvendt af Dem. Vi vil naturligvis levere produkter af et ensartet kvalitet inden for rammerne af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

**CAVEX BITE&WHITE ABC MASTER KIT:
3 lépéses otthoni fehérítő rendszer**

**A. LÉPÉS = AKTIVÁLÁS:
CAVEX BITE&WHITE STAINLESS**

LEÍRÁS

Fogfehérítő aktivátor és folteltávolító krém. Eltávolítja a felszíni foltokat és a plakot a fogakról. A száj pH-jának optimalisra való beállításával fokozza a fehérítő kezelések hatását.
- Enyhén kopató hatású a fogzománcra és a dentinre
- Intenzív tisztító és polírozó hatású.
- A fogfehérítést előkészítő kezelésként növeli a száj pH-ját.
- Nem rendszeres használatra.

KISZERELÉS

Tubus, 35 ml – 50 g

ÖSSZETEVŐK

Víz, szorbit, hidrátált szilícium-dioxid, glicerin, eritrit, lítium-magnézium-nátrium-szilikát, poloxamer 124, nátrium-hexametafoszfát, cellulózgumó, xantángumi, fenoxietanol, CI 42090, mentha arvensis kivonat, l-limonén, nátrium-szacharin.

FIGYELMEZTETÉSEK

Tartsa gyermekektől elzárva. Korlátozott eltarthatóság a felbontás után.



TÁROLÁSI TANÁCSOK

Ne tárolja 25 °C-nál (77 °F) magasabb hőmérsékleten. Tárolja sötét, száraz helyen (fagymentesen). Kerülje a közvetlen napugárást. Ne használja az anyagot a lejárat dátum után.

**B. LÉPÉS = FEHÉRÍTÉS:
CAVEX BITE&WHITE**

LEÍRÁS

A Cavex Bite&White gél fehérítőszerként hidrogénperoxidot tartalmaz. A termék stabilitása érdekében ezt karbamid-peroxid formájában adják a gélhez. A karbamid-peroxid víz és oxigéngyök keletkezése közben, nagy sebességgel elbomlik. A fehérítési eljárás során a szabad gyökök megtámadják azokat a szén-szén kettős kötéseket, amelyek a fognon megjelenő színek (foltok) többségét okozzák.

KISZERELÉS

3 Cavex Bite&White 3 ml-es fecskendő

AKTÍV ÖSSZETEVŐK

- 16 % karbamid-peroxid – ami 6 % hidrogén-peroxidnak felel meg
- 0,1 % nátrium-fluorid érzékenységsökkentő

ÖSSZETÉTEL

Glicerin, víz, karbamid-peroxid, poliakrilát sav, kálium-hidroxid, kálium-nitrát, nátrium-fluorid, EDTA, mentha arvensis kivonat.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Hidrogén-peroxidot tartalmaz.
- Nátrium-fluoridot tartalmaz.
- Szembe ne kerüljön. Szembe kerülése esetén a szemet azonnal öblítsük ki.
- Tartsa gyermekektől elzárva.
- Kerülje az ismeretlen érzékeny fogak érintkezését.
- Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a sín viselése alatt.
- Lenyelve ártalmatlan.
Hidrogén-peroxid < 6%; 18 éves kor alatt nem alkalmazható. Csak fogorvosoknak értékesíthető. Használata minden alkalmazási ciklusban első ízben fogorvosok által, illetve azok közvetlen felügyelete alatt és azonos biztonsági szint biztosítása mellett történhet. Ezután az alkalmazási ciklus hátralevő részére a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

HASZNÁLATI JAVALLATOK

A Cavex Bite&White – fogfehérítő gél, amely a természetes fogak színének világosabbá tételére szolgál. A Cavex Bite&White gél csak fogászati szakember által, vagy annak rendelésére adható ki. A fehérítő eljárást megelőzően ajánlatos képzett fogszakorvossal konzultálni az esetleges rejtett szájüregi vagy egészségügyi problémák kizárása céljából.

ELLENJAVALLATOK

A következő esetekben ajánlatos orvosi tanácsot kérni:
- Terhes és szoptató nő
- Súlyos betegség miatt kezelés alatt álló személyek
- 18 év alatti gyermekek

KLINIKAI ELJÁRÁS

- Rögözze a kezdeti árnyalatot, tekintse át a jelenlegi fogászati állapotot, és győződjön meg arról, hogy a páciens reális elvárásokkal rendelkezik a végleges eredményekkel kapcsolatban.
- Az ideiglenes vagy átmeneti fogpótlások elszíneződhetnek a fehérítés során, míg a kompozit vagy polikarbonát anyagok változatlanok maradnak. Ezért figyelmeztetni kell a páciens, hogy a megfelelő kompozit tömések cseréire szorulhatnak, mivel csak a természetes fogak fehérednek.
- Esztétikai vagy ragasztásos fogpótlások esetén várjon 2 hetet az utolsó fehérítő kezelés után, hogy a szín stabilizálódjon. Minden fogpótlás legyen ép vagy jól záródó, megfelelő ideiglenes anyagokkal.
- Javasolt érzékenységsökkentő fogkrém használata 2 héttel a kezelés előtt, és folytatása 2 héttel a kezelés után.
- Figyelmeztesse a páciens, hogy a kezelés alatt fogérzékenység vagy nyírritáció jelentkezhet. Az íny vörösré vagy fehérre változhat, de néhány nap után visszatér a normál színéhez.
- Az íny irritációjának elkerülése érdekében tanácsolja a páciensnek, hogy kerülje a falcák túltöltését, törölje le az ínyről a felesleges gélt, és



alaposan öblítse ki a száját a kezelés után.
- Minden kezelés után ellenőrizze, hogy a páciens visszahelyezte-e a fecskendő kupakját.
- A páciens ne egyen, igyon vagy dohányozzon legalább 30 percig a kezelés után.
- Utasítsa a páciens, hogy azonnal hagyja abba a kezelést, és vegye fel Önnel a kapcsolatot, ha bármilyen probléma merül fel.
- A végleges árnyalat körülbelül 2 héttel a kezdete után alakul ki. Javasolt egy utánkövetési időpont megszervezése a kezelés után.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- Nagy mennyiségű (a fecskendőben lévő gél 25%-ánál több) gél lenyelése esetén azonnal igyon vizet, ne alkalmazzon hánytatót, és hívjon orvost.
- Ha a gél a szembe kerül, tartsa széthúzza a szemhéjakat, legalább 15 percen át folyamatosan öblítse a szemet vízzel, és hívjon orvost.
- Ha a gél a ruházatra, a bőrre vagy a hajra kerül, vegye le a szennyezett ruházatot, és folyóvízzel öblítse le a bőrt vagy a haját.

LEHETSÉGES NEMKÍVÁNTOS HATÁSOK

A Cavex Bite&White használatával kapcsolatos nemkívánatos hatások többek között a következők lehetnek:

Érzékenység

Egyes betegek a fogak fokozott hidegérzékenységét tapasztalják a kezelés során, mások pedig a fogak, az íny, a nyelv, az ajkak vagy a torok nem specifikus érzékenységéről számolnak be. A tünetek általában a kezelés befejezése után néhány nappal megszűnnek. A kezelés rövidebb, kevésbé gyakori alkalmazásokkal folytatható a kívánt fehérítő hatás eléréséig. Ha a kellemetlen érzés fennmarad, a kezelést abba kell hagyni.

Ínyirritáció

Az ínyre is ráhajló a lágyszövetek enyhétől súlyosig terjedő irritációját okozhatják. Ha a sínek pontosan illeszkednek, ellenőrizze, hogy a betegnél a megfelelő módon, a megfelelő mennyiségű gélt alkalmazza-e. Lehet, hogy a betegnek csökkentenie kell a sínébe töltött gél mennyiségét.

TÁROLÁSI TANÁCSOK

- Hűtve tárolja (<8 °C)
- Sötét, száraz helyen tárolja.
- Kerülje a közvetlen napugárást.
- Ne használja az anyagot a lejárat dátum után.



HULLADÉKBA HELYEZÉS

Az eszközt a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell hulladékba helyezni.

**C. LÉPÉS = KONDITIONÁLÁS:
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE**

LEÍRÁS

A Cavex Bite&White ExSense – mentaaromával kiegészített, vizes bázisú gél, amely hidroxipapatitot és kálium-nitrátot tartalmaz. A Cavex Bite&White ExSense csökkenti az érzékenységet, és a hidroxipapatit útján történő remineralizáció segítségével fokozza a fogak fehérségét.

KISZERELÉS

Tubus, 42 ml – 50 gramm (körülbelül 20 kezelésre elegendő)

A CAVEX BITE&WHITE EXSENSE FŐ ÖSSZETEVŐI:
Hidroxipapatit 2%

ÖSSZETÉTEL

Víz, szorbit, glicerin, eritrit, lítium-magnézium-nátrium-szilikát, hidroxipapatit, kálium-nitrát, fenoxietanol, xantángumi, tetraszódium-pirofoszfát, borkősav, mentha spicata olaj, nátrium-szacharin.

HASZNÁLATI JAVALLATOK

- Rendelőben vagy otthon végzett fogfehérítés után
- Profeszionális fogtisztítás után
- Érzékenység megelőzése és csökkentése

ELLENJAVALLATOK

Mentaaromával vagy bármelyik összetevővel szembeni allergia esetén ne használja a Cavex Bite&White ExSense gélt.

KEZELÉSI ELJÁRÁS

1. Készítse elő és tisztítsa meg a fogakat fogkefe és fogszelvény segítségével.
2. Alkalmazás:

Sín nélkül: Szappannal és vízzel alaposan mosson kezet. Nyomjon ki egy kevés Cavex Bite&White ExSense gélt egyik ujjára. Gyengéden kenje fel a gélt az alsó és felső fogak minden felületére. 10 percig hagyja a gélt a fogakon. Képje ki a fölösleges gélt, és ne öblítse ki a száját vízzel.

Sínnel: Nyomjon ki vékony szalagnyi Cavex Bite&White ExSense gélt végig az egész sínbe. Tegye be a sint, és gyengéden mozgassa körbe, jobbra és balra, hogy a gél mindenhova eljusson a fogakon. Óvatosan harapjon rá a sínre, és 10 percig hagyja a gélt a helyén. Vegye ki a sint, képje ki a fölösleges gélt, és ne öblítse ki a száját vízzel. Öblítse ki a sint hideg vízzel.

3. A tubust használat után azonnal zárja le a kupakkal.
4. A legjobb eredmény érdekében az alkalmazás után legalább 30 percig ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
5. A terméket használja 10 napon át naponta, vagy kövesse az Önt ellátó fogászati szakember utasításait.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Ha a termék szembe kerül, bő vízzel alaposan öblítse ki, és forduljon orvoshoz. A lejárat idő után nem szabad használni az anyagot.

TÁROLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Hűvös, száraz (fagymentes) helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó.



Gyártja: Cavex Holland BV
Használati tanácsainkat cégünk részéről a legjobb jóhiszemben adjuk, akár írásban, akár szóban, akár bemutatás alapján, de a garanciavállalás kizárásával. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha harmadik személy tulajdonosi jogairól van szó. Ez nem mentesíti Önöket az alól, hogy az általunk szállított termékeket a felhasználás és az alkalmazás tekintetében alkalmasság szempontjából megvizsgálják. A termékek alkalmazására, felhasználására és feldolgozására nem lehetünk befolyásolással, ennél fogva az emlitettek teljes mértékben az Önök felelősségi körébe tartoznak. Amennyiben ezen kötelezettség tekintetében bármiféle károsodás keletkezne, anyagi felelősségünk legfeljebb a szállított termék tárgyat képező, és az Önök által felhasznált termékek értékére korlátozódik. Mi a magunk részéről természetesen termékeinkre állandó minőséget biztosítunk az Általános értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően.

ZESTAW ABC CAVEX BITE&WHITE:
3-etapowy system do domowego wybielania zębów

KROK A = AKTYWACJA:
CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

OPIS

Aktywator do wybielania zębów i pasta do usuwania plam. Usuwa zabrudzenia powierzchni i kamień nazębny. Wzmocnia efekty wybielania, optymalizując wartość pH w ustach.
 - Lekko żrące dla szkliwa / zębiny,
 - Wysoka jakość czyszczenia i polerowania.
 - Zwiększa wartość pH w ustach jako wstępne działanie przed wybielaniem.
 - Nie jest przeznaczony do regularnego użytku.

OPAKOWANIE
 Tubka 35ml – 50g

SKŁADNIKI:

Woda, sorbitol, uwodniona krzemionka, gliceryna, erytrytol, krzemian litowo-magnezowo-sodowy, poloksamer 124, heksametafosforan sodu, guma celulozowa, guma ksantanowa, fenoksyetanol, Cl 42090, ekstrakt z mentha arvensis, l-limonen, sacharyna sodowa.

OSTRZEŻENIA

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ograniczony okres trwałości po otwarciu.



ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze wyższej niż 25°C (77°F). Przechowywać w ciemnym, suchym miejscu (zabezpieczonym przed mrozem). Unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie używać materiału po upływie daty ważności.

KROK B = WYBIELANIE: CAVEX BITE&WHITE

OPIS

Czynnikiem wybielającym w Cavex Bite&White jest nadtlenek wodoru. Jest on dodawany jako nadtlenek karbamidu w celu uzyskania odpowiednio stabilnego produktu. Nadtlenek karbamidu szybko rozkłada się na rodniki litowe i wodę. Wzrost procesu wybielania wolne rodniki atakują podwójne wiązania węgla, które są źródłem większości przebarwień (plam) na zębach.

OPAKOWANIE
 3 Cavex Bite&White, 3-mililitrowe strzykawki

SKŁADNIKI AKTYWNE

- 16% nadtlenek karbamidu - odpowiednik 6% nadtlenku wodoru
 - 0,1% środek odczulający na bazie fluorku sodu

SKŁAD

Gliceryna, woda, nadtlenek mocznika, kwas

poliakrylowy, wodorotlenek potasu, azotan potasu, fluorek sodu, EDTA, ekstrakt z mentha arvensis.



OSTRZEŻENIA

- Zawiera nadtlenek wodoru
 - Zawiera fluorek sodu.
 - Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.
 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Nie używać w przypadku nadwrażliwych zębów.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas noszenia łyżki.
 - Niebezpieczne w przypadku połknięcia. Nadtlenek wodoru < 6%. Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. Wyrób przeznaczony do sprzedaży wyłącznie lekarzom denty stomom.
 W każdym cyklu produkt po raz pierwszy musi być stosowany przez lekarza denty stomom lub pod jego bezpośrednim nadzorem, o ile zapewnienia to równoważny poziom bezpieczeństwa. Następnie wyrób wydaje się konsumentowi do dokończenia cyklu stosowania.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Cavex Bite&White to żel do wybielania zębów przeznaczony do rozjaśniania koloru naturalnych zębów. Cavex Bite&White powinien być wydawany wyłącznie przez stomatologa lub higienistę. Przed przystąpieniem do wybielania zaleca się zasięgnięcie porady wykwalifikowanego stomatologa, aby wykluczyć choroby jamy ustnej albo inne problemy zdrowotne.

PRZECIWWSKAZANIA

Zaleca się zasięgnięcie porady lekarza w przypadku stosowania:
 - przez kobiety w ciąży albo w czasie karmienia;
 - podczas leczenia ciężkiej choroby;
 - przez dzieci w wieku poniżej 18 lat.

POSTĘPOWANIE KLINICZNE

- Odnotować początkowy odcień, ocenić obecny stan zdrowia zębów i upewnić się, że oczekiwania pacjent co do wyników końcowych są realistyczne.
 - Prowizoryczne lub tymczasowe uzupełnienia protetyczne mogą się przebarwić podczas procesu wybielania, natomiast materiały kompozytowe lub poliwęglanowe pozostaną nienaruszone. - W związku z tym pacjentów z uzupełnieniami kompozytowymi należy poinformować, że może istnieć konieczność ich wymiany, ponieważ wybielone zostaną wyłącznie naturalne zęby.
 - Pacjenci wymagający uzupełnień estetycznych albo wkładów adhezyjnych powinni poczekać 2 tygodnie od ostatniego wybielania w celu ustabilizowania się koloru. Wszystkie wypełnienia powinny być nienaruszone albo dobrze zaplombowane przy użyciu odpowiednich materiałów tymczasowych.
 - Należy zalecić używanie pasty zapewniającej ulgę przy wrażliwości zębów w okresie 2 tygodni

przed rozpoczęciem wybielania aż do 2 tygodni po jego zakończeniu.

- Pacjent powinien zostać pouczony o możliwości wystąpienia wrażliwości zębów lub dziąseł podczas wybielania. - Dziąsła, które mają styczność ze środkiem, mogą zrobić się czerwone lub białe, ale po kilku dniach ponownie nabiorą normalnego koloru.
 - Aby uniknąć podrażnienia tkanki miękkiej, należy zalecić pacjentowi unikanie przepiętowania łyżek do wybielania oraz usunięcie nadmiernej ilości żelu z linii dziąseł i dokładne wypłukanie ust po zakończeniu wybielania.
 - Pouczyć pacjenta, że po każdorazowym wybielaniu należy zamknąć strzykawkę, nakładając na nią osłonkę.
 - Pacjent nie powinien jeść, pić ani palić przez co najmniej 30 minuty po wybielaniu zębów.
 - Poinstruować pacjenta, aby w razie problemów natychmiast zaprzęść wybielania i skontaktować się ze stomatologiem.
 - Ostatni kolor ustala się po około 2 tygodniach od rozpoczęcia zabiegu. Po zakończeniu należy umówić się na wizytę kontrolną.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PIERWSZEJ POMOCY

- W razie połknięcia dużej ilości środka (ponad 25% żelu w strzykawce) niezwłocznie napić się wody i skontaktować się z lekarzem. Nie prowokować wymiotów.
 - Jeżeli żel dostanie się do oczu, należy otworzyć powieki i przemywać oczy pod bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut oraz skontaktować się z lekarzem.
 - W razie kontaktu z ubraniem, skórą albo włosami zjeść zabrudzone ubranie, natomiast skórę lub włosy przemyć pod bieżącą wodą.

POTENCJALNE NIEPOŻĄDANE SKUTKI

Do niepożądanych skutków, jakie mogą być związane z używaniem Cavex Bite&White, należą między innymi:

Wrażliwość

Niektórzy pacjenci mogą odczuwać podczas wybielania zwiększoną wrażliwość zębów na zimno, natomiast u innych może wystąpić niespecyficzna wrażliwość zębów, dziąseł, języka, ust albo gardła. W zasadzie takie objawy powinny ustąpić w ciągu kilku dni po zakończeniu wybielania. Można kontynuować wybielanie aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu, aplikując środek krócej iradziej. Jeżeli dyskomfort nadal się utrzymuje, należy przerwać wybielanie.

Podrażnienie dziąseł

Tacki, które nachodzą na dziąsła, mogą spowodować podrażnienia tkanki miękkiej w stopniu lekkim do silnego. Jeżeli tacka jest dobrze dopasowana, należy sprawdzić, czy pacjent używa odpowiedniej ilości środka we właściwy sposób. Może istnieć konieczność zmniejszenia ilości żelu na tackach.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

- Przechowywać w lodówce (<8°C).
 - Przechowywać w ciemnym, suchym miejscu.
 - Unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - Nie używać materiału po upływie daty ważności.



USUWANIE

Wyrzucić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

KROK C = PIELEGNACJA:
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

OPIS

Cavex Bite&White ExSense to żel o aromacie mięty na bazie wody, który zawiera hydroksyapatyt i azotan potasu. Cavex Bite&White ExSense reguluje wrażliwość i pogłębia biel zębów dzięki remineralizacji za pomocą hydroksyapatytu.

OPAKOWANIE

Tubka 42 ml – 50 gramów (wystarcza na około 20 aplikacji)

GŁÓWNE SKŁADNIKI

CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:
 Hydroksyapatyt 2%

SKŁAD:

Woda, sorbitol, gliceryna, erytrytol, krzemian litowo-magnezowo-sodowy, hydroksyapatyt, azotan potasu, fenoksyetanol, guma ksantanowa, pirofosforan tetrasodu, kwas winowy, olejek mentha spicata, sacharyna sodowa.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

- Po wybielaniu zębów w gabinecie stomatologicznym albo w domu.
 - Po profesjonalnym wybielaniu zębów.
 - Ochrona i kontrola wrażliwości.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować Cavex Bite&White ExSense w razie uczulenia na aromat miętowy ani jakiegokolwiek inny składnik.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Przygotować i wyczyścić zęby za pomocą szczoteczki i nitki denty stomom.
 2. Stosowanie:

Bez tacki: Dokładnie umyć ręce z użyciem mydła i wody. Nałożyć niewielką ilość Cavex Bite&White ExSense na czysty palec. Delikatnie nałożyć żel na całą powierzchnię górnych i dolnych zębów. Pozostawić żel na zębach przez 10 minut. Wypłukać resztę żelu i nie płukać ust wodą.
Z tacką: Nałożyć niewielki pasek Cavex Bite&White ExSense na całą tackę. Włożyć tackę i delikatnie obracać w prawo i w lewo, aby

się upewnić, że żel został rozprowadzony na wszystkich zębach. Delikatnie przygryźć tackę i pozostawić żel na 10 minut. Wyjąć tackę, wypłukać resztę żelu i nie płukać ust wodą. Zmąść tackę zimną wodą.

3. Tackę zamykać tubkę bezpośrednio po użyciu.
 4. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów nie pić ani nie jeść przez co najmniej 30 minut od stosowania środka.
 5. Używać produktu codziennie przez 10 dni albo zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez stomatologa lub higienistę.

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PIERWSZEJ POMOCY

W razie dostania się środka do oczu, przemyć je dużą ilością wody i zasięgnięcie porady lekarza. Nie używać środka po dacie przydatności.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnym, suchym (mrozoopornym) miejscu i daleko od bezpośredniego światła słonecznego.



Wyprodukował Cavex Holland BV

Informacje techniczne, zarówno te przekazywane w formie ustanej jak i pisemnej, oraz wynikające z doświadczeń, są zalecanymi poradami również odnośnie praw osób trzecich. Nie walnia to jednak Ciebie z obowiązku sprawdzenia produktu pod względem przydatności do planowanego wykorzystania. Ponieważ używanie naszych produktów odbywa się poza naszą kontrolą, nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

CAVEX BITE&WHITE ABC MASTER KIT:
Sistema de branqueamento para utilização doméstica em 3 etapas

PASSO A = ATIVAÇÃO:
CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

DESCRIÇÃO

Ativador de branqueamento de dentes e pasta para eliminação de manchas. Elimina manchas superficiais e placa dos dentes. Otimiza os tratamentos de branqueamento aumentando o valor do pH na boca.
 - Ligeiramente abrasivo para o esmalte/dentina
 - Alta capacidade de limpeza e polimento.
 - Aumenta o valor do pH na boca como tratamento prévio para o branqueamento dos dentes
 - Não concebido para utilização regular

EMBALAGEM

Tubo 35ml – 50g

INGREDIENTES

Água, sorbina, sílica hidratada, glicerina, Eritritol, silicato de sódio de lítio- magnésio, poloxaleno 124, hexametáfosfato de sódio, goma de celulose, goma xantana, fenoxietanol, Cl 42090, extrato de menta arvensis, l-limoneno, sacarina de sódio.

ADVERTÊNCIAS

Manter fora do alcance das crianças. Prazo de validade limitado após a abertura.



CONSELHOS DE ARMAZENAMENTO

Não armazenar em temperaturas superiores a 25 °C (77 °F). Armazenar em local escuro e seco (sem gelo). Evite a exposição à luz solar direta. Não utilize o material após o prazo de validade.

PASSO B = BRANQUEAMENTO:
CAVEX BITE&WHITE

DESCRIÇÃO

O agente branqueador de Cavex Bite&White é o peróxido de oxigénio, que é adicionado como peróxido de carbamida, a fim de obter um produto suficientemente estável. O peróxido de carbamida decompõe-se rapidamente em radicais de oxigénio e água. Durante o processo de branqueamento, os radicais livres atacam as ligações de carbono duplas responsáveis pela maior parte das manchas nos dentes.

EMBALAGEM

3 seringas de 3 mL Cavex Bite&White

INGREDIENTES ACTIVOS

- 16 % Peróxido de Carbamida - equivalente a 6 % de peróxido de hidrogénio
 - 0,1 % Dessensibilizante de fluoreto de sódio

COMPOSIÇÃO

Glicerina, água, peróxido de ureia, ácido poliacrílico, hidróxido de potássio, nitrato de

potássio, fluoreto de sódio, EDTA, extrato de menta arvensis.

ADVERTÊNCIAS

- Contém peróxido de hidrogénio
 - Contém fluoreto de sódio
 - Evitar o contacto com os olhos.
 Enxaguar imediatamente se o produto entrar em contacto com os olhos.
 - Manter fora do alcance das crianças.
 - Evitar a exposição de dentes sensíveis conhecidos.
 - Não comer, beber ou fumar enquanto estiver a usar a bandeja.
 - Nocivo quando engolidos.
 Peróxido de hidrogénio <6%. Não utilizar em menores de 18 anos. Só pode ser vendido a dentistas. Para cada ciclo de utilização, a primeira utilização só pode ser feita por dentistas, ou sob a sua supervisão direta se for assegurado um nível de segurança equivalente. Posteriormente, pode ser fornecido aos consumidores a fim de completar o ciclo de utilização.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Cavex Bite&White é um gel destinado ao branqueamento da cor natural dos dentes. Cavex Bite&White só deve ser dispensado por receita de profissionais da área odontológica. Antes de qualquer processo de branqueamento, recomenda-se a consulta de um médico dentista para garantir que não existem problemas de saúde (oral).

CONTRAINDICAÇÕES

Recomenda-se a consulta de um médico nos seguintes casos:
 - Mulheres grávidas ou a amamentar
 - Pessoas sob tratamento de doença grave
 - Crianças e jovens com menos de 18 anos

PROCEDIMENTO CLÍNICO

- Registe a sombra inicial, revise a saúde dentária atual e certifique-se de que o paciente tem expectativas realistas sobre os resultados finais.
 - As restaurações provisórias ou temporárias podem mudar de cor durante o processo de branqueamento, enquanto os materiais compósitos ou de policarbonato não serão afetados. Portanto, os pacientes com restaurações de compósito devem ser avisados de que os compósitos existentes podem necessitar de substituição, uma vez que apenas os dentes naturais ficarão branqueados.
 - Para pacientes que necessitem de restaurações estéticas ou adesivas, aguardar 2 semanas após o último tratamento de branqueamento para permitir a estabilização da cor. Todas as restaurações devem estar intactas ou bem vedadas com materiais temporários adequados.
 - Deve ser aconselhável o uso de uma pasta de dentes para alívio da sensibilidade, começando 2 semanas antes do procedimento de tratamento e até 2 semanas após o tratamento.
 - Os pacientes devem ser sempre alertados sobre

sensibilidade dentária ou irritação gengival durante o tratamento. As áreas gengivais que entram em contato podem ficar vermelhas ou brancas, mas retornarão à sua cor normal após vários dias.

- Para evitar irritação dos tecidos moles, aconselhe o paciente a evitar encher demais as bandejas, a limpar o excesso de gel da linha das gengivas e a enxaguar bem a boca após o tratamento.
 - Após cada tratamento, certifique-se de que o paciente substitui a tampa da seringa.
 - O paciente não deve comer, beber ou fumar tabaco durante pelo menos 30 minutos após cada tratamento.
 - Instrua o paciente a interromper o tratamento e entre em contato imediatamente caso surja algum problema.
 - A tonalidade final será alcançada cerca de 2 semanas após o início do tratamento. Uma consulta de acompanhamento deve ser marcada após o tratamento.

INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

- Se for ingerida uma grande quantidade de produto (mais de 25% do gel na seringa), beber água de imediato, não induzir o vômito e consultar um médico.
 - Se o gel entrar em contacto com os olhos, manter as pálpebras abertas e lavar os olhos continuamente com água corrente durante pelo menos 15 minutos e contactar um médico.
 - Em caso de contacto com vestuário, com a pele ou com o cabelo, retirar a roupa contaminada e lavar a pele ou o cabelo com água corrente.

POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS

Os efeitos adversos eventualmente associados à utilização de Cavex Bite&White incluem, mas não estão limitados a:

Sensibilidade

Alguns pacientes podem sentir maior sensibilidade dentária ao frio durante o tratamento, enquanto outros podem sentir sensibilidade não específica nos dentes, gengivas, língua, lábios ou garganta. Em geral, os sintomas devem desaparecer dentro de alguns dias após a interrupção do tratamento. O tratamento pode ser continuado com aplicações mais curtas e menos frequentes até que o efeito de branqueamento desejado tenha sido alcançado. Se o desconforto persistir, o tratamento deve ser interrompido.

Irritação das gengivas

As moldeiras que entram em contacto com as gengivas podem causar irritação ligeira a grave nos tecidos moles. Se as moldeiras encaixarem corretamente, verificar se o paciente aplica a quantidade correta e de forma adequada. O paciente pode ter de reduzir a quantidade de gel nas moldeiras.

CONSELHOS DE ARMAZENAMENTO

- Conservar refrigerado (<8°C).
 - Armazenar em local escuro e seco.
 - Evite a exposição à luz solar direta.
 - Não utilize o material após o prazo de validade.



ELIMINAÇÃO

Elimine os resíduos do produto de acordo com as regulamentações locais sobre resíduos.

PASSO C = CONDIÇÃO DE USO:
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

DESCRIÇÃO

Cavex Bite&White ExSense é um gel à base de água com aroma de menta que contém hidroxiapatite e nitrato de potássio. Cavex Bite&White ExSense diminui a sensibilidade e aumenta a brancura dos dentes por remineralização com hidroxiapatite.

EMBALAGEM

Tubo 42 ml – 50 gramas (suficiente para cerca de 20 tratamentos)

PRINCIPAIS INGREDIENTES DE CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

Hydroxyapatite 2%

COMPOSIÇÃO

Água, sorbina, sílica hidratada, glicerina, eritritol, silicato de lítio magnésio e sódio, hidroxiapatita, nitrato de potássio, fenoxietanol, goma xantana, pirofosfato tetrasódico, ácido tartárico, óleo de mentha spicata, sacarina sódica.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Após branqueamento dentário na clínica ou em casa
 - Após limpeza dentária profissional
 - Prevenção e controle da sensibilidade

CONTRAINDICAÇÕES

Não usar Cavex Bite&White ExSense em caso de alergia à menta ou a qualquer um dos restantes ingredientes.

PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

1. Preparar e limpar os dentes usando escova de dentes e fio dental.
 2. Aplicação:

Sem moldeira: Lavar as mãos cuidadosamente com água e sabão. Colocar uma pequena quantidade de Cavex Bite&White ExSense sobre o dedo limpo. Aplicar o gel suavemente em todas as superfícies dos dentes superiores e inferiores. Deixar o gel atuar nos dentes durante 10 minutos. Cuspir o gel em excesso e não enxaguar a boca com água.

Com moldeira: Colocar uma pequena tira de Cavex Bite&White ExSense sobre toda a moldeira.

Inserir a moldeira e movimentá-la suavemente da esquerda para a direita de forma a assegurar que o gel é distribuído entre os dentes. Morder suavemente a moldeira e deixar o gel atuar durante 10 minutos. Retirar a moldeira, cuspir o gel em excesso e não enxaguar a boca com água. Enxaguar a moldeira com água fria.

3. Colocar sempre a tampa no tubo imediatamente após a utilização.
 4. Para obter os melhores resultados, não beber ou comer durante pelo menos 30 minutos após a aplicação.
 5. Utilizar o produto todos os dias, durante 10 dias, ou segundo as instruções do seu dentista.

AVISOS E INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e consultar um médico. Não usar o produto após expiração da data de validade.

CONSELHO DE ARMAZENAMENTO

Guardar em local fresco, seco (ao abrigo do gelo) e protegido da luz solar direta.



Fabricado por Cavex Holland BV

As nossas recomendações relativas à aplicação técnica oral, por escrito ou por meio de ensaios são, segundo os nossos critérios, de confiança, no entanto apenas são válidas instruções/indicações sem compromisso, igualmente com respeito a eventuais direitos de protecção de terceiros. Eles não o libera da obrigação de controlar os produtos que nós lhe fornecemos relativamente à sua respectiva capacidade face aos processos e objectivos em questão. A aplicação, a utilização e a elaboração dos produtos tem lugar fora do nosso campo de controle. Elas são por isso de sua responsabilidade. Em caso de dano, esta última limita-se ao valor dos bens que nós fornecemos e que foram utilizados por si. Naturalmente que garantimos a boa qualidade dos nossos produtos, em conformidade com os critérios mencionados relativos às nossas condições gerais de venda e de fornecimento.

CAVEX BITE&WHITE ABC MASTER-SET:
Hemblekningsystem i 3 steg

STEG A = AKTIVERING:
CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

BESKRIVNING

Tandblekningsaktivering & pasta för fläckborttagning. Tar bort fläckar på tandytan och plac från tänderna. Förstärker blekningsbehandlingar genom att pH-värdet i munnen höjs.
- Milt slipande av emalj / dentin.
- Höga rengörings- och poleringsvärden.
- Höjer pH-värdet i munnen som förbehandling vid tandblekning.
- Inte avsett för regelbunden användning.

FÖRPACKNING
Tub 35 ml – 50 g

INGREDIENSER

Vatten, sorbitol, kiselhydrat, glycerin, erytritol, litiummagnesiumnatriumsilikat, poloxamer 124, natriumhexametäfosfat, cellulosa gummi, xanthangummi, fenoxyetanol, CI 42090, åkermyntaextrakt, l-limonen, natriumsackarin.

VARNINGAR

Förvaras utom räckhåll för barn. Begränsad hållbarhet efter att förpackningen har öppnats.



FÖRVARINGSREKOMMENDATION

Förvaras inte vid temperaturer över 25 °C. Förvaras mörkt och torrt (frostfritt). Undvik exponering för direkt solljus. Använd inte materialet efter bäst före-datumet.

STEG B = BLEKNING: CAVEX BITE&WHITE

BESKRIVNING

Blekmedlet i Cavex Bite&White är väteperoxid. Det läggs till som karbamidperoxid för att få en tillräckligt stabil produkt. Karbamidperoxiden bryts snabbt ned till syreradikaler och vatten. Under blekningsprocessen anfaller de fria radikalerna de dubbla kolbindningar som är källan till de flesta tandmissfärgningarna.

FÖRPACKNING

3 Cavex Bite&White 3 ml-sprutor

AKTIVA INGREDIENSER

- 16 % karbamidperoxid – motsvarar 6 % väteperoxid
- 0,1 % natriumfluorid-desensitiser

SAMMANSTÄLLNING

Glycerin, vatten, ureaperoxid, polyakrylsyra, kaliumhydroxid, kaliumnitrat, natriumfluorid, EDTA, åkermyntaextrakt.

VARNINGAR

- Innehåller väteperoxid
- Innehåller natriumfluorid.
- Undvik kontakt med ögonen. Skölj genast ögonen om produkten kommer i kontakt med dem.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd inte på överkänsliga tänder.
- Åt, drick eller rök inte när du har brickan i munnen.
- Färligt att svälja.
- Väteperoxid < 6%: För inte användas till personer under 18 år. För endast säljas till tandläkare. Första gången i varje behandlingsomgång för produkterna endast användas av tandläkare eller under direkt överinseende av dem om en likvärdig säkerhetsnivå kan garanteras. För därefter ges till konsumenten för att denne ska avsluta behandlingsomgången.



INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Cavex Bite&White är ett tandblekningsgel som används för att bleka färgen på naturliga tänder. Cavex Bite&White ska endast användas av eller enligt instruktioner av tandvårdspersonal. Vi rekommenderar att du samråder med din tandläkare före varje form av blekning, för att utreda eventuella bakomliggande (tand) hälsoproblem.

KONTRAIKATIONER

Vi rekommenderar följande grupper att kontakta läkare innan produkten används:
- gravida och ammande kvinnor
- personer som behandlas för en allvarlig sjukdom
- barn under 18 år

KLINISKT FÖRFARANDE

- Registrera den ursprungliga färgen, bedöm tändernas aktuella hälsa och kontrollera att patienten har realistiska förväntningar på slutresultatet.
- Provisoriska eller tillfälliga tandlagningar kan missfärgas under blekningen, medan komposit eller polykarbonatmaterial inte påverkas. Därför ska alla patienter med kompositlagningar informeras om att befintligt komposit kanske måste bytas ut, eftersom det endast är naturliga tänder som blir vitare.
- Vänta i två veckor efter blekningen med behandlingen av patienter som behöver en estetisk eller häftande lagning, då hinner färgen stabilisera sig. Alla lagningar ska vara intakta, eller väl förseglade med de korrekta tillfälliga materialen.
- Vi rekommenderar att tänderna borstas med tandkräm för känsliga tänder under två veckor före behandlingen och två veckor efteråt.
- Varna alltid patienten om att tänderna kan bli känsliga och att tandkötet kan bli irriterat under behandlingen. Den del av tandkötet som kommer i kontakt med medlet kan bli rött eller vitt, men efter ett par dagar får det tillbaka sin normala färg igen.
- Rekommendera patienten att undvika att fylla

brickan med för mycket material och att borsta bort överflödigt gel vid tandköttsgränsen, för att förebygga irriterationer på mjukvävnaderna, samt att skölja munnen noga efter behandlingen.
- Se till att patienten sätter tillbaka locket på sprutan efter varje behandling.
- Under minst 30 minuter efter varje behandling för patienten inte äta, dricka eller röka.
- Instruera patienten om att avbryta behandlingen och omedelbart kontakta dig om det skulle uppstå några problem.
- Den slutgiltiga färgen kommer fram cirka två veckor efter att behandlingen har inletts. Efter behandlingen ska patienten komma tillbaka för en kontroll.

INSTRUKTIONER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN

- Om du svält en större mängd (mer än 25 % av gelet i sprutan): drick genast vatten, tvinga inte fram kräkningar och kontakta läkare.
- Om det kommit gel i ögonen ska du dra upp ögonlocken, skölja ögat med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.
- Om gel kommer på kläderna, huden eller i håret: ta av kläderna och skölj huden eller håret under rinnande vatten.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR

Biverkningar som kan uppstå i samband med användning av Cavex Bite&White omfattar, men är inte begränsade till:

Känslighet

Vissa patienter upplever under behandlingen att tänderna blir känsligare för kyla, andra kan känna av en icke-spezifisk känslighet i tänder, tandköt, tunga, läppar eller hals. I allmänhet ska symtomen försvinna ett par dagar efter att behandlingen har avslutats. Behandlingen kan fortsättas med kortare, mindre frekventa användningar tills du har erhållit önskad blekningsnivå. Om obehagen kvarstår ska behandlingen avslutas.

Irriterat tandköt

Brickor som sträcker sig över tandkötet kan ge en måttlig till allvarlig irritation av mjukvävnad. Om brickorna passar bra: kontrollera att patienten använder rätt mängd på rätt sätt. Patienten kanske måste minska mängden gel på brickorna.

FÖRVARINGSREKOMMENDATION

- Förvaras svårt (<8°C).
- Förvaras mörkt och torrt.
- Undvik exponering för direkt solljus.
- Använd inte materialet efter bäst före-datumet.



KASSERING

Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler.

STEG C = UNDERHÅLL:
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

BESKRIVNING

Cavex Bite&White ExSense är ett vattenbaserat gel med mintarom, som innehåller hydroxiapatit och kaliumnitrat. Cavex Bite&White ExSense minskar känsligheten och gör tänderna vitare tack vare remineralisering med hydroxiapatit.

FÖRPACKNING

Tub 42 ml – 50 gram (räcker till cirka 20 behandlingar)

VIKTIGASTE INGREDIENSER I CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:
Hydroxiapatit 2 %

SAMMANSTÄLLNING

Vatten, sorbitol, glycerin, erytritol, litiummagnesiumnatriumsilikat, hydroxyapatit, kaliumnitrat, fenoxyetanol, xanthangummi, tetranatriumpyrofosfat, vinsyra, krusmyntaolja, natriumsackarin.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

- Efter blekning inom tandvården och/eller i hemmet
- Efter professionell rengöring av tänderna
- Förebyggande och begränsning av känslighet

KONTRAIKATIONER

Använd inte Cavex Bite&White ExSense om du är allergisk mot mintarom eller mot någon annan av ingredienserna.

HANTERING

1. Förbered och rengör tänderna med tandborste och tandtråd.
2. Applikation:

Utan bricka: Tvätt händerna noga med tvål och vatten. Tryck ut lite Cavex Bite&White ExSense på ett rent finger. Anbringa gelet försiktigt på alla tandytor, både de övre och de nedre. Lämna gelet på tänderna i 10 minuter. Spotta ut överflödigt gel och skölj inte munnen med vatten.

Med bricka: Tryck ut en smal remsa Cavex Bite&White ExSense över hela brickan. För in brickan i munnen och rotera den försiktigt år höger och vänster för att se till att gelet sprids över tänderna. Bit ihop försiktigt i brickan och låt gelet verka i 10 minuter. Ta ut brickan, spotta ut överflödigt gel och skölj inte munnen med vatten. Skölj brickan med kallt vatten.

3. Sätt alltid på locket på tuben omedelbart efter användningen.
4. För att uppnå bästa resultat ska du inte äta eller dricka något under minst 30 minuter efter behandlingen.
5. Använd produkten dagligen i 10 dagar eller enligt tandvårdspersonalens instruktioner.

VARNINGAR & INSTRUKTIONER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN

Om det kommit gel i ögonen ska du skölja ögat med mycket vatten och kontakta läkare. Använd inte materialet efter det angivna bäst före-datumet.

FÖRVARINGSREKOMMENDATION

Förvaras svårt och torrt (frostfritt) och skyddat från direkt solljus.



Tillverkat av Cavex Holland BV

Vårt tekniska råd, antingen verbalt, skriftligt eller grundat på erfarenhet, har getts i god tro men utan garantier. Detta gäller också där äganderättsförhållanden för tredje part blir aktuella. Det befriar ej er från skyldigheten att testa de produkter som tillhandahålls av oss avseende deras lämplighet för avsedda behandlingar och indikationer. Applikationen, användningen och hanteringen av produkterna ligger utanför vår kontroll och är helt och hållet ert ansvar. Skulle vi trots detta hållas ansvarsskyldiga begränsas ansvaret till värdet av det gods som levererats av oss och använts av er. Vi garanterar, naturligtvis, en jämn kvalitet på våra produkter inom ramarna för gällande leveransbestämmelser.

**CAVEX BİTE&WHITE ABC MASTER KİT:
3-adımlık Evde Beyazlatma sistemi****ADIM A = ETKİLEŞME(AKTİVE ETME)
CAVEX BİTE&WHITE STAINLESS****AÇIKLAMA**

Diş Ağartma Aktifleştirici & Leke Kaldırma Macunu. Dişlerdeki yüzey lekelerini ve plakları kaldırır. Ağızdaki pH'ini optimize ederek ağartma tedavilerini artırır.

- Diş minesini / dentin için hafif aşındırıcıdır.
- Yüksek temizleme ve parlatma değerleri vardır.
- Diş ağartma tedavisinin hazırlığı olarak ağız pH'sini artırır.
- Düzenli kullanım için amaçlanmamıştır.

PAKETLEME

Tüp 35ml – 50g

BİLEŞENLERİ

Su, sorbitol, hidratlı silika, gliserin, eritritol, lityum magnezyum sodyum silikat, poloksamer 124, sodyum heksametafosfat, selüloz gum, ksantan sakızı, fenoksietanol, Cl 42090, mentha arvensis özü, l-limonen, sodyum sakarın.

UYARILAR

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Açıldıktan sonra raf ömrü sınırlıdır.

**SAKLAMA TAVSİYESİ**

25 °C (77 °F) dereceden daha yüksek bir ısıda saklamayın. Karanlık, kuru bir yerde saklayın (donmayan yerde). Doğrudan güneş ışığına maruz kalmasından kaçının. Malzemeyi son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

ADIM B = AĞARTMA: CAVEX BİTE&WHITE**AÇIKLAMA**

Hidrojen peroksit Cavex Bite&White içindeki ağartıcıdır. Yeterince kararlı bir ürün elde etmek için bu karambit (karbamid) peroksit olarak eklenmiştir. Karambit (karbamid)peroksit hızlıca oksijen radikalleri ve su olarak ayrılır. Serbest radikaller ağartma süreci sırasında dişlerdeki çoğu renk (leke) kaynağı olan çiftte karbon bağlarına yönelirler.

PAKETLEME

3 Cavex Bite&White 3 mL şırıngalar

ETKİN İÇİNDEKİLER

- % 16 karbamid peroksit - % 6 hidrojen peroksit eşdeğer
- % 0.1 hassasiyet giderici sodyum florür

BİLEŞİM

Gliserin, su, üre peroksit, poliakrilik asit, potasyum hidroksit, potasyum nitrat, sodyum florür, EDTA, mentha arvensis özü.

UYARILAR

- Hidrojen peroksit içerir.
- Sodyum florür içerir.
- Gözlerle temasından kaçının. Ürün gözle temas ettiğinde derhal durulayın.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Hassas olduğu bilinen dişlerin buna maruz kalmalarından kaçının.
- Kalıp takılı olduğunda hiçbir şey yemeyin, içecek veya sigara içmeyin.
- Yutulduğunda zararlıdır.
- Hidrojen peroksit < %6; 18 yaşından küçük kişiler için kullanılmamaktadır. Sadece diş hekimlerine satılacaktır. Her kullanım devri için, ilk kullanım sadece diş hekimini tarafından veya eşdeğer bir güvenlik seviyesi sağlandığı takdirde onların doğrudan gözetimi altında yapılacaktır. Sonradan kullanım devrini tamamlamak üzere tüketiciye temin edilecektir.

KULLANIM ENDİKASYONLARI

Cavex Bite&White doğal diş rengini azaltmak(ağartmak) için kullanılan diş ağartma jelidir. Cavex Bite&White sadece bir diş uzmanı tarafından veya onun talimatı üzerinden dağıtılır. Herhangi bir ağartma prosedüründen önce uzman bir diş hekimine danışılması, bunun altında(yanı sıra) ağız veya sağlık sorunları olmamasından emin olmak üzere tavsiye edilir.

CONTRA-ENDİKASYONLAR

- Aşğıdaki durumlarda bir doktora başvurmak tavsiye edilir:
- Hamile ve emziren kadınlar
- Şu anda ciddi bir hastalık için tedavi görenler
- 18 yaşından küçük çocuklar

KLİNİK PROSEDÜR

- Başlangıç rengini kayıt altına alın. Mevcut diş sağlığını inceleyin ve hastanın beklentisinin nihai sonuç hakkında gerçekçi olduğundan emin olun.
- Kompozit veya polikarbonat materyaller etkilenmeden aynen kalırken, geçici veya muvakkat restorasyonlar beyazlatma prosedürü esnasında renk değiştirebilir. Bu sebepten dolayı, ağızında kompozit restorasyon bulunan hastalara mevcut kompozitlerinin değişmesi gerekebileceği, çünkü sadece doğal dişlerin beyazlayabileceği söylenmelidir.
- Estetik veya adeziv restorasyonlara ihtiyacı olan hastalar için, renk stabilizasyonunu sağlamak amacıyla son beyazlatma tedavisinden sonra 2 hafta bekleyin. Tüm restorasyonlar sağlam olmalı veya uygun estetik materyallerle iyice kapatılmalıdır.
- Tedaviden 2 hafta önce başlamak ve 2 hafta sonrasına kadar devam etmek suretiyle hastaya hassas dişler için bir hassasiyet giderici diş macunu kullanmasını tavsiye edilecektir.
- Tedavi esnasında hastanın dişlerinde hassasiyet veya dişetlerinde tahriş oluşabileceğine dair hasta uyarılmalıdır. Ürünün temas ettiği dişetlerinde kızarıklık veya beyaz renk oluşabilir, ancak birkaç gün sonra normal rengine dönüşecektir.



- Yumuşak doku tahrişini önlemek için, hastaya, kalıpları çok fazla doldurmaması, dişeti kenarındaki fazla jeli silmesi ve tedavi sonrasında ağızı iyice çalkalayarak temizlemesi gerektiği konularında uyarıda bulunun.
- Her tedaviden sonra şırınganın kapağının kapatılması gerektiğine dair hasta uyarılmalıdır.
- Her tedaviden sonra hasta en az 30 dakika gıda ya da içecek tüketmemelidir ve sigara kullanmamalıdır.
- Herhangi bir sorun yaşandığı zaman, tedavinin durdurulması ve diş hekimine danışılması gerektiğine dair hastaya talimat verin.
- Nihai diş rengine tedavi başlangıcından yaklaşık 2 hafta sonra ulaşılacaktır. Tedaviden sonra bir takip randevusu düzenlenecektir.

UYARILAR

- Flürit içerir.
- Hidrojen Peroksit içerir.
- Gözle temas edilmesinden kaçınınız.
- Çocukların ulaşılacak yerde saklayınız.
- Bilinen aşırı hassas dişlerin buna maruz kalmasından kaçınınız.
- Kişiyi uygun kalıplar dolu takılı kaldığı müddetçe hiçbir şey yemeyiniz, içecek almayınız veya sigara içmeyin.
- Yutulduğunda zararlıdır.

İLK YARDIM TALİMATI

- Büyük bir miktar (şırıngadaki jelin %25'inden fazlası) yutulmuş durumda hemen su içiniz, kusmayı tetiklemezsiniz ve doktorla irtibata geçiniz.
- Jel göze geldiğinde göz kapaklarını ayrı tutunuz ve gözünüz en az 15 dakikalık bir süre akan suyla aralksız durulayın ve bir de doktorla irtibata geçiniz.
- Giysi, deri veya saçla temas olduğunda bulaşmış giysiyi çıkartınız ve deri ya da saçı akan suyla durulayınız.

OLASI YA ETKİLERİ

Cavex Bite&White kullanımı ile ilgili olabilecek yan etkiler aşağıdakileri içerir fakat bununla sınırlı değildir:

Hassasiyet

Bazı hastalar tedavi sırasında dişlerinin soğuğa karşı daha fazla hassas olmasını yaşamayabilirler, diğer hastaların ise diş, dişeti, dil, dudak veya boğazlarında nonspesifik hassasiyetleri olabilir. Genel olarak bu tür belirtilerin tedavisi son verilmesinden sonra birkaç gün içinde kaybolması gerekir. İstenilen ağartma etkisi elde edilinceye kadar daha kısa, daha seyrek uygulamalarla tedavije devam edilebilir. Rahatsızlıklar devam ettiğinde tedaviyi durdurunuz.

Dişeti tahriş

Dişetine kadar uzanan kalıplar hafiften ciddiye kadar yumuşak doku tahrişine neden olabilir. Kalıplar tam oturtulduğunda hastanın istenen miktarı gerekli şekilde uygulayıp uygulamadığını kontrol ediniz. Hastanın kalıplarına konulan jel miktarını azaltılması gerekebilir.

SAKLAMA TAVSİYESİ

- Buzdolabında saklayın (<8°C).
- Karanlık, kuru bir yerde saklayın.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmasından kaçınınız.
- Malzemeyi son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

**ATMA**

Cihazı yerel atık yönetmeliğine uygun olarak atınız.

**ADIM C = KONDİSYONLAMA:
CAVEX BİTE&WHITE EXSENSE****AÇIKLAMA**

Cavex Bite&White ExSense hidroksiapatit ve potasyum nitrat içeren nane aromalı su bazlı bir jeldir. Cavex Bite&White ExSense hassasiyeti kontrol ederek, hidroksiapatitli tekrar mineralleştirme ile diş beyazlığını artırır.

PAKETLEME

Tüp 42 ml – 50 gram (yaklaşık 20 tedavi seansı için yeterlidir)

**CAVEX BİTE&WHITE EXSENSE ANA BİLEŞENLERİ:
Hidroksiapatit (hidroksiapatit)%2.****BİLEŞİM**

Su, sorbitol, gliserin, eritritol, lityum magnezyum sodyum silikat, hidroksiapatit, potasyum nitrat, fenoksietanol, ksantan sakızı, tetrasodyum pirofosfat, tartarik asit, mentha spicata yağı, sodyum sakarın.

KULLANIM ENDİKASYONLARI

- Muayenehanedeki ve/veya evdeki diş ağartmadan sonra
- Profesyonel diş temizliğinden sonra
- Hassasiyetin önlenmesi ve kontrolü

CONTRA-ENDİKASYONLARI

Nane aroması veya diğer bileşenlere karşı alerji olunması durumunda Cavex Bite&White ExSense'yi kullanmayın.

KULLANMA PROSEDÜRÜ

1. Diş fırçası ve diş ipiği kullanarak diş hazırlayın ve temizleyiniz.
2. Uygulama:

Kalıpsız (Plaksız): Elleri sabunla suyla iyice yıkayınız. Küçük bir miktar Cavex Bite&White ExSense'yi temiz bir parmağa koyunu. (koyunuz) Üst ve alt dişlerin tüm yüzeylerine jeli kibarca (nazıkçe)sürünüz. Jelin dişte 10 dakikalık bir süre kalmasını sağlayınız. Fazladan jeli tükürerek atınız ve ağızınızı suyla durulamayınız.

Kalıpla (Plakla): Tüm kalıba ince bir şerit Cavex Bite&White ExSense sürünüz. Kalıbı yerine sokunuz ve jelin dişlerden yayılmasını sağlamak üzere kalıbı sola sağa çeviriniz. Kalıbı yavaşça sürünüz ve jeli 10 dakikalık bir süre yerinde bırakınız. Kalıbı kaldırınız, fazladan jeli tükürerek atınız ve ağızınızı suyla durulamayınız. Kalıbı soğuk suyla durulayınız.

3. Kullanımdan hemen sonra tüpün ağızını kapakla kapatınız.
4. En iyi sonuçlar için uygulamadan sonra en az 30 dakika hiçbir şey yemeyiniz içmeyiniz.
5. Ürünü 10 gün boyunca her gün veya diş uzmanınızın verdiği talimatlara göre kullanınız.

UYARILAR & İLK YARDIM TALİMATI

Gözle temas edilmesinde halinde bul suyla durulayınız ve doktor yardımı isteyiniz. Maddeyi son kullanım tarihinden sonra kullanmayınız.

SAKLAMA TAVSİYESİ

Serin, kuru yerde (donma olmayan) ve doğrudan güneş ışığından korunmuş şekilde saklayınız.

**Cavex Holland BV tarafından imal edilmiştir**

Sözlü, yazılı veya denemelerle verdiğimiz teknik tavsiyeler güvenle ancak garanti verilmeyen yapılmıştır. ve bu aynı zamanda üçüncü kişilerin mal sahipliği haklarını da kapsar. Bu sizi belirtilen proseler ve kullanımlar için tarafımızdan sağlanan ürünleri test etmek zorunluluğundan uzaklaştırır. Ürünlerin uygulanması, kullanımı ve proseleri bizim kontrolümüzün ötesindedir ve bu yüzden tamamen sizin sorumluluğunuzdur. Bu sorumluluğa rağmen belirtilen herhangi bir zarar bizim tarafımızdan verilen ve sizin tarafınızdan kullanılan malların değerleriyle limitli olacaktır. Tabii ki, ürünümüzün uygun kalitesini Genel Satış ve Dağıtım Koşullarımızın içinde sağlayacağız.

CAVEX BITE&WHITE ABC MASTER KIT:
Σύστημα λεύκανσης στο σπίτι σε 3 βήματα

BHMA A = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:
CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενεργοποιητής λεύκανσης δοντιών & πάστα για την αφαίρεση κηλίδων. Αφαιρεί επιφανειακές κηλίδες και πλάκα από τα δόντια. Ενισχύει τις θεραπευτικές λεύκανσης με τη βελτιστοποίηση του pH στο στόμα.

- Ελαφρά λευκαντικό για αδαντινή / οδοντίνη.
- Υψηλές τιμές καθαρισμού και στίλβωσης.
- Αυξάνει το pH του στόματος ως προθεραπεία για λεύκανση δοντιών.
- Δεν προορίζεται για τακτική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σωληνάριο 35ml – 50g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Νερό, σορβιτόλη, ένυδρο οξείδιο πυριτίου, γλυκερίνη, Ερυθριτόλη, λίθιο μαγνήσιο πυριτικό νάτριο, πολυζαμερές 124, εξαμεταφωσφορικό νάτριο, κόμμι κυταρίνης, κόμμι ξανθάνης, φαινοξυαιθανόλη, Cl 42090, εκχύλισμα μίνης argvensis, l-λιμονένιο, σαχαρινικό νάτριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 25 °C (77 °F). Να φυλάσσεται σε σκοτεινό, ξηρό μέρος (χωρίς παγετό). Να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.

BHMA B = ΛΕΥΚΑΝΣΗ: CAVEX BITE&WHITE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το υπεροξειδίο υδρογόνου είναι ο λευκαντικός παράγοντας στο Cavex Bite&White. Έχει προστεθεί ως υπεροξειδίο καρβαμιδίου για την επίτευξη ενός επαρκώς σταθερού προϊόντος. Το υπεροξειδίο του καρβαμιδίου διασπάται γρήγορα σε ρίζες οξυγόνου και νερό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λεύκανσης, οι ελεύθερες ρίζες προσβάλλουν τις διττανθρακικές ενώσεις, στις οποίες οφείλονται οι περισσότεροι αποχρωματισμοί (πλάκες) των δοντιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3 Σύριγγες Cavex Bite&White 3 mL

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

- 16 % Υπεροξειδίο του καρβαμιδίου – ισόδυναμο με 6 % υπεροξειδίο του υδρογόνου
- 0.1 % Απευαισθητοποιητής φθοριούχου νατρίου

ΣΥΝΘΕΣΗ

Γλυκερίνη, νερό, υπεροξειδίο της ουρίας, πολυακρυλικό οξύ, υδροξειδίο του καλίου, νιτρικό κάλιο, φθοριούχο νάτριο, EDTA, εκχύλισμα μίνης argvensis.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Περιέχει υπεροξειδίο του υδρογόνου.
- Περιέχει φθοριούχο νάτριο.
- Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια. Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια, αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Αποφύγετε την έκθεση σε γνωστά ευαίσθητα δόντια.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ φοράτε το δισκίο.
- Επιβαρύνει σε περίπτωση κατάποσης. Υπεροξειδίο του υδρογόνου < 6%; Να μη χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 18 ετών. Να πωλείται μόνο σε οδοντιάτρους. Για κάθε κύκλο χρήσης, η πρώτη χρήση γίνεται μόνο από οδοντίατρος ή υπό την άμεση εποπτεία τους, εάν διασφαλίζεται ισόδυναμο επίπεδο προστασίας. Στη συνέχεια παρέχεται στον καταναλωτή για την ολοκλήρωση του κύκλου χρήσης.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Cavex Bite&White είναι ένα λευκαντικό τζελ δοντιών που χρησιμοποιείται για να φωτίσει το χρώμα των φυσικών δοντιών. Το Cavex Bite&White πρέπει να χορηγείται μόνο με εντολή ειδικού. Πριν από κάθε διαδικασία λεύκανσης, συνιστάται να συμβουλευέστε έναν οδοντίατρο, προς αποφυγή στοματικών προβλημάτων ή προβλημάτων υγείας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συνιστάται να συμβουλευόμαστε γιατρό οι παρακάτω κατηγορίες:
- Έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες
- Άτομα που υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε θεραπεία για σοβαρή ασθένεια
- Παιδιά κάτω των 18 ετών

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Καταγράψτε το αρχικό χρώμα, ελέγξτε την τρέχουσα οδοντική υγεία και βεβαιώστε ότι ο ασθενής έχει ρεαλιστικές προσδοκίες για τα τελικά αποτελέσματα.
- Οι πρόχειρες ή προσωρινές αποκαταστάσεις μπορεί να αποχρωματιστούν κατά τη διαδικασία λεύκανσης, ενώ τα σύνθετα ή πολυανθρακικά υλικά θα παραμείνουν ανεπηρέαστα. Επομένως, οι ασθενείς με σύνθετες αποκαταστάσεις θα πρέπει να ενημερώνονται ότι τα υπάρχοντα σύνθετα μπορεί να χρωματιστούν ανεπιθύτητα, δεδομένου ότι μόνο τα φυσικά δόντια θα λευκάνουν.
- Για ασθενείς που χρειάζονται αισθητικές ή αυτοκόλλητες αποκαταστάσεις, περιμένετε 2 εβδομάδες μετά την τελευταία θεραπεία λεύκανσης που επιτρέπει το χρώμα να σταθεροποιηθεί. Όλες οι αποκαταστάσεις πρέπει να είναι άθικτες ή καλά σφραγισμένες με κατάλληλα προσωρινά υλικά.
- Θα πρέπει να συνιστάται η χρήση μιας οδοντόκρεμας για την ανακούφιση της ευαισθησίας από 2 εβδομάδες πριν την θεραπεία μέχρι 2 εβδομάδες μετά την θεραπεία.
- Οι ασθενείς θα πρέπει πάντα να προειδοποιούνται για την ευαισθησία των δοντιών ή τον ερεθισμό των ούλων κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι περιοχές των ούλων που έρχονται σε επαφή μπορεί να κοκκινίσουν ή να ασπρίσουν αλλά θα επανέλθουν στο κανονικό τους χρώμα μετά από κάποιες ημέρες.
- Για να αποφύγετε τον ερεθισμό των μαλακών

ιστών, συμβουλευτείτε τον ασθενή να αποφεύγει να υπερχειλίσει τα δισκία, να σκουπίζει κάθε περιττή ποσότητα τζελ από τη γραμμή των ούλων και να ξεπλύνει καλά το στόμα μετά τη θεραπεία.

- Μετά από κάθε θεραπεία, βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής αντικαθιστά το καπάκι της σύριγγας.
- Ο ασθενής δεν πρέπει να τρώει, να πίνει ή να καπνίζει καπνό για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά από κάθε θεραπεία.
- Δώστε οδηγίες στον ασθενή να σταματήσει τη θεραπεία και να επικοινωνήσει αμέσως μαζί σας εάν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα.
- Η τελική απόκρωση θα επιτευχθεί περίπου 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Μετά τη θεραπεία θα πρέπει να κανονιστεί ένα ραντεβού παρακολούθησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

- Εάν καταπιείτε μια μεγάλη ποσότητα (περισσότερο από 25% του τζελ στη σύριγγα), πείτε αμέσως νερό, μην προσπαθήσετε να κάνετε εμετό και συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
- Εάν πείε τζελ στα μάτια, κρατήστε ανοιχτά τα βλέφαρα και ξεπλύνετε το μάτι με τρεχούμενο νερό χωρίς διακοπή επί 15 τουλάχιστον λεπτά, και ελάτε σε επαφή με ένα γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με ρούχα, επιδερμίδα ή μαλλιά, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και ξεπλύνετε την επιδερμίδα ή τα μαλλιά με τρεχούμενο νερό.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αρνητικές παρενέργειες που εμφανίζονται με τη χρήση του Cavex Bite&White είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες, όχι όμως αποκλειστικά:

Ευαισθησία

Ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να έχουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας αυξημένη ευαισθησία των δοντιών στο κρύο, ενώ άλλοι ενδέχεται να έχουν απροσδιόριστη ευαισθησία στα δόντια, τα ούλα, τη γλώσσα, τα χείλη ή το λαιμό τους. Κατά γενικό κανόνα, τα συμπτώματα θα εξαφανισθούν μέσα σε μερικές μέρες αφού διακοφτεί η θεραπεία. Η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί με συντομότερες, λιγότερο συχνές εφαρμογές ώσπου να επιτευχθεί το επιθυμητό λευκαντικό αποτέλεσμα. Εάν η ενόχληση επιμένει, τερματίστε τη θεραπεία.

Ερεθισμός των ούλων

Διακρίνα που εκτείνονται πάνω στα ούλα μπορούν να προκαλέσουν ήπιο μέχρι σοβαρό ερεθισμό του μαλακού ιστού. Εάν τα δισκία εφαρμόζονται καλά, ελέγξτε αν ο ασθενής χρησιμοποιεί τη σωστή ποσότητα με το σωστό τρόπο. Ο ασθενής ενδέχεται να πρέπει να μειώσει την ποσότητα τζελ στα δισκία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

- Να αποθηκεύεται σε ψυγείο (<8°C).
- Να φυλάσσεται σε σκοτεινό, ξηρό μέρος.
- Να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Να απομακρύνετε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα σκουπίδια.

BHMA Γ = ΧΡΗΣΗ ΚΟΝΤΙΣΙΟΝΕΡ:
CAVEX BITE&WHITE EXSENSE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Cavex Bite&White ExSense είναι ένα τζελ υδατικής βάσης με άρωμα μέντας, το οποίο περιέχει υδροξυαπατίνη και νιτρικό κάλιο. Το Cavex Bite&White ExSense περιορίζει την ευαισθησία και αυξάνει τη λευκότητα των δοντιών χάρη στην αναμετάλλωση του υδροξυαπατίνης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάριο 42 ml – 50 g (αρκετό για περίπου 20 θεραπείες)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ CAVEX BITE&WHITE EXSENSE:

Υδροξυαπατίνης 2%

ΣΥΝΘΕΣΗ

Νερό, σορβιτόλη, γλυκερίνη, ερυθριτόλη, λίθιο μαγνήσιο πυριτικό νάτριο, υδροξυαπατίνης, Νιτρικό κάλιο, φαινοξυαιθανόλη, κόμμι ξανθάνης, πυροφωσφορικό άλας νατρίου, τρυλικό οξύ, έλαιο μέντας spricata, σαχαρινικό νάτριο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ύστερα από λεύκανση δοντιών στο γραφείο και/ή στο σπίτι
- Ύστερα από επαγγελματικό καθαρισμό δοντιών
- Πρόληψη και περιορισμός ευαισθησίας

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μη χρησιμοποιείτε το Cavex Bite&White ExSense σε περιπτώσεις αλλεργίας στο άρωμα μέντας ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

1. Προτοιμάστε και καθαρίστε τα δόντια χρησιμοποιώντας οδοντόβουρτσα και οδοντικό νήμα.
2. Εφαρμογή:

Χωρίς δισκίο: Πλύντε τα χέρια σας πολύ καλά με σαπούνι και νερό. Βάλτε μια μικρή ποσότητα Cavex Bite&White ExSense σε ένα καθαρό δόχτυλο. Βάλτε απαλά το τζελ σε όλες τις επιφάνειες της επάνω και της κάτω οδοντοστοιχίας. Αφήστε το τζελ στα δόντια επί 10 λεπτά. Φτύστε όσο τζελ ενδοχόμενες περισσεύει και μη ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό.

Με δισκίο: Βάλτε μια γραμμή Cavex Bite&White ExSense από τη μια ως την άλλη άκρη του δισκαρίου. Εισαγάγετε το δισκίο και γυρίστε το ήρεμα αριστερά και δεξιά ώστε να μοιραστεί καλά το τζελ στα δόντια. Δαγκώστε απαλά το δισκίο και αφήστε το τζελ να ενεργήσει επί 10 λεπτά. Βγάλτε το δισκίο, φτύστε όσο τζελ ενδοχόμενες περισσεύει και μη ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό. Ξεπλύνετε το δισκίο με κρύο νερό.

3. Να κλείνετε πάντα το σωληνάριο με το καπάκι αμέσως μετά τη χρήση.
4. Για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, μη πίνετε και μη τρώτε επί 30 λεπτά τουλάχιστον μετά την εφαρμογή.
5. Χρησιμοποιήστε το προϊόν καθημερινά επί 10 ημερες, ή ακολουθήστε τις οδηγίες του οδοντιάτρου σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε πολύ καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μη χρησιμοποιείτε το υλικό μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διατηρείται σε μέρος κρύο, στεγνό (χωρίς πάγο) και προστατευμένο από απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.



Κατασκευάζεται από την Cavex Holland BV

Οι τεχνικές μας συμβουλές, είτε προφορικές, γραπτές είτε μέσω δοκιμών, παρέχονται καλή τη πίστη χωρίς υσώστος εγγύηση, και αυτό ισχύει επίσης για τα αποκλειστικά δικαιώματα τρίτων. Δεν αναρούν την υποχρέωση σας για δοκιμή των προϊόντων τα οποία προμηθεύεστε από εμάς, σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα τους για τις διαδικασίες και χρήσεις για τις οποίες προορίζονται. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων είναι πέραν της δικής μας δικαιοδοσίας, και κατά συνέπεια αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Εάν παρόλη την ευθύνη αυτή διαπιστωθεί υπαίτιότητα για τυχόν βλάβη, αυτή περιορίζεται μέχρι ποσού ίσου με την αξία των προϊόντων τα οποία προμηθευτήκατε από εμάς, και τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε. Φυσικά προσφέρουμε σταθερή ποιότητα προϊόντων στα πλαίσια των δικών μας Γενικών Όρων Πωλήσεων και Παράδοσης.

CAVEX VITE&WHITE НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ABC:
3-х ступенчатая система для отбеливания зубов в домашних условиях

ШАГ А = АКТИВАЦИЯ:
CAVEX VITE&WHITE STAINLESS

ОПИСАНИЕ

Паста активатор для отбеливателя зубов и удаления пятен. Для удаления поверхностных пятен и налета с зубов. Усиливает отбеливание благодаря повышению кислотности в полости рта.

- Мягкое абразивное воздействие на эмаль и дентин.
- Высокое очищающее и полирующее воздействие.
- Повышает кислотность в полости рта с целью подготовки к отбеливанию.
- Частое использование не рекомендуется.

УПАКОВКА

Тюбик 35мл – 50г

ИНГРЕДИЕНТЫ

Вода, сорбит, гидратированный кремний, глицерин, эритритол, силикат лития-магния-натрия, полиоксамер 124, гексаметафосфат натрия, целлюлозная камедь, ксантановая камедь, феноксиэтанол, CI 42090, экстракт мяты обыкновенной, l-лимонин, сахарин натрия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Храните в недоступном для детей месте. Срок годности после вскрытия ограничен.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

Не храните при температуре выше 25 °C (77 °F). Храните в темном, сухом месте (защищенном от замерзания). Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не используйте материал по истечении срока годности.

ШАГ В = ОТБЕЛИВАНИЕ:
CAVEX VITE&WHITE

ОПИСАНИЕ

В качестве отбеливающего средства Cavex Bite&White входит перекись водорода в форме перекиси карбамида с целью стабилизации продукта. Перекись карбамида быстро растворяется в кислородсодержащих радикалах и воде. В процессе отбеливания свободные радикалы атакуют двойные углерод-углеродные связи; именно эти соединения являются причиной изменения цвета зубной эмали.

УПАКОВКА

3 шприца Cavex Bite&White 3 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

- 16 % перекиси карбамида, что эквивалентно 6 % перекиси водорода
- 0,1 % десенсибилизатора фторида натрия

СОСТАВ

Глицерин, вода, перекись мочевины, полиакриловая кислота, гидроксид калия, нитрат калия, фторид натрия, ЭДТА, экстракт мяты обыкновенной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Содержит перекись водорода.
- Содержит фторид натрия.
- Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промойте их.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Избегайте воздействия на чувствительные зубы.
- Не ешьте, не пейте и не курите во время процедур.
- Вреден при проглатывании.
- Перекись водорода < 6%; не предназначена для использования лицами младше 18 лет.
- Продается только практикующим стоматологам. При каждом цикле применения первая процедура должна проводиться только практикующими стоматологами или под их непосредственным наблюдением при условии обеспечения соответствующего уровня безопасности. После этого средство будет предоставлено потребителю для завершения цикла использования.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Cavex Bite&White - это гель для отбеливания зубов, осветляющий цвет природной эмали. Cavex Bite&White предоставляется только по рекомендации зубного врача. Во избежание нанесения вреда полости рта или ущерба здоровью, рекомендуется перед каждым применением консультироваться у компетентного зубного врача.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Предварительная консультация с врачом требуется для следующей категории лиц:
 - беременные и кормящие женщины;
 - лица, состоящие на лечении в связи с серьезным заболеванием;
 - дети до 18-и лет.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

- Запишите начальный оттенок, проанализируйте текущее состояние зубов и убедитесь, что у пациента реалистичные ожидания относительно конечных результатов.
- В процессе отбеливания цвет временных реставраций может измениться, в то время как композитные материалы или поликарбонат остаются неизменными. Поэтому пациенты с композитными реставрациями должны быть проинформированы о том, что существующие композитные протезы могут потребовать замены, поскольку отбеливаются только натуральные зубы.
- Пациентам, которым требуется эстетическая или адгезивная реставрация, следует подождать 2 недели после последней

процедуры отбеливания, чтобы цвет стабилизировался. Все реставрации должны быть неповрежденными или хорошо запечатанными на время с помощью соответствующих материалов.

- Рекомендуется использовать зубную пасту для снижения чувствительности за 2 недели до процедуры и в течение 2 недель после ее окончания.
- Пациентов следует всегда предупреждать о повышенной чувствительности зубов или раздражении десен во время процедур. Соприкасающиеся участки десен могут покраснеть или побелеть, но через несколько дней они вернутся к своему обычному цвету.
- С целью избежания раздражения мягких тканей, посоветуйте пациенту избежать переполнения ванночек, вытирать излишки геля с линии десен, а также тщательно полоскать рот после процедуры.
- После каждой процедуры обязательно надевайте колпачок на шприц.
- Пациент не должен есть, пить или курить табак в течение как минимум 30 минут после каждой процедуры.
- В случае возникновения каких-либо проблем пациент должен прекратить лечение и немедленно связаться с вами.
- Окончательный оттенок будет достигнут примерно через 2 недели после начала лечения. После окончания лечения следует записаться на повторный прием.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При попадании вовнутрь большого количества геля (более 25% геля, содержащегося в шприце): сразу выпить обильное количество воды, не вызывать рвоты и проконсультироваться с врачом.
- При попадании геля в глаза: широко открыть веки, прополоскать глаз, непрерывно, в течение 15 минут и обратиться к врачу.
- При попадании на одежду, кожу или волосы: снять одежду, на которую попало средство, и прополоскать кожу или волосы обильным количеством воды.

ВОЗМОЖНЫЕ ВРЕДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Вредные последствия, возможные связанные с использованием геля Cavex Bite&White, могут в числе прочего включать:

ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ

Некоторые пациенты в процессе процедур могут испытывать повышенную чувствительность зубов к холоду; другие могут испытывать неспецифическую повышенную чувствительность зубов, десен, губ или горла. Как правило, данные симптомы исчезают через несколько дней после прекращения процедур. В таком случае применение средства может быть продолжено в виде укороченных сеансов при увеличении промежутков между ними, до достижения желаемого отбеливающего эффекта. Если неприятные ощущения при этом

не прекращаются, то процедуры требуется прекратить.

РАЗДРАЖЕНИЕ ДЕСЕН

Капы для отбеливания, соприкасающиеся с деснами, могут вызвать среднюю, или даже серьезную форму раздражения тканей. Если капы для отбеливания пригнаны хорошо, проверьте, правильно ли пациент использовал указанное количество геля. Возможно, потребуется уменьшить количество геля, наносимое на капы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

- Хранить в холодильнике (<8°C).
- Хранить в темном сухом месте.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Не использовать материал по истечении срока годности.



УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте продукт с учетом местных предписаний по утилизации отходов.

ШАГ С = ЗАВЕРШЕНИЕ:
CAVEX VITE&WHITE EXSENSE

ОПИСАНИЕ

Cavex Bite&White ExSense - средство в виде геля на водной основе со вкусом мяты, содержащее гидроксиапатит и нитрат калия. Cavex Bite&White ExSense снижает чувствительность и делает цвет зубов белее, благодаря тому, что гидроксипатит способствует реминерализации эмали.

УПАКОВКА

Тюбик 42 мл – 50 грамм (для приблизительно 20 процедур)

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ СРЕДСТВА CAVEX VITE&WHITE EXSENSE:

гидроксиапатит 2%

СОСТАВ

Вода, сорбит, глицерин, эритрит, силикат лития-магния-натрия, гидроксиапатит, нитрат калия, феноксиэтанол, ксантановая камедь, тетрагидрированный пирофосфат, винная кислота, масло мяты перечной, сахарин натрия.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- После отбеливания зубов в стоматологическом кабинете и (или) в домашних условиях
- После профессиональной очистки зубов
- Предотвращает и смягчает чувствительность

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется применять Cavex Bite&White ExSense при аллергии к мяте или другим компонентам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Подготовить зубы, почистив их щеткой и очистив пространство между зубами зубной нитью.

2. Применение:

БЕЗ КАПЫ: Тщательно помойте руки водой и мылом. Нанесите небольшое количество Cavex Bite&White ExSense на чистый палец. Постепенно распределите гель по всем поверхностям верхних и нижних зубов. Оставьте на 5-10 минут для воздействия. При необходимости, выплюнуть избыток геля и прополоскать полость рта водой.

С КАПОЙ: Выдавите полосочку Cavex Bite&White ExSense, покрыв им поверхность капы. Нанесите капю и медленно подвигайте ее влево и вправо, чтобы тщательно распределить гель по поверхностям зубов. Медленно прикусите капю и оставьте ее на 5-10 минут для воздействия. Снять капю, при необходимости, выплюнуть избыток геля и прополоскать полость рта водой. Промыть капю для отбеливания холодной водой.

3. Всегда после использования сразу закрывайте тюбик колпачком.
4. Для оптимального результата: не пить и не принимать пищи, по крайней мере, в течение 30 минут после процедуры.
5. Используйте продукт ежедневно в течение 10 дней или следуйте рекомендациям вашего консультанта-дантиста.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При контакте с глазами: тщательно прополоскать обильным количеством воды и обратиться к врачу. Не используйте продукт после истечения срока годности.

МЕТОД ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, сухом месте (при плюсовой температуре), защищенном от попадания прямых солнечных лучей.



ПРОИЗВОДСТВО ФИРМЫ CAVEX HOLLAND BV
Наши рекомендации, устные или письменные, или практические выданы честно, но без гарантий, и применимы в случаях, когда затронуты права собственности третьих сторон. Вы не освобождаетесь от обязательства проверять поставляемую нами продукцию как на пригодность для предназначенных случаев, так и пригодность к использованию. Использование продуктов-вне нашего контроля и поэтому вся ответственность ложится на вас. В случае какого-либо ущерба возмещение ограничивается стоимостью товара поставляемого нами и использованного вами. Мы гарантируем качество нашего товара в соответствии с Общими Условиями Продаж и Поставок.

Cavex Bite&WhiteABC-Masterkit
 كافيكس بايت أند وايت إيه بي سي – الصندوق الأساسي:
 نظام تبيض الأسنان في المنزل في ثلاثة خطوات

الخطوة ١ = التفعيل: StainLessCavexBite&White
 كافيكس بايت أند وايت ستيليس

الوصف

منشط ومعجون تبيض اسنان لإزالة البقع. ينزل البقع السطحية والطبقة الجيرية من الأسنان. يعمل على تقوية علاج التبييض بواسطة زيادة نسبة القوة الهيدروجينية.
 • كشط خفيف لمينا/عاج الأسنان.
 • درجة عالية من التنظيف والتلميع.
 • يزيد من نسبة القوة الهيدروجينية في الفم كمعالجة تمهيدية لعملية تبيض الأسنان.
 • غير مخصص للإستخدام المنتظم.

التعبئة

أنبوب 0٢ مل - ٠٥ جم

المكونات

ماء، السوربيتول، السيليكا المائية، الجليسرين، إريثريتول، سيليكات الصوديوم والمغنيسيوم، بولوكسامر ٤٢١، سداسي فوسفات الصوديوم، صمغ السيليلول، صمغ الزانتان، الفينوكسي إيثانول، ٠.٠٩٢٤C. خلاصة النعناع الحثلي، ل-ليمونين، سكارين الصوديوم.

التحذيرات

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
 فترة صلاحية محدودة بعد الفتح.



نصائح التخزين

لا يتم تخزينه في درجات حرارة أعلى من 0٢ درجة مئوية (٧٧ درجة فهرنهايت). قم بتخزينه في مكان مظلم وجاف (خالي من الصقيع).
 تجنب تعرضه لأشعة الشمس المباشرة. لا تستخدم المادة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

الخطوة ب: التبييض: CavexBite&Whiteكافيكس بايت أند وايت

الوصف

يعمل بيروكسيدالهيدروجينكمعامل تبيض في CavexBite&Whiteكافيكس بايت أند وايت. ويتم اضافته في شكل بيروكسيدالكاراميد لضمان ثبات المنتج بالقدر الكافي. و يذوب بيروكسيدكاراميدسريعافعاليجذور الحرة للأكسجين
 والماء.وإنشاءعمليةالتبييضتقومالجذورالحرهبعهاكمركب اتالكربونذاتالرابطةالمزدوجة،والتي عادة ما تكونالمصدر الأساسيلبغبرلوانسنان.

التعبئة

٢ حقن ٣ مل من CavexBite&Whiteكافيكسبايتأندوايت

المواد النشطة في Cavex BITE&WHITEكافيكس بايت أند وايت

- ٦١/بيروكسيدالكاراميد - أي ما يعادل ٦٪ من

المكونات النشطة في etihW & etib XEVAC
 - أكسيد الكراميد ٦١/- أي ما يعادل ٦٪ من بيروكسيد الهيدروجين
 - ١,٠ ٪ من مادة فلوريد الصوديوم المزيل للحساسية

التكوين

جليسرين، ماء، بيروكسيد البوريا، حمض البولي أكرليك، هيدروكسيد البوتاسيوم، تترات البوتاسيوم، فلوريد الصوديوم، ثنائي أمين الإيثيلين رباعي حمض الأستيك ATDE، خلاصة النعناع الحثلي.

التحذيرات

- يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين.
 - يحتوي على فلوريد الصوديوم.
 - تجنب ملامسة العينين. اشطف العينين على الفور في حالة ملامستهما للمنتج.
 - يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
 - تجنب تعريض الأسنان المعروف بأنها حساسة.
 - لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء ارتداء الصينية.
 - ضار عند بلعه.



لا يجوز استخدام بيروكسيد الهيدروجين > ٦٪ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ٨١ عاماً. يجب أن يتم بعه فقط لأطباء الأسنان. بالنسبة لكل دورة استخدام، يجب أن يتم الإستخدام الأول فقط بواسطة أطباء الأسنان أو تحت إشرافهم المباشر.
 إذا تم ضمان مستوى مكافئ من الأمان. بعد ذلك يتم توفيره للمستهلك لاستكمال دورة الاستخدام.

تعليمات الإستعمال

كافيكس بايت أند وايت هو جل لتبييض الأسنان. حيث يعمل على تبيض لون الأسنان الطبيعية. ولا يجوز صرف كافيكس بايت أند وايت إلا بروضة طيبة من طبيب الأسنان. وينصح باستشارة طبيب الأسنان قبل بدء أي علاج للتبييض وذلك لتجنب أي مشاكل صحية أو مشاكل في الفم.

موانع الإستعمال

ينصح باستشارة الطبيب في الحالات التالية:
 - النساء الحوامل والمرضعات؛
 - الأشخاص الخاضعون للعلاج من مرض خطير؛
 - الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨١ عاماً.

الإجراءات العلاجية

- قم بتسجيل لون الأسنان، و قم بمراجعة صحة الأسنان الحالية وتأكد من أن لدى المريض توقعات واقعية فيما يتعلق بالنتائج النهائية.
 - قد يتغير لون الترميمات المؤقتة للأسنان أثناء عملية التبييض، في حين لن تتأثر مادة الكمبوزيت (الحشوات الضوئية) أو البولي كرونان. ولذلك يجب إخطار المرضى الذين لديهم ترميمات من الكمبوزيت (الحشوات الضوئية)، أنه قد يكون من الضروري استبدال الكمبوزيت، لأن الأسنان الطبيعية فقط هي التي سيتم تبيضها.
 - يجب الإنتظار في حالة المرضى الذين يحتاجون لترميمات تجميل أو ترميمات لاصقة لمدة أسبوعين بعد آخر علاج تبيض وذلك حتى يتمكن اللون من الثبات. ويجب أن تكون كافة الترميمات سليمة أو مغطاه بإحكام بواسطة المواد المؤقتة الصحية.

- يجب النصح باستخدام معجون الأسنان الخاص بالأسنان الحساسة لمدة أسبوعين قبل بدء برنامج العلاج ولمدة أسبوعين بعد توقف العلاج.
 - يجب تحذير المريض دائما من احتمالية حدوث حساسية في الأسنان أو تهيج للثة أثناء فترة العلاج. قد يتغير لون مناطق اللثة التي تلامس المادة إلى اللون الأحمر أو الأبيض، إلا أنها ستعود إلى لونها الطبيعي بعد بضعة أيام.
 - لتجنب تهيج الأنسجة اللينة، ينبغي أن تتصح المريض بالأا يفرط في ملء صينية التبييض، وأن يقوم بإزالة الكمية الزائدة من الجيل من على خط اللثة وأن يقوم بشطف الفم جيدا بعد العلاج.
 - تأكد من أن يقوم المريض بوضع الغطاء مره أخرى على الحقنة بعد كل علاج.
 - لا يسمح للمريض بتناول الأطعمة أو المشروبات أو التدخين لمدة ٢٠٣ ساعة بعد كل علاج.
 - يجب لفت انتباه المريض بأن عليه وقف العلاج والإنصال بك على الفور في حالة ظهور أي مشكلة.
 - سيطهر اللون النهائي بعد أسبوعين تقريباً من بدء العلاج. - يجب تحديد موعد للمتابعة بعد العلاج. وينبغي بعد العلاج عقد موعد للاستشارة والمتابعة.

تعليمات الإسعافات الأولية

- في حالة ابتلاع كمية كبيرة من الجل (أكثر من ٥٢٪ من كمية الجل الموجود في الحقنة): اشرب ماء على الفور، لا تجبر نفسك على التقيؤ و قم باستشارة الطبيب.
 - إذا دخل الجل في العين: ارفع الجفن لتفح العين، واشطف العين بالماء بدون توقف لمدة ٥١ دقيقة متواصلة على الأقل و قم باستشارة الطبيب.
 - في حالة ملامسة الجلد أوالشعر أو الملابس: اقلع الملابس التي تلوث واشطف الجلد أو الشعر بماء الصنبور الجاري.

الآثار الجانبية الصارة المحتملة

تشمل الآثار الجانبية الناتجة عن استخدام كافيكس بايت أند وايت على الأمور التالي ذكرها، مع التويه بأنها ليست قاصرة على تلك النقاط فقط:

حساسية الأسنان

قد يشعر بعض المرضى أثناء فترة العلاج بزيادة حساسية الأسنان للبرودة، كما قد يعاني البعض الآخر من حساسية غير محددة في الأسنان، أو اللثة، أو اللسان، أو الشفتين أو الحلق. وبصفة عامة، يجب أن تخففي هذه الأعراض بعد انتهاء العلاج ببضعة أيام . ويجوز الاستمرار في العلاج باستخدام تطبيقات أقصر و لمرات أقل إلى أن يتم الوصول للدرجة التبييض المنشودة. وفي حالة استمرار الشكوى يجب وقف العلاج.

تهيج اللثة

قد تسبب صوتاي التبييض التي تمتد حتى اللثة تهيجاً قد يكون معتدل إلى شديد للأنسجة اللينة. إذا كان مفاص صوتاي التبييض ملائما، تأكد من أن المريض يستخدم الكمية الصحيحة وبالطريقة الصحيحة. قد يكون على المريض تقليل كمية الجل في صوتاي التبييض.

نصائح التخزين

- يتم تخزينه في البراد (٨< درجة مئوية)
 - يتم تخزينه في مكان مظلم وجاف
 - تجنب تعرضه لأشعة الشمس المباشرة.

- لا تستخدم المادة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية



نصيحة الحفظ

التخلص من المنتج تخلص من المنتج طبقا للوائح والقواعد المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات.

الخطوة ج: التظيف: ExSenseCavex BITE&WHITE
 كافيكس بايت أند وايتاكسس

الوصف

ExSenseCavex BITE&WHITEكافيكس بايت أند وايتاكسس هو جل على أساس ماني براحة النعناع ويحتوي على هيدروكسيأباتيت و تترات البوتاسيوم. يحد وايتاكسسمن الحساسية و يساعد على زيادة تبيض الأسنان بواسطة الهيدروكسيأباتيت وعودة التمعدن.

التعبئة

أنبوب ٢٤ مل - ٠٥ جم (كافية للإستخدام حوالي ٠٢ مره للعلاج)

المكونات الأساسية لـ ExSenseCavex BITE&WHITE
 كافيكس بايت أند وايتاكسس
 هيدروكسيأباتيت ٢٪

التركيب

ماء، سوربيتول، جليسرين، الإريثريتول، سيليكات الصوديوم و المغنيسيوم و الثيوم، هيدروكسيل أباتيت، تترات البوتاسيوم، الفينوكسي إيثانول، صمغ الزانتان، بيروفوسفات الصوديوم، حمض الطرطريك، زيت النعناع المدب، سكارين الصوديوم.

تعليمات الإستعمال

- بعد تبيض الأسنان سواء في المكتب و/أو المنزل
 - بعد عملية تنظيف مهنية للأسنان
 - يمنع الحساسية و يحد منها

موانع الإستعمال

لا تستخدم ExSenseCavex BITE&WHITEكافيكس بايت أند وايت اكسس في حالة وجود حساسية للنعناع أو إحدى المكونات الأخرى.

إجراءات الإستعمال

١. قم بتحصير و تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة و خيط الأسنان.
 ٢. الإستخدام:

بدون صينية تبيض: اغسل يدك جيدا بالماء و الصابون.

ضع كمية صغيرة من ExSenseCavex BITE&WHITE كافيكس بايت أند وايت اكسس على اصبع نظيف. قم بتوزيع الجل بلطف على جميع أسطح الأسنان العليا و السفلى. اترك الجل على الأسنان لمدة ٠١ دقائق. ابصق أي كمية زائدة منالجل من فمك و لا تشطف فمك بالماء.

صينية التبييض: ضع شريط صغير من ExSenseCavex BITE&WHITEكافيكس بايت أند وايت اكسس ليجطى

صينية التبييض بأكملها. ادخل صينية التبييض و قم بلفها في اتجاه اليسار واليمين، حتى يتم توزيع الجل جيدا على الأسنان. قم بلعص بيطة على صينية التبييض و اترك الجل يعمل لمدة تتراوح بين ٥ إلى ٠١ دقائق. اخرج صينية التبييض، ابصق أي جل زائد من فمك و لا تشطف فمك بالماء. اشطف الصينية بالماء البارد.

٣. اغلق دائما الأنبوب الغطاء بعد الاستعمال مباشرة.
 ٤. للحصول على أفضل النتائج، يرجى عدم تناول الطعام أو الشراب لمدة ٠٢ دقيقة على الأقل بعد استخدام الجل.
 ٥. استخدم المنتج كل يوم لمدة ٠١ أيام أو حسب تعليمات طبيب الأسنان الخاص بك.

التحذيرات و تعليمات الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة العين، قم بغسل العين بكمية كبيرة من الماء و مياستشارة طبيب. لا تستخدم المادة بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

نصيحة الحفظ

يحفظ في مكان بارد و جاف (لا يجمد) و لا يتعرض لضوء الشمس المباشر.



إنتاج كافيكس هولاند بي في

ونود الإشارة هنا إلى أن الرأي الفني الخاص بالشركة سواء كان شفهيًا أو خطيًا أو عن طريق التجارب هورأي دون الالتزام بأي ضمان تجاه أي فرد أو أفراد يتعاملون مع مثل هذه الأصناف ولا يمنع ذلك ان يقوم كل من تقوم بتزويده بهذه الأصناف بتجربتها أو إجراء أي تجارب عليها. وحيث ان هذه التجارب خارج نطاق سيطرتنا وإشرافنا فلاختبارات والتجارب هي مسؤولية هؤلاء الذين يتعاملون مع هذه الأصناف .
 ونحن وضمن مسؤوليتنا المحدودة تجاه هذه الأصناف وحسب ماجاء سابقاً على اتم الاستعداد لتعويض المستهلك بقيمة الأصناف فقط التي أسلمت و استخدمت من هؤلاء المتعاملون معها وتضمن بالتالي الجودة المستمرة لجميع أصنافنا ضمن ما جاء في البنود العامة للبيع والتوريد الخاصة بشركتنا .

-
🏢 Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands
+31 23 530 77 00
dental@cavex.nl
cavex.nl

ZB706.06

CAVEX