

TEMPSMART™ DC

Raka vägen till slutlig restauration

Dualhärdande komposit för temporära kronor och broar



TEMPSMART DC från GC

Starkt och snabbt. En briljant innovation!

Den temporära restaurationen spelar en viktig roll. Den skyddar den preparerade tanden och förstärker patientens upplevelse av god **passform och estetik** i väntan på den slutliga restaurationen. Med TEMPSMART DC introducerar GC ny teknik som gör de temporära materialen smartare. TEMPSMART DC är **det första dualhårdande temporära materialet som inte innehåller mjukgörande medel och som både underlättar tandläkarens arbete och gör det mer angenämt.**


Välj den SMARTA vägen

TEMPSMART DC kan **ljushärdas** vilket har flera fördelar: du har full kontroll på stelningen samtidigt som slutpolymerisationen optimeras. Det bidrar till en **enklare och effektivare** procedur som kan **spara mycket tid**. Ljushårdning förbättrar även den temporära restaurationens fysikaliska egenskaper, särskilt böjhallfastheten



Extraoral ljushårdning.


Procedurtid för TEMPSMART DC i jämförelse med konkurrerande produkter (min).

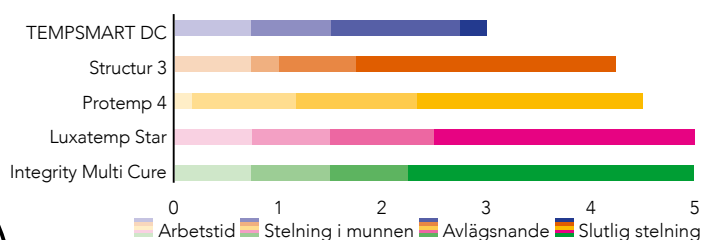

Välj den SÄKRA vägen

Långa polymerkedjor bildar **ett nätverk av polymerer med hög densitet** vilket resulterar i en ovanligt **hög brottseghet**. Det gör materialet lämpligt för långsiktig temporär användning och för längre broar.

Brottseghet i jämförelse med konkurrerande produkter (MPa·m^{1/2})

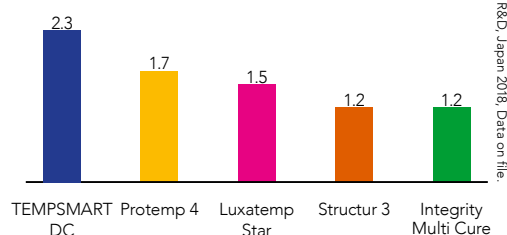

Välj den ENKLA vägen

TEMPSMART DC tillhandahålls i **1:1-system** och innehåller inte mjukgörande medel. Det ger utmärkta polymeriseringsegenskaper med hårda och **släta ytor som inte kladdar** nästan helt utan syreinhäberat skikt. Det gör att gingivan läker bättre och att plack enkelt kan avlägsnas.



Jämförelse mellan traditionell 10:1-patron med mjukmedel (vänster) och resultat med 1:1-patron med TEMPSMART DC utan mjukmedel (höger).

Hög brottseghet gör materialet idealiskt för posteriora broar

1. Ursprunglig situation.
2. TEMPSMART DC appliceras i avtrycket.
3. Avtrycket avlägsnas 2.00–2.30 minuter efter blandningsstart. Ljushärdning i 5 sekunder per yta efter att överskott avlägsnats.
4. Efter polering: brocementering med Freegenol eller Fuji TEMP LT.



Med tillstånd av dr C. Lampson, Tyskland

GLÄDS med din patient!

Tack vare den kladdfria ytan uppnås fantastiska resultat med polering i få steg

1. Ursprunglig situation.
2. Efter applicering av TEMPSMART DC och placering i munnen kan restorationen avlägsnas inom 2.30 minuter och ljushärdas.
3. Slutpolering av restorationen i få steg.
4. Slutlig temporär restoration med högglossig yta.



Med tillstånd av dr J. Tapia Guadix, Spanien

Välj den VACKRA vägen

TEMPSMART DC finns i **6 färger**, alla med **naturlig fluorescens**. Tack vare smart fillerteknik kan materialet **enkel** poleras till utmärkt **höggloss**.



Välj mellan höggloss med manuell polering eller karakterisering med hjälp av GC:s nanofillerförstärkta OPTIGLAZE-färger.



TEMPSMART DC från GC

Raka vägen till slutlig restauration

Välj den SMARTA vägen

Kort procedurtid tack vare ljushärdning.



Välj den SÄKRA vägen

Hög brottseghet ger temporära fyllningar som håller.

Välj den ENKLA vägen

Kladdfria restaurationer ger höglans i få steg.

Välj den VACKRA vägen

Fluorescens och bestående höglans gör patienten glad.



TEMPSMART DC, 48 ml-patron, 16 blandningsspetsar						
Art. nr.	10001473	10001474	10001475	10001476	10001477	10001478
Färg	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

TEMPSMART DC, 10 ml-patron, 10 blandningsspetsar				
Avenir	10001479	10001480	10001481	10001482
Färg	A1	A2	A3	B1

Relaterade produkter



Rebasering

Unifast III



Reparation

G-aenial Universal
Injectable



Karakterisering

OPTIGLAZE color



Temporär cementering

FREEGENOL Fuji TEMP LT



Kronborttagning

PLIERS

Freegenol, G-aenial Universal Injectable, OPTIGLAZE Color, FREEGENOL, Fuji Temp LT, UNIFAST Trad och PLIERS är varumärken som tillhör GC.
Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 och Structur 3 är varumärken som inte tillhör GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC NORDIC AB

c/o Lundin Revisionbyrå
Erik Dahlbergsgatan 11B
SE-411 26 Göteborg
Tel. +46.768.54.43.50
info.nordic@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/sv-SE>