

BRUKSANVISNING

4-hjulig aluminiumrollator med armbågsstöd


Produktkod: LEXI



1. Egenskaper

4-hjulig rollator är gjord av pulverlackerad aluminiumram. Den är utrustad med bromsar med låsmekanism, säte, käpphållare och väska. Rollatorn har höjdjusterbara körhandtag, armbågsstöd och solida 8" hjul.

Setet innehåller: rollatorram med sits, två handtag med bromsar, fästknoppar, väska.

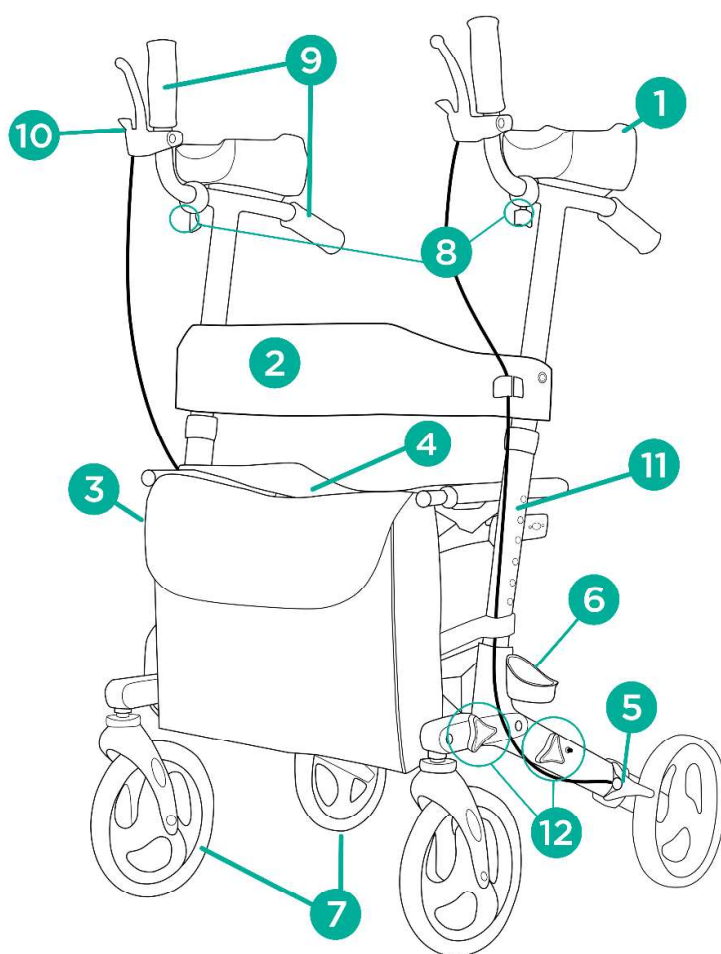

Delar av rollatorn:

1. Armbågsstöd
2. Ryggstöd
3. Väska
4. Plats
5. Broms
6. Käpphållare
7. Bakre och främre 8" hjul
8. Tryck på handtagets justeringsratt
9. Skjuthandtag
10. Bromshandtag med låsmekanism
11. Höjdjustering
12. Fixerande knoppar

2. Ansökan

Rollatorn är en hjälputrustning och är designad för patienter med nedsatt rörlighet som behöver stabilt stöd och hjälp under gång. Den är speciellt utformad för patienter som lider av reumatiska förändringar, begränsad rörlighet i radiokarpala och armbågsleder och för patienter med försvagad greppstyrka. Rollatorn rekommenderas även till äldre som ett hjälpmedel för att hålla balansen,

förbättra gångkomforten och säkerställa säkerheten mot fall. Användningen av rollatorn har en positiv effekt på återgången till aktivitet hos personer med förflyttning och lutning för att upprätthålla positionsproblem.

3. Montering

Vikning och utfällning

- 1) Börja med att fälla ut bottenramen på rollatorn.
- 2) Skruva loss fästvredet bredvid framhjulet och för hjulet långsamt nedåt. Dra åt fästvredet. Upprepa på andra sidan.
- 3) Skruva loss den andra fästknoppen och rikta in båda delarna av ramen horisontellt. Dra åt ratten efteråt.
- 4) Fäll ut rollatorn genom att trycka ner sätet tills du hör ett klickljud.
- 5) Fäst den övre ramen i den nedre ramen. Justera höjden med spärrstift. Se till att höjdjusteringen av båda handtagen är på samma nivå.
- 6) Fäst påsen framför rollatorn. För extra säkerhet för bromskablarna, fäst dem på kardborrbanden på ramen och ryggstödet.

Bromsfunktion

- För att stoppa rollatorn, dra bromshandtaget mot körhandtaget.
- Bromsarna är utrustade med en parkeringsspärrfunktion, aktiverad genom att dra i handbromsarna till maximalt läge. För att lossa låset, ta tag i bromshandtaget, klämma ihop det och dra i låselementet (sitter under bromshandtaget).

NOTERA! När du använder sätet, lås parkeringsbromsen.

Justering av körhandtag och armbågsstöd

- För att justera körhandtagets avstånd, skruva loss justeringsvredet som sitter under handtaget, välj lämpligt avstånd och dra sedan åt. Upprepa åtgärden på andra sidan. Ställ in båda handtagen på samma längd.
- För att justera höjden på armbågsstödet, tryck på spärrstiftet som finns på ramens utsida, välj lämplig höjd och lås stiftet. Ställ båda handtagen på samma höjd.

4. Tekniska data

Total bredd	62 cm
Totalt djup	66,5 cm
Sitsens mått	46 x 24 cm

Total höjd	112-124 cm
Mått efter vikning	74 x 30 x 60 cm
Höjdjustering av underarmsstöd	98-110 cm
Sitthöjd från marken	53,5 cm
Vikt	8,70 kg
Maximal kapacitet	136 kg
Ramfärg	svart

5. Anteckningar

Timago International Group tar inte ansvar för felaktig användning av rollatorn, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

6. Underhåll

Rengöring

- Rengör ramen med en fuktig trasa och torka ordentligt.
- Använd inte starka polermedel på grund av risken för skador på skyddande beläggningar.
- Rengör smutsen från rörliga delar av rollatorn regelbundet (gångjärn, klämskruvar, lås).

8. Förvarings och transportförhållanden

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

9. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

10. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	LOT -nummer		Tillverkning datum

	Serienummer		Medicinsk apparat
	Notera		Behaga läs instruktionen
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt från våra distributörer.

Läs mer på: **www.timago.com**.

Tack för att du valde Timago!