

1. Introduktion

Gratis och tack för att du har valt en Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning och viktig information om användningen av den medicinska produkten. Den är avsedd att hjälpa dig att använda produkten korrekt och säkert. Det är mycket viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsriktlinjerna och följ dem alltid. Mobilex försöker ständigt förbättra och uppdatera sina produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och tekniska data för produkten utan föregående meddelande.

Användning av anordningen

Denna produkt är en medicinteknisk produkt som har utformats för att öka rörligheten för personer som har svårt att stå eller gå. Rollatorn gör det möjligt för dessa personer att återfå förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Rollatorn är lämplig för personer som till följd av olika sjukdomar behöver stabilt gångstöd. Rollatorn ska endast användas som stöd för att stå och gå. All annan användning är förbjuden.

Indikationer

Rollatorn är en medicinsk utrustning som är utformad för att hjälpa personer med funktionsbegränsningar. Indikationerna för användning är sjukdomar som orsakar rörelsebegränsningar och funktionshinder som hindrar självständigt sittande, stående och gående. Det finns därför ett behov av ett extra stabilt stöd när man utför de aktiviteter som anges ovan. Indikationerna kan inte relateras till en specifik klinisk bild och de beror på en individuell bedömning av den potentiella användarens hälsotillstånd av en professionell läkare eller sjukgymnast, men de huvudsakliga målgrupperna för användarna är äldre personer, personer med pareser, reumatiska sjukdomar och andra personer med begränsad rörlighet i ländryggen, knäna eller höfterna. Det är förbjudet att använda produkten för andra ändamål än de som beskrivs ovan.

Kontraindikationer

Rollatorer är inte avsedda för personer som inte kan upprätthålla en korrekt kroppsbalans i stående ställning. Apparaten får inte användas om användaren har problem med perceptionen. Kontraindikationer kan inte relateras till en specifik klinisk bild och de beror på en individuell bedömning av den potentiella användarens hälsotillstånd. Valet av ortopediskt hjälpmedel som är lämpligt för en viss klinisk bild måste alltid göras med hjälp av en specialistläkare eller sjukgymnast. Observera dessutom säkerhetsinformationen i kapitel 2.

Användningsområden

Produkten kan användas inom hemvård, vård- och långtidsvård samt på sjukhus.

Medicinska incidenter och oönskade händelser

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om det inträffar några oönskade händelser i samband med enheten:

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Telefon: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 Email: info@mobilex.dk
---	--

2. Säkerhetskrav

- Se till att alla personer som använder apparaten har läst den här handboken.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador och/eller personskador som uppstår om man inte följer bruksanvisningarna.
- Använd endast produkten i ett felfri skick.
- Om defekter eller fel upptäcks måste du omedelbart sluta använda apparaten och kontakta återförsäljaren.
- Följ alla tillverkarens rekommendationer och varningar.
- Var uppmärksam på informationen på produktetiketten.
- Använd produkten endast för det beskrivna ändamålet.
- Klättra inte upp på apparaten.
- Undvik att göra konstruktiva ändringar på enheten, om du inte har tillverkarens skriftliga godkännande för sådana ändringar.
- Enheten och väskan får inte belastas med mer vikt än vad som anges i Tekniska data.
- Alla hjul MÅSTE vara i kontakt med golvet ALLTID under användning. Detta säkerställer att rollatorn är korrekt balanserad och bör förhindra olyckor.
- Var försiktig när du monterar eller justerar någon del av enheten.
- Kontrollera alltid att bromsarna fungerar korrekt före användning.
- Använd rollatorn endast när den har fällts ut helt och hållet och låsanordningen har aktiverats.
- Rollatorn ska endast användas inomhus på ett plant och stabilt underlag.
- Parkeringsbromsen måste alltid vara inkopplad när rollatorn inte används.

Leveransens omfattning

Apparaten levereras i en kartonglåda. Innehållet i paketet är:

- ✓ 1 Rollator;
- ✓ 1 Fack;
- ✓ 1 Bruksanvisning;

Preliminär kontroll

Kontrollera innehållet i lådan med listan ovan. Om du i detta skede upptäcker att en del saknas eller är skadad, kontakta omedelbart din leverantör.

3. Beskrivning

Produktbeskrivning

Rollatorn "Jaguar" har en pulverlackerad aluminiumram. Den erbjuder bra manövrerbarhet och stabilitet och har ett höj- och sänkbart handtag som passar användaren. Bromsarna kan användas när du går eller som parkeringsbromsar. Korgen gör att man inte behöver bära föremål för hand.

Rollatorn består av följande delar:

1. Tryck på handtaget
2. Bromshandtag
3. Klipp för justering av handtagets höjd
4. Låsknapp för fällbara handtag
5. Broms
6. Bakre 7" hjul
7. Clips för parkeringsbroms
8. Brickan
9. Ficka med dragkedja
10. Korg
11. Främre 7" vändbara hjul

Beskrivning av monteringen

Den här enheten behöver inga monteringsanvisningar.

Funktionsbeskrivning

Vikning/avvikning av ramen

För att fälla ut ramen drar du den bakre delen av ramen bakåt. Tryck försiktigt ner handtaget tills ramen fälls ut helt och hållet och "klickar", vilket indikerar att rollatorn är låst i ett utfällt läge. Brickan kan nu placeras på korgen. Om du vill fälla ramen tar du av brickan och trycker på knappen för fällningslås. Dra den bakre ramdelen inåt.

Höjdjustering av skjuthandtaget

För att justera höjden på skjuthandtaget låser du upp höjdjusteringsklämmorna på båda sidor och skjuter handtaget till önskad inställning. Lås höjdjusteringsklämmorna. Båda sidorna av handtaget ska alltid vara inställda på samma höjd.

Bromsar

Bromsarna kan aktiveras gradvis genom att dra i bromshandtaget med ökande kraft. Bromsarna är helt aktiverade när bromshandtaget kan låsas med parkeringsbromsklämman och rollatorn är helt stannad. För att stoppa bromsningen släpper du bromshandtaget.

Rollatorn är också utrustad med en parkeringsbromsfunktion. För att koppla in parkeringsbromsen drar du i bromshandtaget och låser det i ett draget läge med parkeringsbromsklämman. För att koppla ur parkeringsbromsen, lås upp bromshandtaget och för det tillbaka till ett neutralt läge.

Tryck ner handtaget för parkeringsbromsen (modell 312415 & 312418).

På Jaguar SUPREME aktiveras parkeringsbromsen genom att trycka ner bromshandtaget och låses upp genom att dra tillbaka det till neutralläge.

WARNING! Aktivera alltid parkeringsbromsen när du inte använder rollatorn! När du placerar rollatorn på en yta som inte är plan måste du alltid aktivera parkeringsbromsen!

Tillbehör


Det finns inga tillbehör till den här enheten.



4. Tekniska data

Jaguar rollator	Art. 312410-14+16+17 Olika färger	Art. 312415, 312418 SUPREME
Höjd (justerbart tryckhandtag)	83,5 – 94,5 cm	90,3 – 96 cm
Bredd	54,5 cm	56,5 cm
Längd (djup) utfällt / ihopvikt	66 / 27 cm	66 cm / 27 cm
Vikt	6,3 kg	6,0 kg
Max. användarvikt / väskbelastning	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Bromsar	2 låsbara med parkeringsfunktion	
Hjulstorlekar (fram och bak)	175 x 27 mm	

Produktetikett

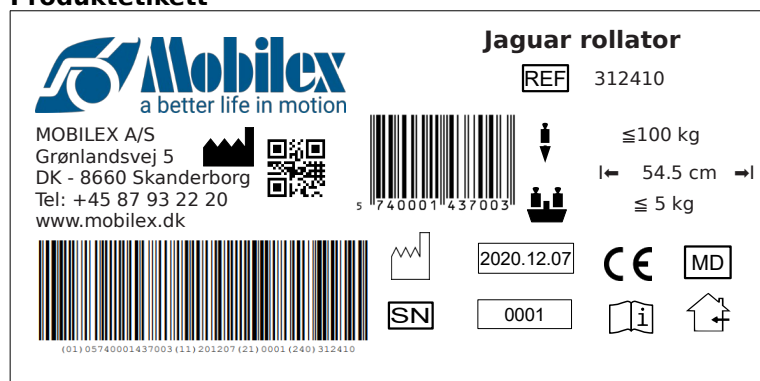

Exempel på produktetikett

	QR-kod till webbplatsen		Produktionsdato
	Producent		Max belastning
	Se bruksanvisningen		Max bredde
	Endast för inomhusbruk		serienr.
	CE-märkt produkt		Varenr
	Max belastning korg		Medicinsk utrustning

Betydelsen av ikonerna

5. Underhåll och skötsel

Vanlig smuts kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel och en svamp eller mjuk trasa. Kontrollera den specifika produktinformationen och använd endast kommersiella rengöringsmedel som är lämpliga för rengöring. För desinfektion, använd endast desinfektionsmedel som är certifierade för användning med medicintekniska produkter och som finns tillgängliga lokalt.

Hjulen kan rengöras med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Efter rengöringen bör hjullagren smörjas med olja regelbundet eller när hjulen börjar gnissla.

Apparaten behöver i princip inte underhållas. Trots den solida konstruktionen och användningen av motståndskraftiga material utsätts produkten för slitage. Det rekommenderas därför att produkten kontrolleras med jämna mellanrum av en professionell service. Vi rekommenderar följande:

- ✓ Rengöring och desinfektion av produkten
- ✓ Kontroll av att ramen inte är böjd, skadad, sliten eller korroderad.
- ✓ Kontroll av slitdelar och byte av dem vid behov.
- ✓ Allmän åtdragning av komponenterna.

Rekommenderad livslängd: Normalt 10 år beroende på användning.

Förvaring: Vi rekommenderar förvaring på ett torrt ställe vid temperaturer över 0 °C.

Transport

Det rekommenderas att du viker ihop apparaten för transport. Anordningen ska transporteras på ett stabilt och säkert sätt utan risk för plötsliga eller farliga rörelser under transporten.

Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. Innan en ny användare tar över produkten ska apparaten kontrolleras tekniskt och desinficeras enligt punkt 5.

6. De vanligaste problemen och lösningarna

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Rollatorn är svår att styra eller skjuta	Smuts mellan hjul och gaffel	Ta bort smuts eller hår mellan hjul och gafflar
Bromsarna fungerar inte eller bara på en sida.	Bromsbackarna är slitna eller bromsarna är inte korrekt inställda.	Justera bromsarna. Byt ut bromsbackarna vid behov (→ servicecenter).

7. Bortskaffande av produkten

Produkten får inte slängas med hushållsavfallet utan måste lämnas in till den lokala återvinningscentralen.

8. Villkor för garantier

Mobilex A/S erbjuder 2 års garanti för skador som orsakats av fel i produktionen eller materialfel. Garantin gäller inte vid oavsiktlig reparation eller användning av produkten. Delar som utsätts för normalt slitage omfattas inte av garantin, såvida inte slitaget orsakas av ett tillverkningsfel. Om produktändringar görs utan vårt skriftliga godkännande är CE-märkningen och produktgarantin inte giltiga. Vid produktskador som omfattas av garantin ska du meddela din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt. Garantin täcker inte transportkostnader och omfattar inte ersättning för personskador eller för att produkten inte används under reparationen. Garantin täcker inte skador som beror på att användarhandboken inte följts.

9. CE-försäkringen

Produkten har genomgått bedömningen av överensstämmelse i enlighet med EU:s förordning: MDR 2017/745 om medicintekniska produkter och är CE-märkt. En försäkringen om överensstämmelse har utfärdats för enheten och finns tillgänglig på:

mobilex.dk/medias/2021-08/ce_jaguar_indendoers_rollator_312410_11_12_13_15_8501.pdf

eller via QR-koden till höger.

