

BRUKSANVISNING

Aluminium 4-hjulig rollator

Produktkod: RANGER

Tiëmag

1. Egenskaper

Fyrhjulig rollator är gjord av aluminiumram. Utrustad med parkeringsbromsar, säte med ryggstöd, kryck-/käpphållare, mugg-/flaskhållare och behändig väska. Den har pneumatiska hjul med en diameter på 12" och höjddjusterbara handtag med anatomiska handtag. Strukturen är baserad på en korsningsram och ett ovalt tvärsnitt av rör, tack vare vilket motståndet mot axiellt tryck ökas avsevärt.

Setet innehåller: ram med sits, framhjul, ben med bakhjul, ryggstöd, shoppingväska, pump, mugghållare, kryck-/käpphållare.

Delar av rollatorn:

- A. Handtag
- B. Höjddjustering
- C. Parkeringsbroms
- D. Justeringsklämma
- E. Ryggstöd
- F. Sits med handtag
- G. Väska
- H. Främre 12" hjul
- I. Bromsjustering
- J. Bakre 12" hjul
- K. Säkerhetsklämma
- L. Trottoarkant klättrare
- M. Kryck-/käpphållare
- N. Låsstift
- O. Mugghållare



2. Ansökan

Rollatorn är designad för patienter med nedsatt rörlighet som behöver stabilt stöd och hjälp under gång. Det rekommenderas även till äldre som ett hjälpmedel för att hålla balansen, förbättra gångkomforten och säkerställa säkerheten mot fall. Användningen av rollatorn påverkar positivt på återgången till aktivitet för personer med förflyttning och lutning för att upprätthålla positionsproblem. Det garanterar bättre stabilisering, stöd och säkerhet när du går.

3. Montering, utfällning, vikning och justering

Montering

- Packa upp alla komponenter ur lådan och lägg ut på en plan yta (ram med 2 bakben förbundna med bromsledningar, 2 framhjul, ryggstöd, shoppingväska).
- Tryck på låsstiften och för in båda bakbenen med hjul i hålen i rollatorns ram. (höger och vänster ben är anslutna till rätt sida av rollatorns ram med bromsvajer).
- Tryck på låsstiften och för in båda framhjulen i hålen i framgafflarna på rollatorns ram.
- Montera ryggstödet i klämmorna på insidan av handtagen.
- Häng väskan på krokarna.



Utveckling

- För att fälla ut rollatorn, ta tag i båda handtagen och dra dem utåt.
- Tryck ner sätesskenorna tills de är helt utfällda (klick på låsmekanismen).

Hopfällbar

- För att fälla ihop rollatorn, lyft stolen i handtaget och dra upp den.
- Ta tag i båda handtagen på rollatorn och tryck dem inåt.


Handtags höjdjustering

För att justera höjden på handtaget:

- Tryck ner bromsen för att ställa in parkeringsläget och låsa rullatorn.
- Dra och håll i justeringsklämman.
- Justera höjden på handtagen
- Släpp justeringsklämman för att låsa den justerade höjden på handtagen. Dra handtaget upp och ner flera gånger för att kontrollera korrekt höjdlåsning.
- Justera höjden på det andra handtaget på liknande sätt.
- Båda handtagen ska vara inställda på samma höjd.

Bromsfunktion

- För att stoppa rollatorn, dra bromshandtaget uppåt mot handtaget och håll sedan.
- När du står stilla eller använder sätet, lås bromsen genom att dra ner bromshandtaget.
- För att lossa bromsen, dra bromshandtaget uppåt.

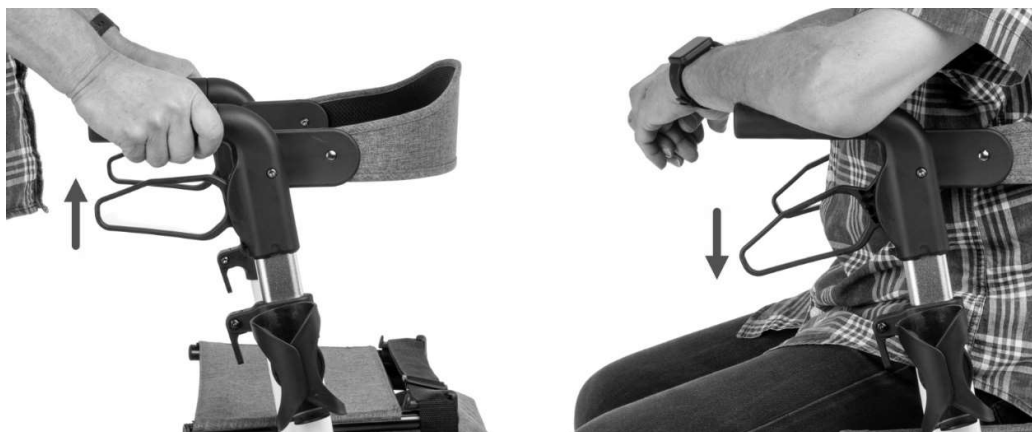

Bromsjustering

Skruva loss kabelhållaren, dra upp den till önskat avstånd och lås den sedan genom att dra åt klämskruven.

4. Tekniska data

Total bredd	67 cm
Totalt djup	75,5 cm
Sittbredd	21 cm
Total höjd	89,5-102,5 cm

Sitthöjd från marken	59 cm
Vikt	10,8 kg
Maximal kapacitet	136 kg
Varukorgens maximala kapacitet	5 kg
Ramfärg	vit, svart

5. Anteckningar

Timago International Group tar inte ansvar för felaktig användning av rollatorn, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

6. Underhåll

Rengöring

- Rengör ramen med en fuktig trasa och torka ordentligt.
- Använd inte starka polermedel på grund av risken för skador på skyddande beläggningar.
- Rengör smutsen från rörliga delar av rollatorn regelbundet (gångjärn, klämskruvar, lås).

7. Förvarings och transportförhållanden

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

9. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	LOT -nummer		Tillverkning datum

	Serienummer		Medicinsk apparat
	Notera		Behaga läs instruktionen
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt från våra distributörer.

Läs mer på: **www.timago.com**.

Tack för att du valde Timago!