

BRUKSANVISNING

Inomhus 4-hjulig aluminiumrullator


Produktkod: PEDRO

TiMago

1. Egenskaper

Inomhus 4-hjulig rollator är gjord av anodiserad aluminiumram. Rollatorn är utrustad med bromsar med parkeringsfunktion och bricka med väska. Produkten har rejäla 8" bakhjul med bromsar, solida svängbara 8" framhjul och höjdjusterbart handtag med mjukt grepp.

I setet ingår: ram med väska, fram- och bakben med hjul, bricka, låsknoppar (4 st).

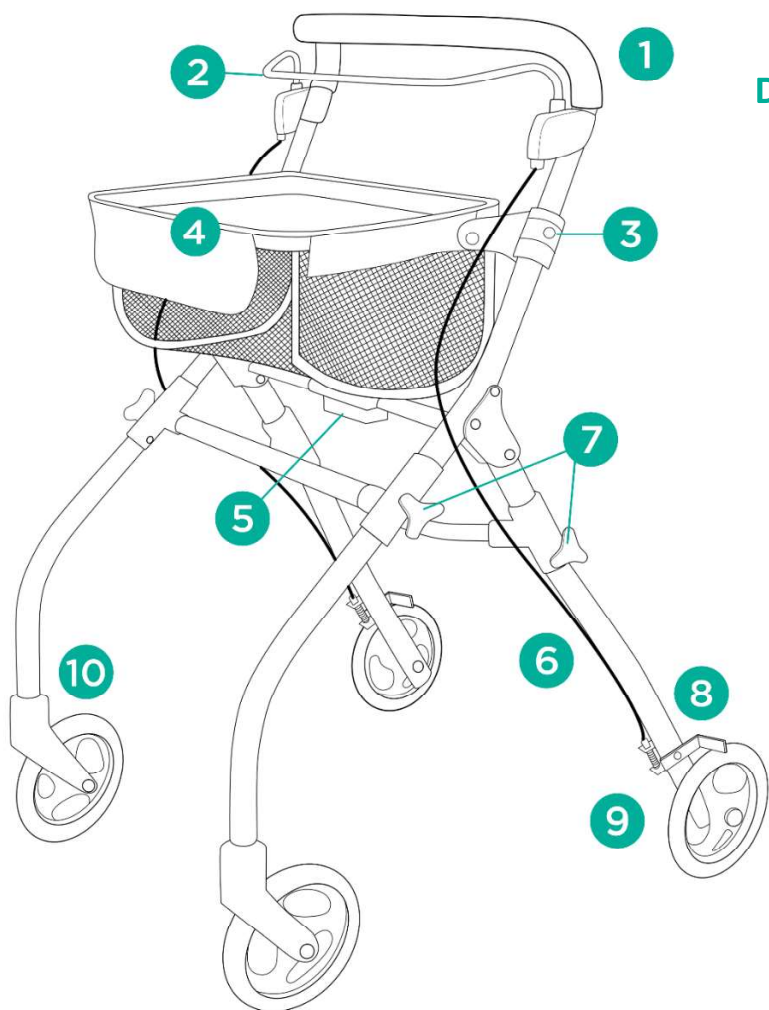

Delar av rollatorn:

1. Hantera
2. Bromshandtag med parkeringsfunktion
3. Justeringsklämma
4. Väska med bricka
5. Vikmekanism
6. Bromskabel
7. Låsknoppar
8. Broms
9. Bakre 5" hjul
10. Främre 5" svängbart hjul

2. Ansökan

Rollatorn är designad för patienter med nedsatt rörlighet som behöver stabilt stöd och hjälp under gång. Det rekommenderas även till äldre som ett hjälpmedel för att hålla balansen, förbättra gångkomforten och säkerställa säkerheten mot fall. Användningen av rollatorn har en positiv effekt på återgången till aktivitet för

personer med förflyttning och lutning för att upprätthålla positionsproblem. Det garanterar bättre stabilisering, stöd och säkerhet när du går. Rollatorn är designad för inomhusbruk.

3. Montering

Fäll ut rollatorn

- Placera fram- och bakbenen i öppningarna på ramen tills du hör ett klickljud och fäst dem med låsknoppar på sidorna.
- Vik ut ramen och väskan. Lägg brickan ovanpå påsen.

Fällning av rollatorn

- Ta bort brickan, påsen något bakåt och vik sedan nedåt.
- Tryck på vikmekanismen under påsen för att vika ihop rollatorn.

Bromsfunktion

- För att stoppa rollatorn, dra bromshandtaget uppåt och håll kvar.
- Lås bromsen genom att trycka ner bromshandtaget. För att lossa bromsen, dra bromshandtaget uppåt.

Höjdjustering

- För att justera höjden på handtaget, öppna justeringsklämman och välj lämplig höjd. Lås clipset efteråt för att säkra höjden.

Notera! Handtaget måste vara inställt på samma nivå på båda sidor av ramen.

4. Tekniska data

Total bredd	60 cm
Totalt djup	66 cm
Brickmått	38 x 29 cm
Handtagshöjdjustering	89-94 cm
Vikt	5,6 kg
Max. användarens vikt	115 kg
Max. laddning av väska och bricka	5 kg
Ramfärg	grön

5. Anteckningar

Timago International Group tar inte ansvar för felaktig användning av rollatorn, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

6. Underhåll

Rengöring

- Rengör ramen med en fuktig trasa och torka ordentligt.
- Använd inte starka polermedel på grund av risken för skador på skyddande beläggningar.
- Rengör smutsen från rörliga delar av rollatorn regelbundet (gångjärn, klämskruvar, lås).

7. Förvarings och transportförhållanden

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

9. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	LOT -nummer		Tillverkning datum
	Serienummer		Medicinsk apparat
	Notera		Behaga läs instruktionen
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt från våra distributörer.

Läs mer på: **www.timago.com**.

Tack för att du valde Timago!