

1. Introduktion

Gratis och tack för att du har valt an Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning och viktig information om användningen av den medicinska produkten. Den är avsedd att hjälpa dig att använda produkten korrekt och säkert. Det är mycket viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsriktlinjerna och följ dem alltid. Mobilex försöker ständigt förbättra och uppgradera sina produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och tekniska data för produkten utan föregående meddelande.

Användning av anordningen

Denna produkt är en medicinteknisk produkt som har utformats för att öka rörligheten för personer som har svårt att stå eller gå. Rollatorn gör det möjligt för dessa personer att återfå förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Rollatorn är lämplig för personer som till följd av olika sjukdomar behöver stabilt gångstöd. Rollatorn ska endast användas som stöd för att stå och gå. All annan användning är förbjuden.

Indikationer

Rollatorn är en medicinsk utrustning som är utformad för att hjälpa personer med funktionsbegränsningar. Indikationerna för användning är sjukdomar som orsakar rörelsebegränsningar och funktionshinder som hindrar självständigt sittande, stående och gående. Det finns därför ett behov av ett extra stabilt stöd när man utför de aktiviteter som anges ovan. Indikationerna kan inte relateras till en specifik klinisk bild och de beror på en individuell bedömning av den potentiella användarens hälsotillstånd av en professionell läkare eller sjukgymnast, men de huvudsakliga målgrupperna för användarna är äldre personer, personer med pareser, reumatiska sjukdomar och andra personer med begränsad rörlighet i länder, knäna eller höfterna. Det är förbjudet att använda produkten för andra ändamål än de som beskrivs ovan.

Kontraindikationer

Rollatorer är inte avsedda för personer som inte kan upprätthålla en korrekt kroppsbalans i stående ställning. Apparaten får inte användas om användaren har problem med perceptionen. Kontraindikationer kan inte relateras till en specifik klinisk bild och de beror på en individuell bedömning av den potentiella användarens hälsotillstånd. Valet av ortopediskt hjälpmedel som är lämpligt för en viss klinisk bild måste alltid göras med hjälp av en specialistläkare eller sjukgymnast. Observera dessutom säkerhetsinformationen i kapitel 2.

Användningsområden

Produkten är lämplig för inomhus- och utomhusbruk och kan användas av privatpersoner i hemmiljö, inom hemtjänsten, på vård- och omsorgsboenden samt på sjukhus.

Medicinska incidenter och oönskade händelser

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om det inträffar några oönskade händelser i samband med enheten:

Mobilex A/S	Telefon:	+45 87 93 22 20
Grønlandsvej 5	Telefax:	+45 87 93 17 77
DK-8660 Skanderborg	Email:	info@mobilex.dk
Denmark		

2. Säkerhetskrav

- Se till att alla personer som använder apparaten har läst den här handboken.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador och/eller personskador som uppstår om man inte följer bruksanvisningarna.
- Använd endast produkten i ett felfri skick.
- Om defekter eller fel upptäcks måste du omedelbart sluta använda apparaten och kontakta återförsäljaren.
- Följ alla tillverkarens rekommendationer och varningar.
- Var uppmärksam på informationen på produktetiketten.
- Använd produkten endast för det beskrivna ändamålet.
- Klättra inte upp på apparaten.
- Undvik att göra konstruktiva ändringar på enheten, om du inte har tillverkarens skriftliga godkännande för sådana ändringar.
- Enheten och väskan får inte belastas med mer vikt än vad som anges i Tekniska data.
- Alla hjul MÅSTE vara i kontakt med golvet ALLTID under användning. Detta garanterar att rollatorn är korrekt balanserad och minskar risken för olyckor.
- Var försiktig när du monterar eller justerar delar av apparaten.
- Kontrollera alltid före användning att hjulbromsarna fungerar perfekt.
- Använd rullatorn endast när den har fällts ut helt och hållet och låsanordningen har aktiverats.
- Sätet får endast användas när parkeringsbromsarna har aktiverats.
- Båda bromsarna ska alltid aktiveras eller låsas samtidigt.
- Det är inte tillåtet att bära en person eller ett föremål på sätet medan rollatorn är i rörelse.
- Parkeringsbromsarna måste alltid vara aktiverade när rollatorn inte används.

Leveransens omfattning

Apparaten levereras i en kartonglåda. Innehållet i paketet är:

- ✓ 1 Rollator hopfäld inkl. monterad sits, ryggbälte och shoppingväska;
- ✓ 1 Stockhållaren är inte monterad och finns i en plastpåse i väskans sidoficka;
- ✓ 1 Bruksanvisning;

Preliminär kontroll

Kontrollera innehållet i lådan med listan ovan. Om du i detta skede upptäcker att en del saknas eller är skadad, kontakta omedelbart din leverantör.

3. Beskrivning

Produktbeskrivning

Rollatorn har en pulverlackerad ram och 4 soft hjul. Den lätta ramen gör det lätt att fälla ihop den och ger enkel förvaring och transport. Rollatorn går lätt och är tillräckligt stabil. Höjden på skjuthandtagen kan justeras. Rollatorn levereras med ett monterat säte, en ryggrem och en shoppingväska.

Rollatorn består av följande delar:

1. Tryck på handtaget
2. Bromshandtag
3. Sätetsrör
4. Handtagets höjjusteringsknapp
5. Broms
6. Bakhjul
7. Fällbar rem
8. Ryggrem
9. Låsknapp för fällning
10. Shoppingväska
11. Vridbart hjul på framsidan



Beskrivning av monteringen

Den här enheten behöver inga monteringsanvisningar.

Funktionsbeskrivning

Vikning/avvikning av ramen

För att fälla ut ramen trycker du på knappen för fällbar låsning och trycker nedåt på sätetsrören tills ramen fälls ut och "klickar", vilket indikerar att rollatorn är låst i ett utfällt läge. För att vika ihop ramen drar du upp vikningsremmen och slutar att vika ihop ramen genom att trycka ihop sätetsrören tills knappen för vikningslåsning "klickar".

WARNING! Sätetsrören måste snäppa fast ordentligt på båda sidor när du fäller ut rollatorn. Alla delar måste vara ordentligt låsta innan rollatorn kan användas. Om dessa varningar inte följs kan det leda till skador.

Höjjustering med skjuthandtag

För att justera höjden på skjuthandtaget, lossa höjjusteringsknappen och skjut handtaget till önskad inställning. Dra åt ratten och upprepa för det andra handtaget.

OBS: Båda handtagen ska alltid vara på samma höjd. Den korrekta höjden på skjuthandtagen ska alltid vara på samma höjd som användarens handleder när denne står med armarna längs kroppen.

Bromsar

Bromsarna kan aktiveras gradvis genom att dra upp bromsspakarna med ökande kraft. Bromsarna är helt aktiverade när bromsspakarna rör vid handtagen och rollatorn är helt stannad. För att sluta bromsa släpper du bromsspakarna. Rollatorn är också utrustad med en parkeringsbromsfunktion. För att koppla in parkeringsbromsen trycker du bromsspaken nedåt tills den låses i det läget. För att koppla ur parkeringsbromsarna drar du bromsspakarna tillbaka till neutralläget.

WARNING! Aktivera alltid parkeringsbromsen när du inte använder rollatorn! När du placerar rollatorn på en yta som inte är plan måste du alltid aktivera parkeringsbromsen!

WARNING! Bromsarna måste alltid vara i låst läge när rollatorn är parkerad! Använd aldrig sätet om bromsarna inte är låsta! När du sitter får du aldrig luta dig bakåt. Det rekommenderas att endast sitta på den främre delen av sätet. Sitt inte ner på väskan.

Tillbehör


Rollatorn kan utrustas med följande tillbehör (ingår inte i standardutrustningen):

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ✓ Fast sits | ✓ Hållare för syrgasflaska | ✓ Röd/Blå ringklokke |
| ✓ Brick | ✓ Paraplyhållare | ✓ Kabelsats för enarmsbroms |
| ✓ LED-lampor vit/röd | ✓ Ryggbälte H=200 mm | ✓ Dragbroms |
| ✓ Stängd väska med dragkedja | ✓ Nätväska | |

4. Tekniska data

Lion rollator	Standard Art. 312372, 312374	Small Art. 312371, 312373
Tillgängliga färger	antracitgrått, brun metallisk	
Handtagens höjd (justerbar)	90-112 cm	77-90 cm
Rekommenderas för användarsstorlek på	170 - 220 cm	165 - 175 cm
Sitshöjd	62 cm	53 cm
Total bredd öppen / stängt	68 / 26 cm	68 / 26 cm
Inre bredd mellan handtagen	56 cm	56 cm
Längd (djup)	76 cm	76 cm
Vikt	9,3 kg	9,0 kg
Max.last (rollator / inköpsväskan)	200 kg / 5 kg	
Bromsar	2 med parkeringsfunktion	
Hjulstorlekar (fram / bak)	285 x 44 / 235 x 44 mm	

Produktetikett

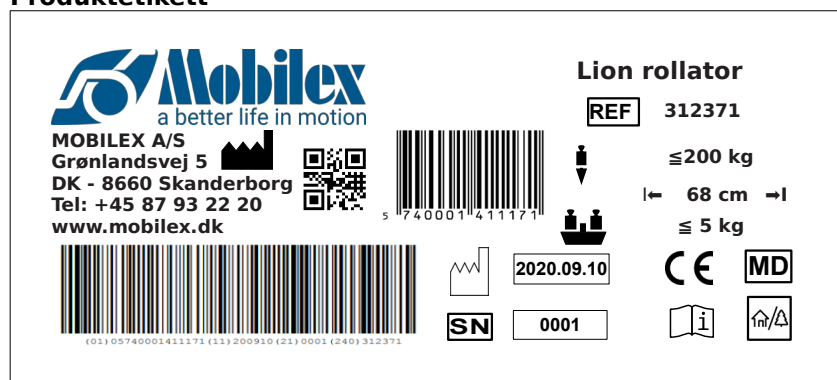

Exempel på produktetikett

	QR-kod till webbplatsen		Produktionsdato
	Producent		Max belastning
	Se bruksanvisningen		Max bredd
	För användning inomhus/utomhus		serienr.
	CE-märkt produkt		Varenr
	Max belastning korg		Medicinsk utrustning

Betydelsen av ikonerna

5. Underhåll och skötsel

Vanlig smuts kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel och en svamp eller mjuk trasa. Kontrollera den specifika produktinformationen och använd endast kommersiella rengöringsmedel som är lämpliga för rengöring. För desinfektion, använd endast desinfektionsmedel som är certifierade för användning med medicintekniska produkter och som finns tillgängliga lokalt.

Hjulen kan rengöras med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Efter rengöringen bör hjullagren smörjas med olja regelbundet eller när hjulen börjar gnissla.

Apparaten behöver i princip inte underhållas. Trots den solida konstruktionen och användningen av motståndskraftiga material utsätts produkten för slitage. Det rekommenderas därför att produkten kontrolleras med jämna mellanrum av en professionell service. Vi rekommenderar följande:

- ✓ Rengöring och desinfektion av produkten
- ✓ Kontroll av att ramen inte är böjd, skadad, sliten eller korroderad.
- ✓ Kontroll av slitdelar och byte av dem vid behov.
- ✓ Allmän åtdragning av komponenterna.

Rekommenderad livslängd: Normalt 10 år beroende på användning.

Förvaring: Vi rekommenderar förvaring på ett torrt ställe vid temperaturer över 0 °C.

Transport

Det rekommenderas att du viker ihop apparaten för transport. Anordningen ska transporteras på ett stabilt och säkert sätt utan risk för plötsliga eller farliga rörelser under transporten.

Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. Innan en ny användare tar över produkten ska apparaten kontrolleras tekniskt och desinficeras enligt punkt 5.

6. De vanligaste problemen och lösningarna

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Rollatorn är svår att styra eller skjuta	Smuts mellan hjul och gaffel	Ta bort smuts eller hår mellan hjul och gafflar
Bromsarna fungerar inte eller bara på en sida.	Bromsbackarna är slitna eller bromsarna är inte korrekt inställda.	Justera bromsarna. Byt ut bromsbackarna vid behov (→ servicecenter).
Sätet passar inte in i ramen när rullatorn fälls ut.	Låsanordningen är i fel läge eller defekt.	Kontrollera att låsanordningen är i rätt läge. Byt ut den vid behov (→ servicecenter).

7. Bortskaffande av produkten

Produkten får inte slängas med hushållsavfallet utan måste lämnas in till den lokala återvinningscentralen.

8. Villkor för garantier

Mobilex A/S erbjuder 2 års garanti för skador som orsakats av fel i produktionen eller materialfel. Garantin gäller inte vid oavsiktlig reparation eller användning av produkten. Delar som utsätts för normalt slitage omfattas inte av garantin, såvida inte slitaget orsakas av ett tillverkningsfel. Om produktändringar görs utan vårt skriftliga godkännande är CE-märkningen och produktgarantin inte giltiga. Vid produktskador som omfattas av garantin ska du meddela din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt. Garantin täcker inte transportkostnader och omfattar inte ersättning för personskador eller för att produkten inte används under reparationen. Garantin täcker inte skador som beror på att användarhandboken inte följts.

9. CE-försäkran

Produkten har genomgått bedömningen av överensstämmelse i enlighet med EU:s förordning: MDR 2017/745 om medicintekniska produkter och är CE-märkt. En försäkran om överensstämmelse har utfärdats för enheten och finns tillgänglig på

mobilex.dk/medias/2021-08/ce_lion_rollator_312371_72_73_74_8497.pdf

eller via QR-koden till höger.

