

BRUKSANVISNING

4-hjulig rollator med bromsar och sits


Produktkod: DEFENDER



1. Egenskaper

4-hjulig rollator är gjord av korsförstärkt aluminiumram. Rollatorn är utrustad med sits, ryggstöd, bromsar med parkeringsfunktion, främre 8" svängbara hjul med låssystem och bakre 8" hjul. Rejäl handtag ger ordentlig stabilisering och komfort. Höjden på rollatorn kan justeras efter användarens behov. När den är ihopfälld tar rollatorn liten plats, vilket gör den enkel att förvara och transportera.

Delar av rollatorn:

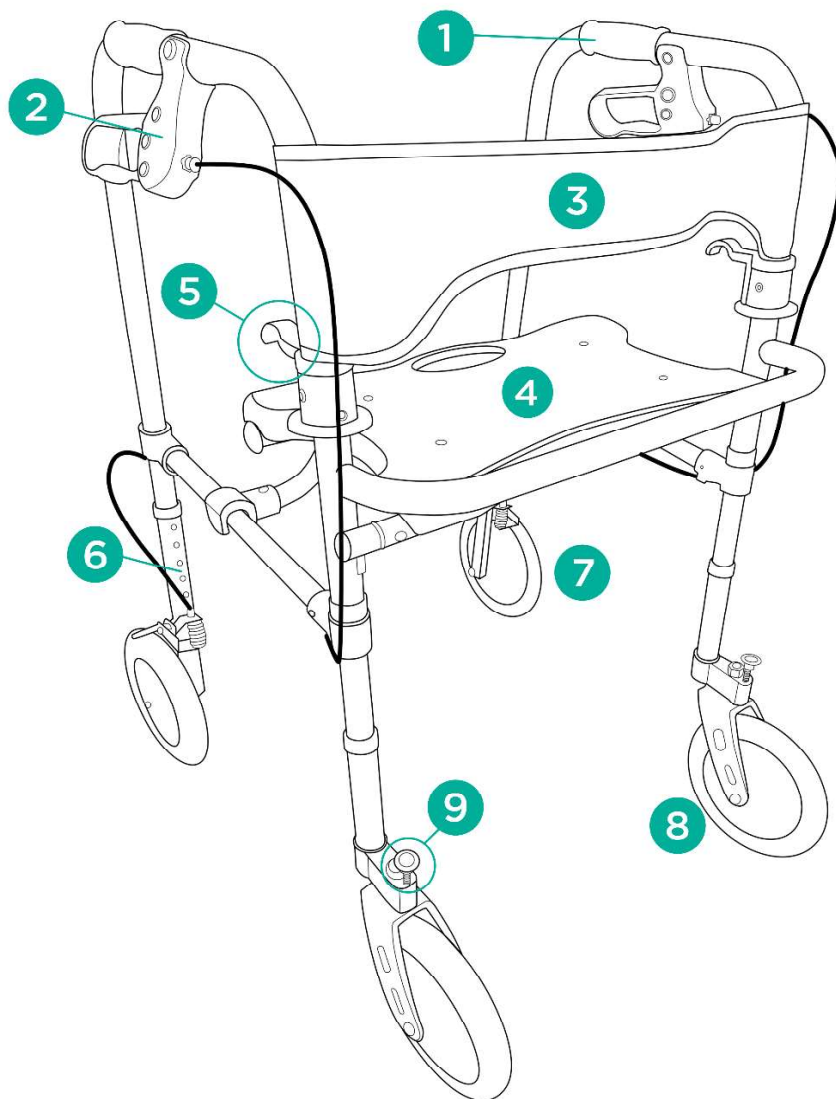

- 1. handtagsbroms med parkeringsfunktion
- 2. ryggstöd
- 3. plats
- 4. ramvikning
- 5. system
- 6. höjjustering
- 7. bakhjul 8"
- 8. framhjul 8"
- 9. svängbar hjullåsspak

2. Ansökan

4-hjulig rollator är en stödutrustning utformad för personer med nedsatt rörlighet som behöver stabilt stöd och assistans under gång. Den rekommenderas även för äldre som ett hjälpmedel för att hålla balansen, förbättra gångkomforten och säkerställa säkerheten mot fall. Användningen av rollatorn har en positiv effekt på återgången till aktivitet av personer med tillstånd i nedre extremiteter och med problem med rörelse eller vertikalisering.

3. Montering

UPP- OCH VIKNING

- För att fälla ut rollatorn, dra isär sidorna till maximalt läge tills handtagen är låsta (karakteristiskt "klick"-ljud).
- För att fälla ihop rollatorn, dra upp spakarna på ramens fällsystem på sidorna och fäll dem inåt.

HÖJDJUSTERING

- Höjden bör ställas in på en sådan nivå att brukaren, som lutar sig mot handtagen, står upprätt med axlarna i viloläge och med lätt böjda armbågar. Det är orådligt att hänga på rollatorn med all kroppsvikt.
- För att justera höjden på benen, tryck på metallstiftet, välj lämplig höjd och lås läget för alla fyra benen. Benen är justerbara i steg om 2,5 cm .

NOTERA! Stiften måste ställas på samma nivå i varje ben.

BROMSFUNKTION

- För att stoppa rollatorn, dra upp bromshandtaget och håll sedan.
- När du inte är i rörelse eller använder sätet, lås parkeringsbromsen genom att dra ned bromshandtaget.
- Dra handtaget uppåt för att lossa parkeringsbromsen .

SÄTSFUNKTION

- Walker är utrustad med 48 cm bred sits så att användaren kan vila.
- För att sätta upp sätet, ta tag i säteshandtaget och dra upp det.

SLÅSANDE HJUL

- Främre, svängbara hjul kan låsas till rakt framåt läge.
- För att låsa hjulet dra upp låsspakarna och vrid dem i sidled (bild 1) och släpp spakarna efteråt. Se till att båda hjulen är inriktade i rakt läge. Ett "klick"-ljud ska höras. Upprepa på andra hjulet.
- För att låsa upp de svängbara hjulen, dra uppåt och vrid spakarna tillbaka till föregående läge (bild 1).

NOTERA! Innan du använder rollatorn, se till att båda hjulen antingen är olåsta eller låsta.

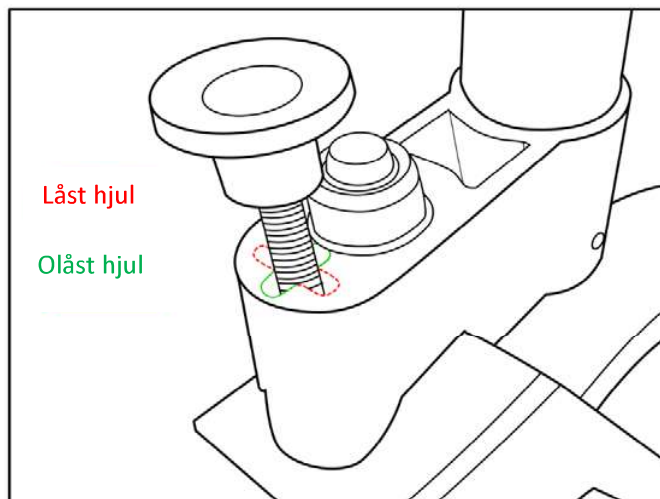


Bild 11

4. Tekniska data

Total bredd	67 cm
Inre bredd	49 cm
Totalt djup	64 cm
Sitsens mått	48 x 29 cm
Höjd justering	90-101 cm
Vikt	7,80 kg
Maximal kapacitet	136 kg

5. Anteckningar

Timago International Group tar inte ansvar för felaktig användning av rollatorn, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

6. Underhåll

- Rengör rollatorns ram med en fuktig trasa med endast vatten och mildt rengöringsmedel. Torka ordentligt.
- Använd inte för rengöring: starka poler- och slipmedel, starka rengöringsmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel (det kan orsaka ramskador, synliga defekter och följaktligen - förlust av garantirättigheter).
- Ta bort smuts från rörliga komponenter på rollatorn (gångjärn, klämskruvar,

lås) regelbundet.

7. Förvarings och transportförhållanden

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

9. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	LOT -nummer		Tillverkning datum
	Serienummer		Medicinsk apparat
	Notera		Behaga läs instruktionen
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt från våra distributörer.
Läs mer på: www.timago.com. Tack för att du valde Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com

