

BRUKSANVISNING

Badkarsbänk med ryggstöd


Produktkod: BathTim

Timago

1. Utförande

Badkarsbänken med bred sits och ryggstöd är tillverkad av slitstark PVC och har en 14-stegs höjdjustering. Ett extra sidohandtag gör det lättare att använda bänken, medan specialdesignade gummisugkoppar och halkskydd effektivt förhindrar att bänken glider på våta ytor och förbättrar dess stabilitet under användning.

Satsen innehåller: PVC-ryggstöd, sits, fötter med sugkoppar – 2 st., fötter med halkskydd – 2 st., monteringsrör – 2 st., ram för sidohandtag.

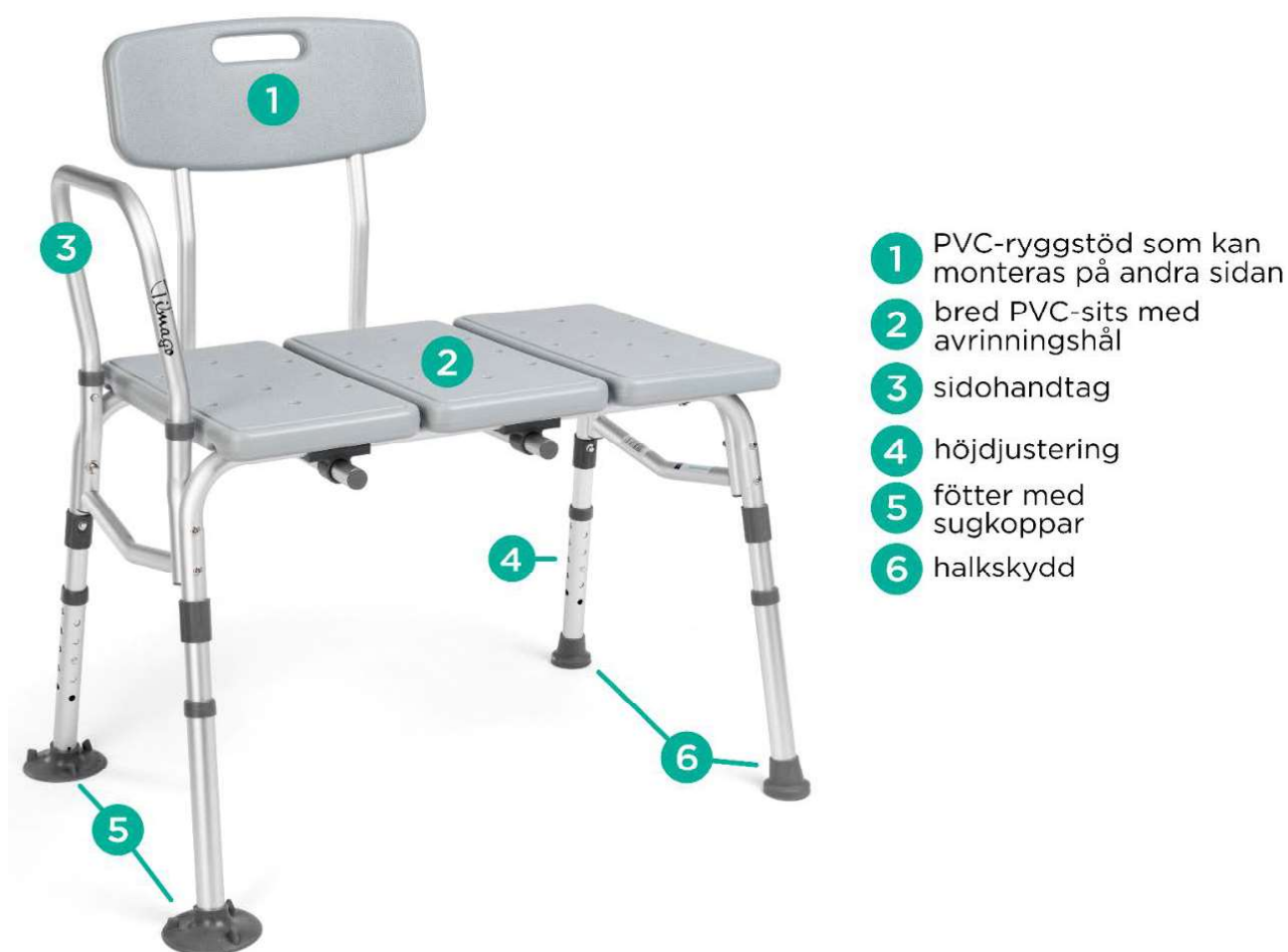


2. Användning

Badkarsbänk med ryggstöd är ett hjälpmedel för att underlätta personlig hygien för användaren. Den rekommenderas för personer med nedsatt rörlighet som gör det omöjligt eller svårt att klara vardagliga aktiviteter på egen hand. Bänken rekommenderas för användning i dusch, badkar, badrum och andra våtutrymmen, hemma och på sjukhus.

3. Montering

Steg 1. Lägg bänksitsen platt på golvet. För sedan in benen i monteringshålen tills låsstiften klickar fast.

- Benen med sugkoppar ska placeras på samma sida som sidohandtaget (bild 1).

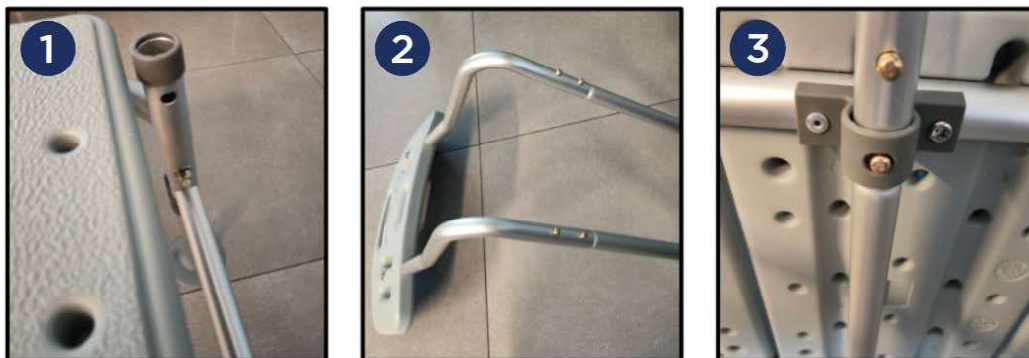

Steg 2. Montera monteringsrören i hålen på ryggstödet (bild 2). Se till att båda låsstiften sitter fast i hålen på ryggstödet. Lägg sitsramen med benen på sidan. För sedan ryggstödet genom fästöglorna på sitsens baksida tills låsstiftet klickar fast (bild 3).

- Ryggstödet har tvåstegs längdjustering (bild 3). För att justera längden mellan ryggstödet och sitsen, tryck in låsstiftet och justera längden för att passa användaren.

Steg 3. Ställ bänken upprätt och montera sidohandtaget i lämpliga hål på sitsen (bild 1). Lås handtaget med låsstiften.

HÖJDJUSTERING

För att justera bänkens höjd, tryck in låsstiftet, välj önskad benhöjd och lås sedan läget med låsstiftet. Benen kan justeras i steg om 1 cm. Alla ben måste sitta på samma höjdnivå.

4. Teknisk specifikation

Sätesdimensioner	67 x 41 cm
Höjdjustering	49,5-66 cm
Vikt	4,70 kg
Maxkapacitet	136 kg

5. Anmärkningar och rekommendationer

Timago International Group ska inte hållas ansvarigt för olämplig användning av produkten, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter eller användning för annat ändamål än det avsedda.

6. Underhåll

- Rengör bänken regelbundet med vatten, en svamp och milda rengöringsmedel för plast, t.ex. tvål. Torka av efter varje användning.
- Använd inte starka rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel för rengöring. (risk för skador på ramen, synliga defekter, och därmed förlust av garantirättigheter).
- Vi rekommenderar att regelbundet kontrollera gummiskyddet, låsstiften, monteringsrören, ryggstödet och sitsen.

7. Lagrings och transportförhållanden

Utsätt inte produkten för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Produkten omfattas av en garanti enligt villkoren i garantikortet. Spara inköpsbeviset (kvitto eller faktura) för garantiändamål.

9. Märkning

	Referensnummer		Tillverkare
	Serienummer		Tillverkningsdatum
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Observera		Läs bruksanvisningen
	Tillverkaren har bedömt överensstämmelsen med de väsentliga kraven för medicintekniska produkter.		

Hela sortimentet hittar du hos våra återförsäljare. Läs mer på **www.timago.com**.
Tack för att du valt Timago!