

COC Rapid Test (Saliva) – Quick Test for Cocaine

What the test does

This is a rapid test to qualitatively detect cocaine and its metabolites in saliva, with a cut-off level of 20 ng/mL. Results are available in 3–10 minutes.

Contents

- Test stick (single use)
- Instructions
- Requires only saliva – no blood or urine

How to perform the test

1. Preparation:


- Do not eat or drink for at least 10 minutes before the test.

2. Collection:

- Remove the cap.
- Insert sponge end into the mouth.
- Rub actively along the gums (10–15 times).
- Place sponge end under the tongue until fluid appears (~60 sec).
- Remove and start the timer.

3. Reading:

- Read result after 3–10 minutes.
- Do not read after 20 minutes.

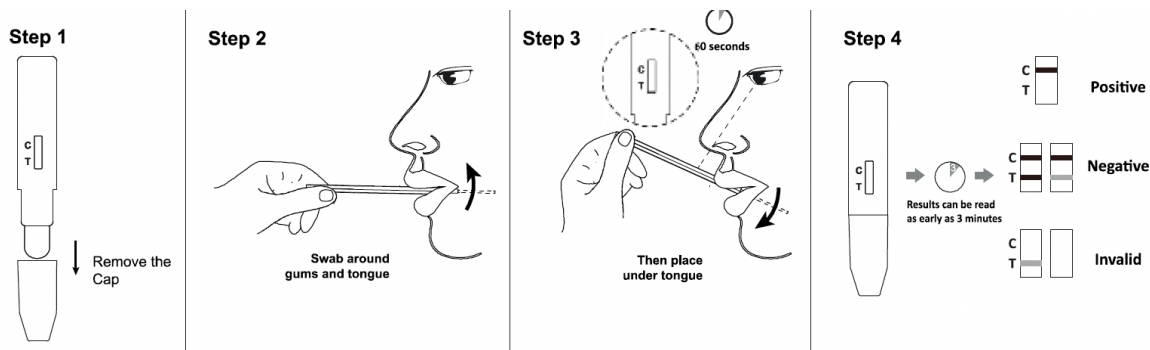

Interpreting results

- Negative: Two lines (C and T) visible. Cocaine not detected or under 20 ng/mL.
- Positive: Only the control line (C) appears. Cocaine detected over 20 ng/mL.
- Invalid: No control line (C). Repeat with a new test.

Note: Faint T lines still count as negative.

Detection time

Cocaine can be detected in saliva up to about 24–48 hours after use, depending on dose, metabolism, and usage pattern.

Accuracy

- Overall agreement: 93.8% (compared to GC/MS)
- Reliable positive at ≥ 20 ng/mL
- No cross-reactivity with common medicines or supplements

Important info

- For single use only
- Store at 2–30°C

COC (Saliv) – Snabbtest för Kokain

Vad testet gör


Testet är ett snabbtest för att kvalitativt detektera kokain och dess metaboliter i saliv med en känslighetsgräns på 20 ng/mL. Resultatet fås inom 3–10 minuter.

Innehåll

- Teststicka (engångsbruk)
- Instruktion
- Kräver endast saliv – inget blod, ingen urin

Så gör du testet

1. Förberedelse: - Ät eller drick inte något på minst 10 minuter före testet.
2. Insamling:
 - Ta av testets lock.
 - Sätt in svampänden i munnen.
 - Gnugga aktivt längs tandköttet på båda sidor (10–15 gånger).
 - Placera sedan svampen under tungan tills vätska syns i testfönstret (~60 sek).
 - Ta ut testet och starta timer.
3. Avläsning:
 - Läs resultatet efter 3–10 minuter.
 - Tolka inte efter 20 minuter.

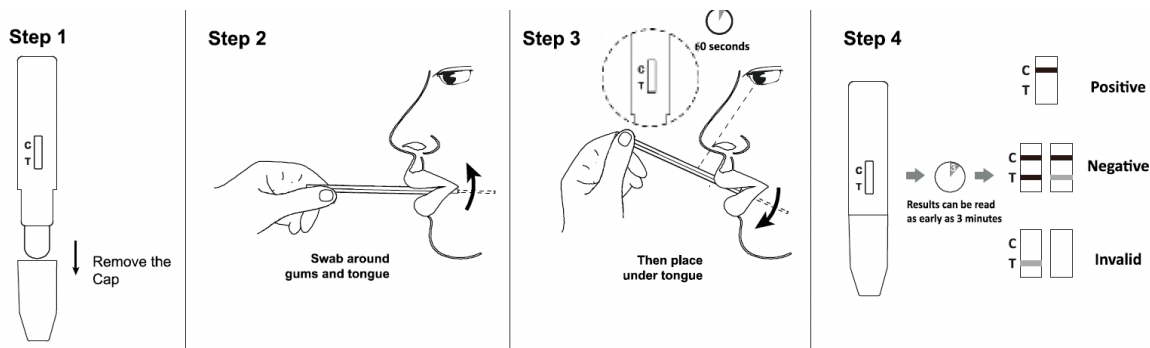

Tolkning av resultat

- Negativt: Två linjer syns (C och T). Kokain finns ej eller under gränsvärde (20 ng/mL).
- Positivt: Endast kontrollinje (C) syns. Kokain har detekterats över gränsvärdet.
- Ogiltigt: Ingen kontrollinje (C) = testet ogiltigt. Gör om med ett nytt test.

Obs: Färgens styrka på T-linjen kan variera – alla nyanser räknas som negativt.

Hur länge efter bruk syns kokain?

- Kokain och dess metaboliter kan detekteras i saliv upp till cirka 24–48 timmar efter användning.
- Detektionstiden påverkas av dosens storlek, användarens metabolism och om bruket är engångs eller regelbundet.

Noggrannhet

- Totalt överensstämmelse: 93,8 % jämfört med referensmetod (GC/MS)
- Analytisk känslighet: Pålitligt positivt vid ≥ 20 ng/mL
- Inga korsreaktioner med vanliga läkemedel eller kosttillskott

Viktig info

- Endast för engångsbruk, • Förvaras torrt i rumstemperatur (2–30 °C)

COC (spytt) – Hurtigtest for kokain

Hva testen gjør


Dette er en hurtigtest for kvalitativ påvisning av kokain og dets metabolitter i spytt, med en grenseverdi på 20 ng/mL. Resultater vises innen 3–10 minutter.

Innhold

- Testpinne (engangsbruk)
- Instruksjon
- Krever kun spytt – ikke blod eller urin

Slik utfører du testen

1. Forberedelse:
 - Ikke spis eller drikk på minst 10 minutter før testen.
2. Innsamling:
 - Fjern hetten.
 - Sett svampenden i munnen.
 - Gni aktivt langs tannkjøttet (10–15 ganger).
 - Plasser svampen under tungen til væske vises (~60 sek).
 - Fjern og start tidtaking.
3. Avlesning:
 - Les resultatet etter 3–10 minutter.
 - Ikke les etter 20 minutter.

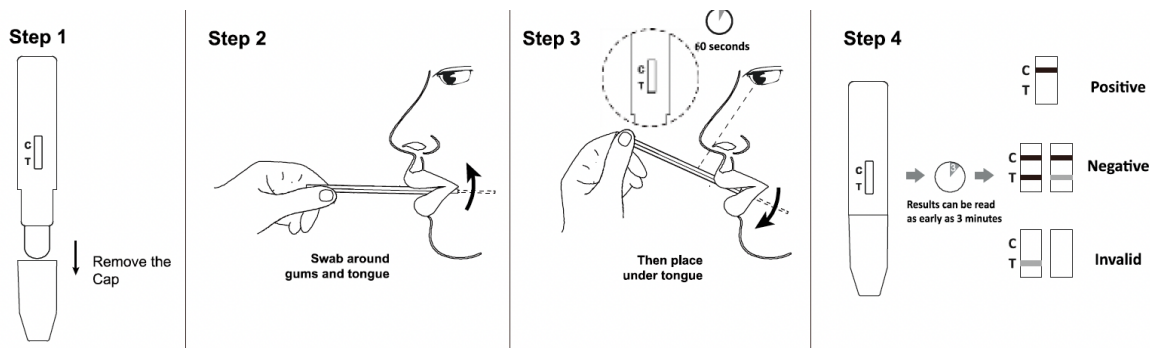

Tolkning av resultater

- Negativ: To linjer (C og T) vises. Kokain ikke påvist eller under 20 ng/mL.
- Positiv: Kun kontrollinje (C) vises. Kokain påvist over 20 ng/mL.
- Ugyldig: Ingen kontrollinje (C). Gjenta med ny test.

Merk: Svake T-linjer telles fortsatt som negativt.

Deteksjonstid

Kokain kan påvises i spytt opptil ca. 24–48 timer etter bruk, avhengig av dose, metabolisme og bruksmønster.

Nøyaktighet

- Total samsvar: 93,8 % (sammenlignet med GC/MS)
- Pålitelig positiv ved ≥ 20 ng/mL
- Ingen kryssreaksjoner med vanlige medisiner eller kosttilskudd

Viktig informasjon

- Kun for engangsbruk
- Oppbevares ved 2–30°C

COC Pikatesti (sylki) – Pikatesti kokaiinille

Mitä testi tekee

Tämä on pikatesti kokaiinin ja sen aineenvaihduntatuotteiden kvalitatiiviseen havaitsemiseen syljestä, pitoisuusraja 20 ng/mL. Tulokset 3–10 minuutissa.

Sisältö

- Testipuikko (kertakäyttöinen)
- Ohjeet
- Vaatii vain sylkeä – ei verta tai virtsaa

Testin suorittaminen

1. Valmistelu:


- Älä syö tai juo vähintään 10 minuuttiin ennen testiä.

2. Näytteenotto:

- Poista suojus.
- Aseta sieni suuhun.
- Hiero aktiivisesti ikeniä pitkin (10–15 kertaa).
- Aseta sieni kielen alle, kunnes nestettä näkyy (~60 s).
- Poista ja käynnistä ajastin.

3. Tulosten lukeminen:

- Lue tulos 3–10 minuutin kuluttua.
- Älä lue tulosta 20 minuutin jälkeen.

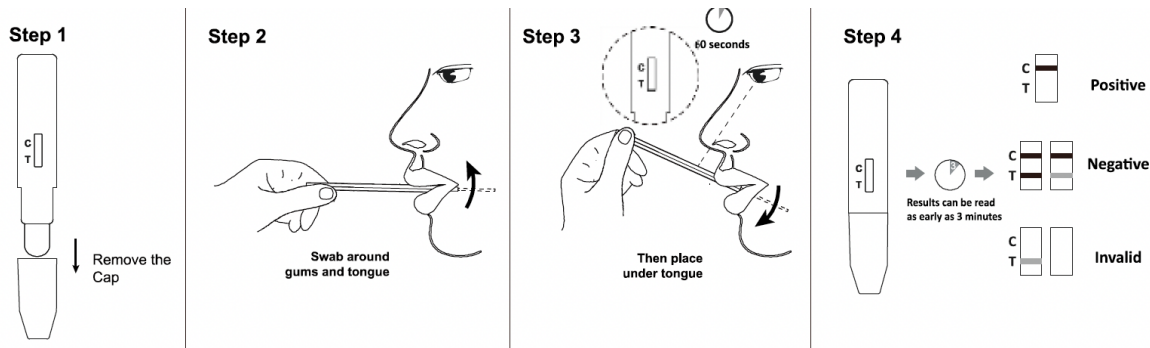

Tulosten tulkinta

- Negatiivinen: Näkyvissä kaksi viivaa (C ja T). Kokaiinia ei havaittu tai pitoisuus alle 20 ng/mL.
- Positiivinen: Vain kontrolliviiva (C) näkyy. Kokaiinia havaittu yli 20 ng/mL.
- Virheellinen: Ei kontrolliviivaa (C). Toista uudella testillä.

Huom: Heikot T-viivat lasketaan edelleen negatiivisiksi.

Havaitsemisaika

Kokaiini voidaan havaita syljestä noin 24–48 tunnin ajan käytön jälkeen riippuen annoksesta, aineenvaihdunnasta ja käyttötottumuksista.

Tarkkuus

- Kokonaisvastaavuus: 93,8 % (verrattuna GC/MS-menetelmään)
- Luotettava positiivinen tulos ≥ 20 ng/mL
- Ei ristireaktioita yleisten lääkkeiden tai ravintolisien kanssa

Tärkeää tietoa

- Vain kertakäyttöön
- Säilytä 2–30°C lämpötilassa

COC-Schnelltest (Speichel) – Schnelltest auf Kokain

Was der Test macht


Dies ist ein Schnelltest zum qualitativen Nachweis von Kokain und seinen Metaboliten im Speichel mit einer Nachweisgrenze von 20 ng/mL. Ergebnisse sind in 3–10 Minuten verfügbar.

Inhalt

- Teststab (Einmalgebrauch)
- Gebrauchsanweisung
- Erfordert nur Speichel – kein Blut oder Urin

Testdurchführung

1. Vorbereitung: – Mindestens 10 Minuten vor dem Test nichts essen oder trinken.
2. Probenentnahme:
 - Kappe entfernen.
 - Schwammende in den Mund einführen.
 - Aktiv entlang des Zahnfleisches reiben (10–15 Mal).
 - Schwamm unter die Zunge legen, bis Flüssigkeit erscheint (~60 Sek.).
 - Entfernen und Timer starten.
3. Ablesen des Ergebnisses:
 - Ergebnis nach 3–10 Minuten ablesen.
 - Nicht nach 20 Minuten ablesen.

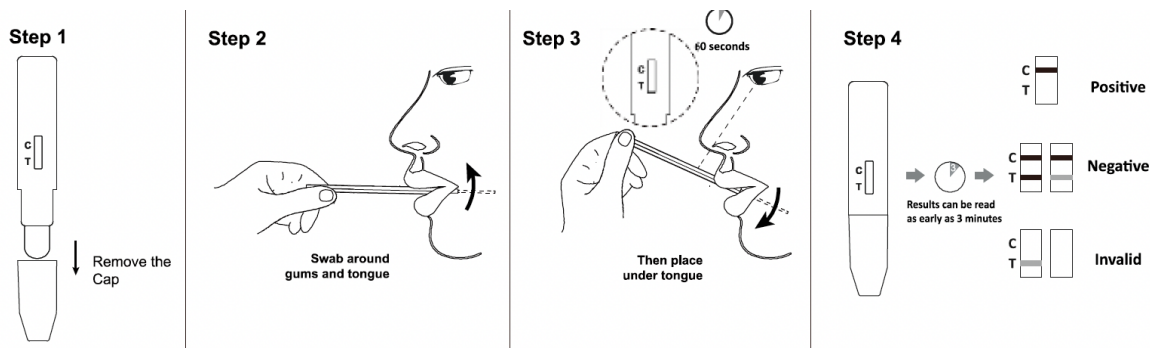

Ergebnisinterpretation

- Negativ: Zwei Linien (C und T) sichtbar. Kein oder weniger als 20 ng/mL Kokain nachgewiesen.
- Positiv: Nur die Kontrolllinie (C) erscheint. Mehr als 20 ng/mL Kokain nachgewiesen.
- Ungültig: Keine Kontrolllinie (C) sichtbar. Test mit neuem Teststreifen wiederholen.

Hinweis: Auch schwache T-Linien gelten als negativ.

Nachweiszeit

Kokain kann im Speichel etwa 24–48 Stunden nach dem Konsum nachgewiesen werden – abhängig von Dosis, Stoffwechsel und Konsumverhalten.

Genauigkeit

- Gesamte Übereinstimmung: 93,8 % (verglichen mit GC/MS)
- Zuverlässig positiv ab ≥ 20 ng/mL
- Keine Kreuzreaktionen mit gängigen Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln

Wichtige Hinweise

- Nur zur einmaligen Anwendung
- Lagerung bei 2–30 °C

Test rapide COC (salive) – Dépistage rapide de la cocaïne

À quoi sert le test

Il s'agit d'un test rapide pour détecter qualitativement la cocaïne et ses métabolites dans la salive, avec un seuil de détection de 20 ng/mL. Les résultats sont disponibles en 3 à 10 minutes.

Contenu

- Bâtonnet de test (usage unique)
- Instructions
- Nécessite uniquement de la salive – pas de sang ni d'urine

Comment effectuer le test

1. Préparation :


- Ne pas manger ou boire pendant au moins 10 minutes avant le test.

2. Prélèvement :

- Retirer le capuchon.
- Insérer l'extrémité avec l'éponge dans la bouche.
- Frotter activement le long des gencives (10–15 fois).
- Placer l'éponge sous la langue jusqu'à ce que du liquide apparaisse (~60 sec).
- Retirer et démarrer le chronomètre.

3. Lecture :

- Lire le résultat après 3 à 10 minutes.
- Ne pas lire après 20 minutes.

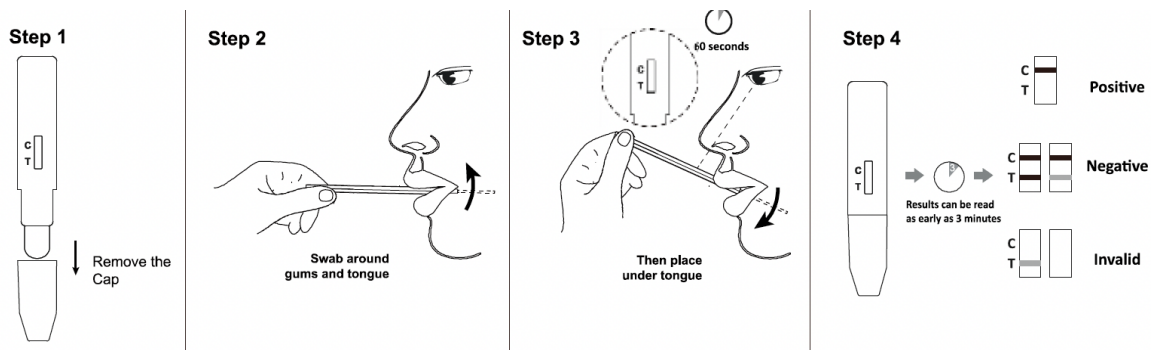

Interprétation des résultats

- Négatif : Deux lignes (C et T) visibles. Cocaïne non détectée ou inférieure à 20 ng/mL.
- Positif : Seule la ligne de contrôle (C) apparaît. Cocaïne détectée au-dessus de 20 ng/mL.
- Invalide : Pas de ligne de contrôle (C). Refaire le test avec un nouveau dispositif.

Remarque : les lignes faibles sur T sont également considérées comme négatives.

Temps de détection

La cocaïne peut être détectée dans la salive jusqu'à environ 24–48 heures après la consommation, en fonction de la dose, du métabolisme et de la fréquence d'utilisation.

Précision

- Concordance globale : 93,8 % (comparé à GC/MS)
- Résultats fiables à ≥ 20 ng/mL
- Aucune réactivité croisée avec les médicaments ou compléments courants

Informations importantes

- Usage unique uniquement
- À conserver entre 2 et 30 °C

COC-sneltest (speeksel) – Sneltest voor cocaïne

Wat de test doet


Dit is een sneltest voor het kwalitatief aantonen van cocaïne en de metabolieten ervan in speeksel, met een drempelwaarde van 20 ng/mL. Resultaten zijn beschikbaar binnen 3–10 minuten.

Inhoud

- Teststaafje (eenmalig gebruik)
- Instructies
- Alleen speeksel vereist – geen bloed of urine

Hoe de test uit te voeren

1. Voorbereiding: – Eet of drink minstens 10 minuten voor de test niet.
2. Monsterafname:
 - Verwijder het dopje.
 - Plaats het sponsuiteinde in de mond.
 - Wrijf actief langs het tandvlees (10–15 keer).
 - Plaats de spons onder de tong totdat er vloeistof verschijnt (~60 sec).
 - Verwijder en start de timer.
3. Aflezen:
 - Lees het resultaat af na 3–10 minuten.
 - Lees niet af na 20 minuten.

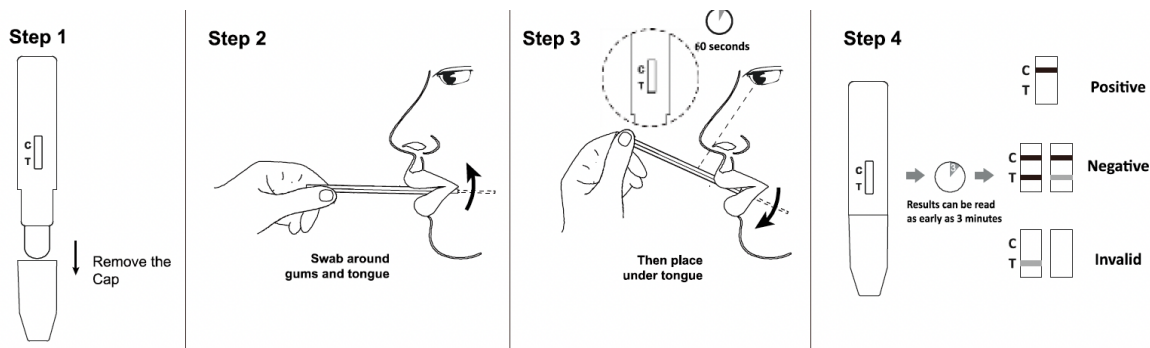

Resultaten interpreteren

- Negatief: Twee lijnen (C en T) zichtbaar. Geen cocaïne gedetecteerd of onder 20 ng/mL.
- Positief: Alleen de controlelijn (C) verschijnt. Cocaïne gedetecteerd boven 20 ng/mL.
- Ongeldig: Geen controlelijn (C). Herhaal met een nieuwe test.

Opmerking: Zwakke T-lijnen gelden ook als negatief.

Detectietijd

Cocaïne is tot ongeveer 24–48 uur na gebruik in speeksel detecteerbaar, afhankelijk van dosis, metabolisme en gebruikspatroon.

Nauwkeurigheid

- Totale overeenstemming: 93,8% (vergeleken met GC/MS)
- Betrouwbaar positief bij ≥ 20 ng/mL
- Geen kruisreacties met gangbare medicijnen of supplementen

Belangrijke informatie

- Alleen voor eenmalig gebruik
- Bewaren bij 2–30 °C