


Instructions

Saliva Test for Cannabis (THC)

This rapid test is used to detect the presence of THC (the active substance in cannabis) in saliva. It is a qualitative test, meaning it shows whether THC is above or below a certain cut-off level – in this case, 50 ng/mL. The result indicates recent cannabis use, with a detection window of up to 14 hours.

How to perform the test:

1. Preparation: The user must not eat, drink, chew gum, or smoke for 10 minutes before the test.
2. Saliva Collection:
 - Remove the cap from the test stick.
 - Place the tip of the tongue against the teeth and gums to stimulate saliva.
 - Insert the sponge end of the test stick into the mouth and rub it against the gums on both sides (10–15 times).
 - Then place the sponge under the tongue until liquid starts moving in the test window (approx. 60 seconds).
3. Reading:
 - Place the test on a flat surface.
 - Read the result within 3–10 minutes.
 - Do not read after 10 minutes.

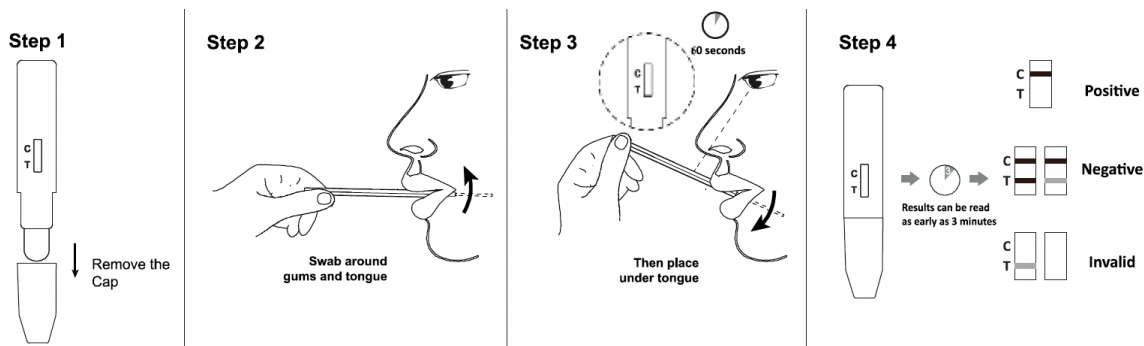

Interpreting the result:

NEGATIVE: Two colored lines appear (one in the control region C, one in the test region T). This means the THC level is below 50 ng/mL.

POSITIVE: Only one line appears in the control region C. No line in the test region T. This indicates that the THC level is above 50 ng/mL.

INVALID: No line appears in the control region C → the test failed. Repeat the test with a new test stick.

Note: Any shade of color in the test line should be considered a negative result.

Reliability:

The test has been compared to lab methods such as GC/MS and LC/MS:

- Sensitivity (true positives): 96.2%
- Specificity (true negatives): 97.1%
- Overall agreement with lab results: 96.8%

This means the test is highly reliable, but note:

- A positive rapid test should be confirmed with a lab test for legal or medical purposes.
- A negative result does not always exclude THC presence – low dose or incorrect sampling may affect results.

Storage:

Store the test in unopened packaging at 2–30 °C. Do not freeze. Do not use after the expiration date.


Instruksjoner

Spytttest for Cannabis (THC)

Denne hurtigtesten brukes til å påvise tilstedeværelse av THC (det aktive stoffet i cannabis) i spytt. Testen er kvalitativ og viser om THC-nivået er over eller under en grenseverdi – i dette tilfellet 50 ng/mL. Resultatet indikerer nylig bruk av cannabis, med et deteksjonsvindu på opptil 14 timer.

Slik utføres testen:

1. Forberedelse: Brukeren må ikke spise, drikke, tygge tyggegummi eller røyke i 10 minutter før testen.
2. Innsamling av spytt:
 - Ta av lokket på testpinnen.
 - Plasser tungespissen mot tennene og tannkjøttet for å stimulere spyttproduksjon.
 - Før svampenden av testpinnen inn i munnen og stryk den mot tannkjøttet på begge sider (10–15 ganger).
 - Plasser deretter svampen under tungen til væske begynner å bevege seg i testvinduet (ca. 60 sekunder).
3. Avlesning:
 - Plasser testen på en flat overflate.
 - Les av resultatet innen 3–10 minutter.
 - Ikke les av etter 10 minutter.

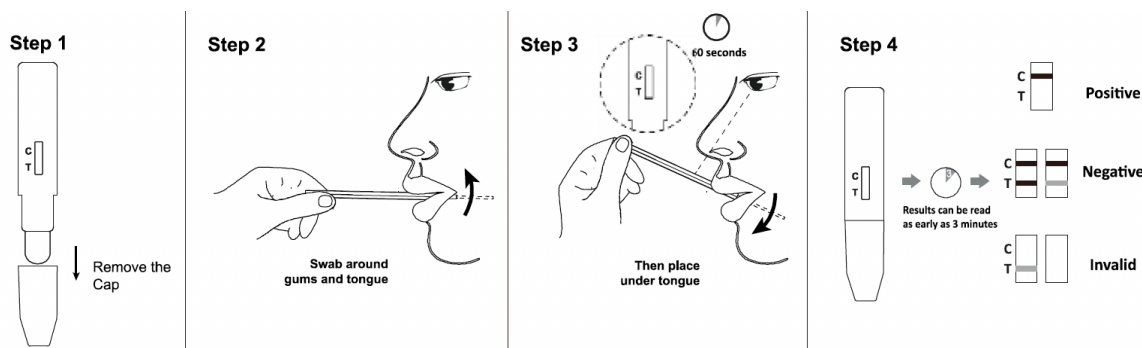

Tolkning av resultat:

NEGATIVT: To fargede linjer vises (en i kontrollområdet C, en i testområdet T). Dette betyr at THC-nivået er under 50 ng/mL.

POSITIVT: Kun én linje vises i kontrollområdet C. Ingen linje i testområdet T. Dette indikerer at THC-nivået er over 50 ng/mL.

UGYLDIG: Ingen linje i kontrollområdet C → testen har mislyktes. Gjenta med en ny testpinne.

Merk: Alle nyanser av farge i testlinjen regnes som negativt resultat.

Pålitelighet:

Testen er sammenlignet med laboratoriemetoder som GC/MS og LC/MS:

- Sensitivitet (sanne positive): 96,2 %
- Spesifisitet (sanne negative): 97,1 %
- Total overensstemmelse med laboratorieresultater: 96,8 %

Dette betyr at testen er svært pålitelig, men merk:

- Et positivt hurtigtestresultat bør bekreftes med laboratorietest for juridiske eller medisinske formål.
- Et negativt resultat utelukker ikke alltid THC – lav dose eller feil prøvetaking kan påvirke resultatet.

Oppbevaring:

Oppbevares i uåpnet emballasje ved 2–30 °C. Må ikke fryses. Ikke bruk etter utløpsdato.

Anleitung

Speicheltest auf Cannabis (THC)

Dieser Schnelltest wird verwendet, um das Vorhandensein von THC (der Wirkstoff in Cannabis) im Speichel nachzuweisen. Es handelt sich um einen qualitativen Test, der anzeigt, ob der THC-Wert über oder unter einem bestimmten Grenzwert liegt – in diesem Fall 50 ng/mL. Das Ergebnis zeigt, ob eine Person kürzlich Cannabis konsumiert hat, mit einem Nachweisfenster von bis zu 14 Stunden.

Durchführung des Tests:

1. Vorbereitung:


Der Benutzer darf 10 Minuten vor dem Test nicht essen, trinken, Kaugummi kauen oder rauchen.

2. Probenentnahme:

- Entfernen Sie die Kappe des Teststäbchens.
- Drücken Sie die Zungenspitze gegen die Zähne und das Zahnfleisch, um die Speichelproduktion anzuregen.
- Führen Sie das Schwammende des Teststäbchens in den Mund ein und reiben Sie es 10–15 Mal an beiden Seiten des Zahnfleisches entlang.
- Legen Sie den Schwamm anschließend unter die Zunge, bis Flüssigkeit im Testfenster zu fließen beginnt (ca. 60 Sekunden).

3. Ablesen:

- Legen Sie den Test auf eine flache Oberfläche.
- Lesen Sie das Ergebnis innerhalb von 3–10 Minuten ab.
- Nicht nach 10 Minuten ablesen.

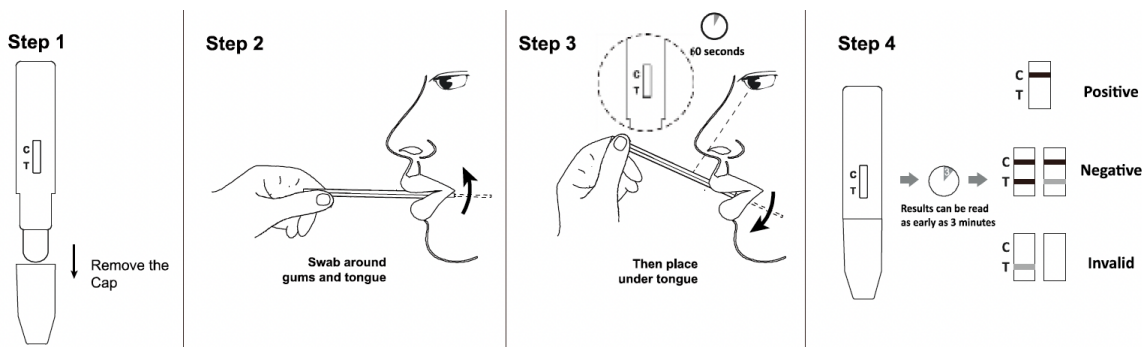

Ergebnisinterpretation:

NEGATIV: Zwei farbige Linien erscheinen (eine im Kontrollbereich C, eine im Testbereich T). Dies bedeutet, dass der THC-Wert unter 50 ng/mL liegt.

POSITIV: Es erscheint nur eine Linie im Kontrollbereich C. Keine Linie im Testbereich T. Dies weist darauf hin, dass der THC-Wert über 50 ng/mL liegt.

UNGÜLTIG: Keine Linie im Kontrollbereich C → Der Test ist ungültig. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststäbchen.

Hinweis: Jede Farbnuance in der Testlinie gilt als negatives Ergebnis.

Zuverlässigkeit:

Der Test wurde mit Labormethoden wie GC/MS und LC/MS verglichen:

- Sensitivität (richtig-positive Ergebnisse): 96,2 %
- Spezifität (richtig-negative Ergebnisse): 97,1 %
- Gesamtübereinstimmung mit Laborergebnissen: 96,8 %

Dies bedeutet, dass der Test sehr zuverlässig ist. Beachten Sie jedoch:

- Ein positives Schnelltestergebnis sollte für juristische oder medizinische Zwecke durch einen Labortest bestätigt werden.
- Ein negatives Ergebnis schließt das Vorhandensein von THC nicht immer aus – niedrige Dosen oder fehlerhafte Probenahme können das Ergebnis beeinflussen.

Lagerung:

Bewahren Sie den Test in der ungeöffneten Verpackung bei 2–30 °C auf. Nicht einfrieren. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Instructions

Test salivaire pour le cannabis (THC)

Ce test rapide est utilisé pour détecter la présence de THC (la substance active du cannabis) dans la salive. Il s'agit d'un test qualitatif, ce qui signifie qu'il indique si le THC est au-dessus ou en dessous d'un certain seuil – dans ce cas, 50 ng/mL. Le résultat indique une consommation récente de cannabis, avec une fenêtre de détection pouvant aller jusqu'à 14 heures.

Comment effectuer le test :

1. Préparation :


L'utilisateur ne doit pas manger, boire, mâcher de chewing-gum ou fumer dans les 10 minutes précédant le test.

2. Collecte de la salive :

- Retirez le capuchon du bâtonnet de test.
- Placez la pointe de la langue contre les dents et les gencives pour stimuler la production de salive.
- Insérez l'extrémité avec l'éponge dans la bouche et frottez-la contre les gencives des deux côtés (10 à 15 fois).
- Placez ensuite l'éponge sous la langue jusqu'à ce que le liquide commence à se déplacer dans la fenêtre de test (environ 60 secondes).

3. Lecture :

- Placez le test sur une surface plane.
- Lisez le résultat entre 3 et 10 minutes.
- Ne lisez pas après 10 minutes.

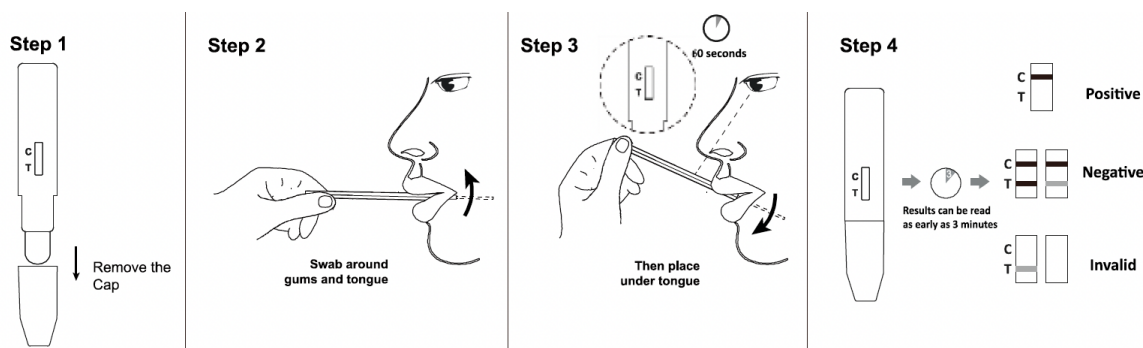

Interprétation des résultats :

NÉGATIF : Deux lignes colorées apparaissent (une dans la zone de contrôle C, une dans la zone de test T). Cela signifie que le niveau de THC est inférieur à 50 ng/mL.

POSITIF : Une seule ligne apparaît dans la zone de contrôle C. Aucune ligne dans la zone de test T. Cela indique que le niveau de THC est supérieur à 50 ng/mL.

INVALIDE : Aucune ligne dans la zone de contrôle C → le test est invalide. Répétez avec un nouveau bâtonnet de test.

Remarque : Toute nuance de couleur dans la ligne de test doit être considérée comme un résultat négatif.

Fiabilité :

Le test a été comparé à des méthodes de laboratoire telles que GC/MS et LC/MS :

- Sensibilité (vrais positifs) : 96,2 %
- Spécificité (vrais négatifs) : 97,1 %
- Concordance globale avec les résultats de laboratoire : 96,8 %

Cela signifie que le test est très fiable, mais notez :

- Un résultat positif doit être confirmé par un test en laboratoire à des fins juridiques ou médicales.
- Un résultat négatif n'exclut pas toujours la présence de THC – une faible dose ou un prélèvement incorrect peut influencer le résultat.

Stockage :

Conservez le test dans son emballage d'origine non ouvert entre 2 et 30 °C. Ne pas congeler. Ne pas utiliser après la date d'expiration.

Instructies

Speekseltest voor Cannabis (THC)

Deze sneltest wordt gebruikt om de aanwezigheid van THC (de werkzame stof in cannabis) in speeksel aan te tonen. Het is een kwalitatieve test die aangeeft of het THC-gehalte boven of onder een bepaalde grenswaarde ligt – in dit geval 50 ng/mL. Het resultaat geeft aan of iemand recent cannabis heeft gebruikt, met een detectievenster tot 14 uur na gebruik.

Hoe de test uit te voeren:

1. Voorbereiding:


De gebruiker mag 10 minuten voor de test niet eten, drinken, kauwgom kauwen of roken.

2. Verzamelen van speeksel:

- Verwijder de dop van het teststaafje.
- Plaats de punt van de tong tegen de tanden en het tandvlees om speekselproductie te stimuleren.
- Breng het sponsuiteinde van het teststaafje in de mond en wrijf het 10–15 keer langs het tandvlees aan beide kanten.
- Plaats vervolgens de spons onder de tong totdat er vloeistof in het testvenster begint te bewegen (ongeveer 60 seconden).

3. Aflezen:

- Plaats de test op een vlakke ondergrond.
- Lees het resultaat af binnen 3–10 minuten.
- Niet aflezen na 10 minuten.

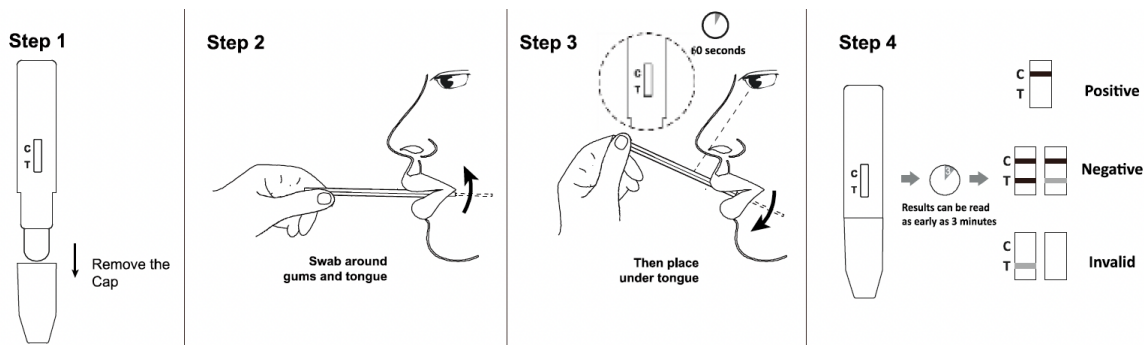

Interpretatie van de resultaten:

NEGATIEF: Twee gekleurde lijnen verschijnen (één in het controlegebied C, één in het testgebied T). Dit betekent dat het THC-gehalte onder de 50 ng/mL ligt.

POSITIEF: Er verschijnt slechts één lijn in het controlegebied C. Geen lijn in het testgebied T. Dit duidt erop dat het THC-gehalte boven de 50 ng/mL ligt.

ONGELDIG: Er verschijnt geen lijn in het controlegebied C → de test is ongeldig. Herhaal de test met een nieuw teststaafje.

Opmerking: Elke tint kleur in de testlijn wordt als een negatief resultaat beschouwd.

Betrouwbaarheid:

De test is vergeleken met laboratoriummethoden zoals GC/MS en LC/MS:

- Sensitiviteit (terecht positieve resultaten): 96,2 %
- Specificiteit (terecht negatieve resultaten): 97,1 %
- Totale overeenstemming met laboratoriumresultaten: 96,8 %

Dit betekent dat de test zeer betrouwbaar is, maar let op:

- Een positieve sneltest moet worden bevestigd met een laboratoriumtest voor juridische of medische doeleinden.
- Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van THC niet altijd uit – een lage dosis of verkeerde monsterafname kan het resultaat beïnvloeden.

Opslag:

Bewaar de test in de ongeopende verpakking bij 2–30 °C. Niet invriezen. Niet gebruiken na de vervaldatum.