

NÄSTA GENERATIONS DESINFEKTIONSMEDEL

Incidin® OxyFoam S och OxyWipe S


Bruksfärdigt rengörings-/desinfektionsmedel med Snabbverkande H_2O_2 ™

Incidin OxyFoam S och Incidin OxyWipe S har en innovativ sammansättning med en patenterad väteperoxidlösning som verkar över ett brett spektrum.

Produkterna är effektiva mot ett brett spektrum av bakterier och virus samt avdunstar snabbt utan att lämna aktiva rester.

Incidin OxyFoam S och OxyWipe S:

- ▲ är de första sporicida och virucida desinfektionsmedlen för alla ytor
- ▲ innehåller Snabbverkande H_2O_2 ™
- ▲ uppfyller EN 16615
- ▲ har ingen faromärkning (enl. CLP) och kräver därför inte personlig skyddsutrustning¹
- ▲ har utmärkt materialkompatibilitet

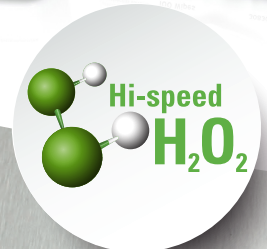

Incidin® OxyFoam S och OxyWipe S

Bruksfärdigt rengörings-/desinfektionsmedel med
Snabbverkande H₂O₂TM

3 MIN² Sporicida mot <i>C. difficile</i> (SUSPENSIONS TEST)	2 MIN² Virucida (UNDER RENA FÖRHÅLLANDEN)	1 MIN² Baktericida (EN 13727 / 16615)
---	---	---

HUVUDEGENSKAPER	FÖRDELAR
EFFEKTIVA	Effektiva mot ett brett spektrum av bakterier och virus. Korta kontakttider
SÄKRA	Ingen faromärkning (enl. CLP); kräver ingen personlig skyddsutrustning
ENKLA ATT ANVÄNDA	Rengör och desinficerar i ett enda steg. Har utmärkt materialkompatibilitet

MIKROBIOLOGISKA OCH VIROLOGISKA TESTRESULTAT

VERKNINGSGRAD I OUTSPÄDD FORM	OxyFoam S KONTAKTTID	OxyWipe S KONTAKTTID
Testad enl. RKI-rekommendation 01/2004* (under smutsiga förhållanden)		
Effektiv mot höjeförsedda virus enl. RKI-rekommendation 01/2004*	15 sek	30 sek
Polyoma SV40*	30 sek	30 sek
Europeiska normer (under rena och smutsiga förhållanden)		
EN 13727 baktericid	1 min	2 min
EN 13624 jästicid	1 min	15 min
EN 13624 fungicid	5 min	30 min
EN 14348 tuberkulocid, mykobaktericid	5 min	30 min
EN 14476 virucid	2 min** / 30 min	30 min**
EN 14476 Adeno	30 sek	30 sek
EN 14476 Noro	1 min (rena förhållanden) 15 min (smutsiga förhållanden)	15 min
EN 13704 sporidic**	30 min	60 min
EN 13704 (<i>C. difficile</i>)**	3 min	15 min
Europeiska normer (under smutsiga förhållanden) – fyrfältstest		
EN 16615 baktericid	1 min	2 min
EN 16615 jästicid	1 min	1 min
EN 16615 fungicid	5 min	5 min
EN 16615 tuberkulocid, mykobaktericid	5 min	5 min
Sporidic (metod EN 16615)**	15 min	30 min
<i>C. difficile</i> (metod EN 16615)**	5 min	5 min

* DVV 2008 ** Under rena förhållanden

INCIDIN OXYFOAM S BRUKSANVISNINGAR



- 1 Spreja ytan från ca 30 cm håll
- 2 Stryk ut så att hela ytan blir blöt
- 3 Låt torka



- 1 Applicera på en ren torkduk
- 2 Stryk ut så att hela ytan blir blöt
- 3 Låt torka

ECOLAB AB
Glasfibergatan 10,
SE-125 45 Älvsjö,
Sweden
Tel: +46 8 60 32 200 Fax:
+46 8 60 32 238
www.se.ecolab.eu

TILLVERKARE
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173 599 0

CE 0297

EFFECTIVE.
SAFE.
CONVENIENT.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Incidin OxyFoam S:
CE-märkt rengörande och desinficerande skumsprej för diverse ytor, medicinskteknisk utrustning och inventarier.



Incidin OxyWipe S:
CE-märkt rengörande och desinficerande våtservetter för diverse mindre ytor, medicinskteknisk utrustning och inventarier.



BRUKSANVISNINGAR

Incidin OxyFoam S: Ta på handskar. Ska infogas mellan Incidin OxyFoam S och Spreja

Incidin OxyWipe S: Ta på handskar. Ta en våtservett och torka av ytan noggrant. Tillse att hela ytan är fuktig under inverknings tiden. Produkterna ska inte användas för slutdesinfektion av invasiv medicinsk utrustning. Använd inte på ytor eller utrustning som är oxidationskänsliga, tex marmor, zink, koppar, mässing, silver etc. Vid osäkerhet följ tillverkarens rekommendationer.

INNEHÅLL

Innehåll per 100 g: Incidin OxyFoam S: 1,5 g väteperoxid. Incidin OxyWipe S: 1,5 g väteperoxid | pH-värde ~ 2,0-2,1

FÖRPACKNINGS- OCH BESTÄLLNINGSPÅRNING

PRODUKT	LEV-FÖRP	ART. NR
Incidin OxyFoam S	6 x 750ml	3082910
Incidin OxyFoam S	2 x 5L	3087450
Tappkran OxyFoam S 5L	10st	10033882
Incidin OxyWipe S	6 x 100st	3083020
Väggghållare OxyWipe S	1st	10033877

FÖRVARING

Förvaras torrt och svalt (ej över 25 °C). Förvaras i originalförpackningen och skyddas från direkt solljus. Hållbarhet efter öppning:
Incidin OxyFoam S: t.o.m. sista förbrukningsdag
Incidin OxyWipe S: 3 Månader
Användningsföreskrifter

1. Det finns inget behov av personlig skyddsutrustning vid användning av OxyFoam S eller OxyWipe S. Dock rekommenderar vi skyddshandskar för att undvika uttorkning av huden.

2. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etikett och produktinformation innan användning. Produkten är endast avsedd för professionellt bruk

ECOLAB®