STOLENS DELAR

1. Sits
2. Sidhandtag
3. Monteringsklämma
4. Höjdjustering
5. Ben med halkskydd



1. Egenskaper

Duschstolen är tillverkad av en aluminiumram och en bred sits av slitstark PVC. Stolen har höjdjusterbara ben, sidhandtag och halkskyddande gummifötter som förhindrar att stolen glider på våta ytor. Den särskilt utformade stolsbasen gör det enkelt att fälla ihop stolen och förvara den snabbt. Stolen är dessutom utrustad med monteringssystemet Tool-Free (TF), utan användning av verktyg.
Setet innehåller: sits med fällbar stolsbas, höjdjusterbara ben (4 st.).

2. Användning

Duschstolen är ett hjälpmedel som är utformat för att hjälpa användaren att utföra hygienaktiviteter. Stolen rekommenderas för personer med nedsatt rörlighet som förhindrar eller försvårar självständigt utförande av dagliga aktiviteter. Stolen kan användas i duschen, i badkaret, i badrum och andra fuktiga utrymmen hemma och på sjukhus.

3. Montering

Steg 1. Ta ut stolen och dess ben ur kartongen.
Steg 2. Montera de 4 benen på basen. Säkra dem med låsstiften på önskad höjd. Kontrollera att alla ben är på samma höjd!
Steg 3. Greppa basramen och för in det återstående röret i den silverfärgade öppningen på sitsens undersida (bild 1).

HÖJDJUSTERING

För att justera duschstolens höjd, tryck på låsstiftet på benen, välj lämplig höjd och lås i läget. Benen kan justeras i steg om 2,5 cm.
Observera! Stiften måste vara inställda på samma nivå i alla ben.

IHOPFÄLLNING

För att fälla ihop stolen, placera den på golvet med sitsen nedåt, sätt foten på sitsen, greppa den motsatta basramen i förhållande till den som är monterad i den silverfärgade öppningen (bild 2) och dra uppåt.

Observera! Använd inte överdriven kraft när du trycker ned sitsen.

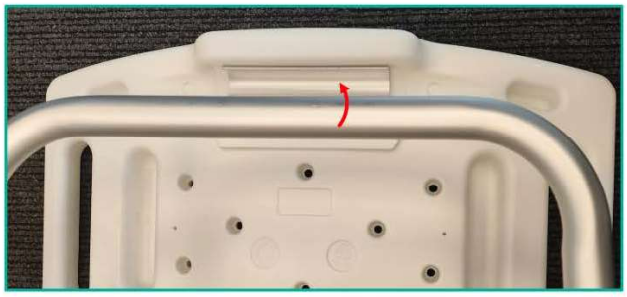




Bild 1 | Bild 216

4. Tekniska data

Total bredd: 54-56 cm	**Sitsens mått:** 50 x 25 cm
Total längd: 44-50 cm	**Sitthöjd från golvet:** 36,5-41 cm
Höjdjustering: 40-44,5 cm	**Vikt:** 2,80 kg
Maximal belastning: 136 kg	**Mått hopfälld:** 50 x 11 x 67 cm *mått mätta utan ben*

5. Anmärkningar

Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av produkten, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter eller missbruk.

6. Underhåll

- Rengör duschstolen regelbundet med endast vatten, svamp och milda rengöringsmedel för plastmaterial, såsom tvål. Torka noggrant.
- Använd inte för rengöring: starka rengöringsmedel, slipande medel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel.
- Minst en gång var tredje månad ska följande kontrolleras: låsstiftens skick och rörens skick (om sprickor finns). Det rekommenderas att kontrollera gummifötterna regelbundet. Vid slitage ska fötterna bytas ut mot nya.

7. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där

du köpte produkten. Kom ihåg att inköpsbevis (kvitto eller faktura) ska sparas för garantiändamål.

9. Incidenter med medicintekniska produkter

Varje allvarlig incident som involverar en medicinteknisk produkt måste rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren eller patienten är bosatt.

10. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	LOT-nummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Observera		Läs bruksanvisningen
	Produkten uppfyller Europeiska unionens lagkrav för medicintekniska produkter (MDR 2017/745)		

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt hos våra distributörer. Läs mer på: www.timago.com. Tack för att du valde Timago!